

VERMEIREN

HEM1

INSTRUCTION MANUAL



"HEM1: Système hémiplégique"


Il est possible d'ajouter l'option kit hémiplégique (HEM 1) sur certains de nos fauteuils.

Cette option est pratique pour les personnes ayant un côté du corps paralysé ou un bras cassé.

Référez vous au manuel d'instructions.

1. Spécifications techniques

Description	Dimensions
Poids système HEM1	+7 kg (en plus du poids standard du fauteuil)
Hauteur totale (des poignées jusqu'au sol)	850 mm
Distance poignées - dossier	210 mm - 590 mm
Largeur totale	+40 mm (en plus de la largeur standard du fauteuil)

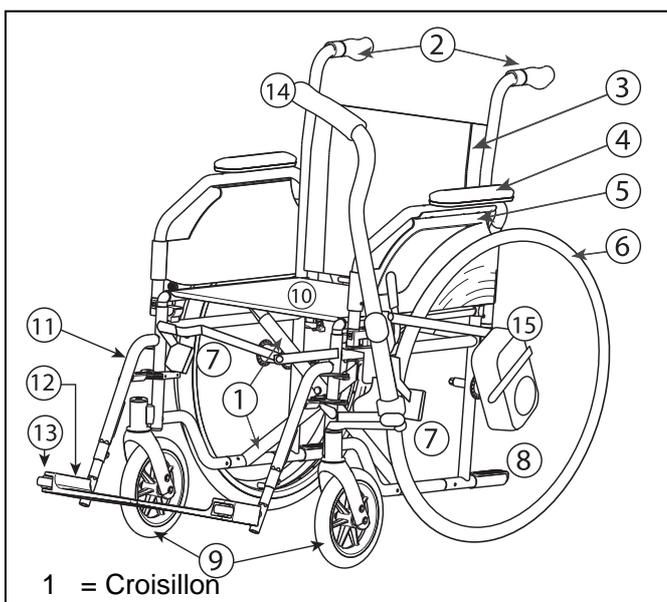2. Composants

- 1 = Croisillon
- 2 = Poignées de poussée
- 3 = Dossier
- 4 = Manchettes d'accoudoir
- 5 = Accoudoirs
- 6 = Roues motrices (roues arrière)
- 7 = Frein
- 8 = Monte trottoir
- 9 = Roues directionnelles (roues avant)
- 10 = Siège
- 11 = Repose-pieds
- 12 = Palette
- 13 = Roulettes antichocs
- 14 = Poignée de conduite
- 15 = Levier avant/arrière

3. Règles de sécurité

- ⚠ **Eloignez vos doigts des parties mouvantes du fauteuil (système de freinage hémiplégique, roues motrices arrière, rayons etc.).**
- ⚠ **Prenez en compte le fait que votre fauteuil est plus large de 40mm.**
- ⚠ **Votre fauteuil a été crash-testé avec l'option Kit hémiplégique (HEM 1).**

4. Mode de livraison


Le Kit hémiplégique (HEM 1) doit contenir :

- Roue arrière (une main courante)
- Roue arrière hémiplégique (deux mains courantes)
- Système de conduite (poignée, système de propulsion)
- Système de freinage hémiplégique
- Manuel d'instructions

Vérifiez que le Kit hémiplégique 1 contient tous les éléments et qu'aucun d'entre eux n'a été abimé durant le transport.

5. Conduire le fauteuil

- ⚠ **AVERTISSEMENT : Risque de blocage - Faites attention aux passages étroits (portes etc.).**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : Risque de brûlures - Faites attention lorsque vous conduisez le fauteuil dans des environnements chauds ou froids (soleil, froid extrême, saunas, etc.). Les surfaces peuvent également répercuter la température ambiante.**

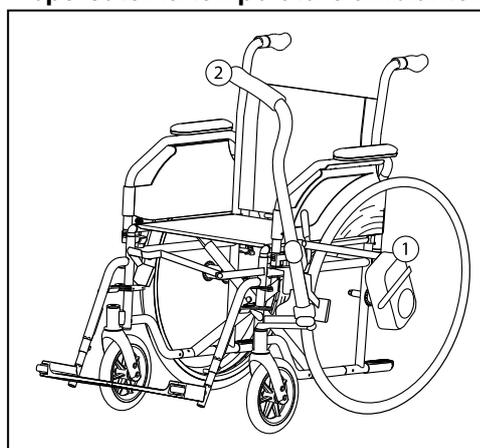

Vous conduisez le fauteuil seul:

1. Relâchez les freins.
2. Placez le levier ① dans la position désirée (complètement en avant pour avancer, complètement en arrière pour reculer).
3. Prenez la poignée de conduite ② pour faire rouler votre fauteuil. Si le levier avant/arrière ① n'est pas placé complètement dans la bonne position, le fauteuil ne bougera pas quand la poignée de conduite ② sera poussée ou tirée.
4. Bougez la poignée de conduite ② en alternant avant et arrière pour que le fauteuil roule droit.

5. Tournez la poignée de conduite ② vers la gauche ou la droite pour diriger les roues avant et tourner le fauteuil dans la bonne direction.
6. Tirez la poignée de conduite ② dans la position la plus en arrière pour pouvoir arrêter le fauteuil. Maintenant la barre est bloquée. Pour pouvoir la bouger, placez le levier avant/arrière ① dans la position du milieu.


Vous êtes poussé:

Vous pouvez être poussé en plaçant le levier avant/arrière ① dans la position centrale. La poignée de conduite ② pour faire avancer le fauteuil est alors bloquée.

Pour piloter le fauteuil et le faire tourner à gauche ou à droite, la personne dans le fauteuil devra utiliser la poignée de conduite ②.

6. Ajustement de la barre de conduite

La barre de conduite ① est ajustable (3 positions, étapes de 15 mm) pour augmenter ou réduire la force donnée par la poignée de conduite.

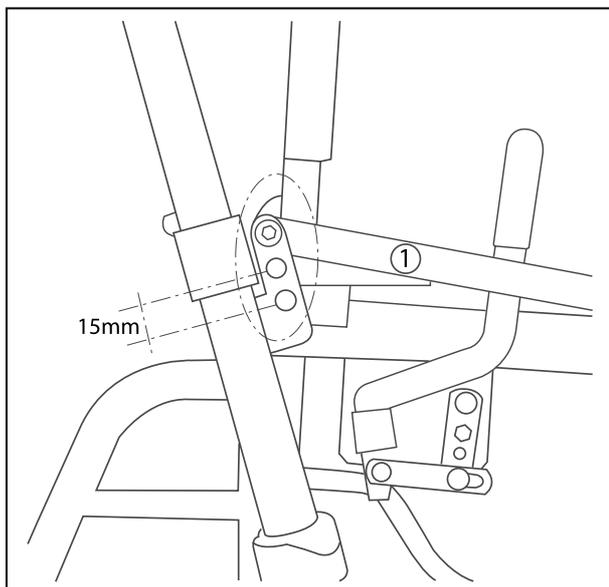


7. Monter / démonter les roues arrière

Avec l'option HEM1 il n'est pas possible de démonter les roues arrière du fauteuil.

8. Utilisation des freins

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : les freins n'ont pas pour but de ralentir le fauteuil pendant qu'il roule. Utilisez les freins uniquement pour prévenir les mouvements inattendus.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Le bon fonctionnement des freins est influencé par l'usure des pneus (due à l'eau, la boue, l'huile etc.). Vérifiez les pneus avant chaque utilisation.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Les freins sont ajustables. Ils peuvent s'user, vérifiez les freins avant chaque utilisation.

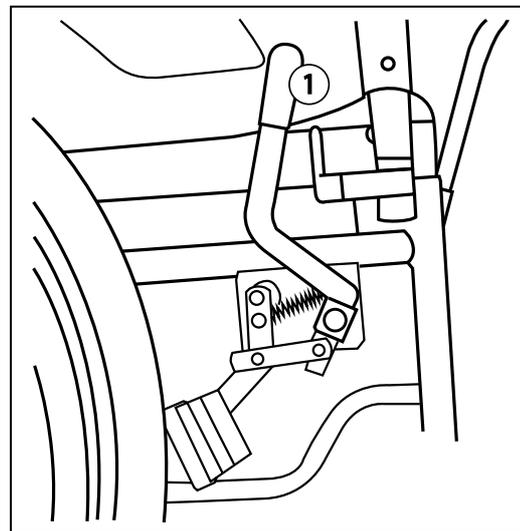

Pour actionner les freins :

1. Poussez le levier du frein ① en direction du système de propulsion vers l'avant. L'autre frein s'enclenche également.

⚠ ATTENTION : Risque de mouvements inattendus - Le fauteuil doit être sur une surface plane, à l'horizontal, avant que les freins soient relâchés.

Pour relâcher les freins :

1. Poussez le levier du frein ① vers l'arrière. L'autre frein est relâché également.

9. Maintenance

Vérifiez le système de freinage HEM1.

Vérifiez que le système de conduite HEM1 marche correctement. Lubrifiez les parties mouvantes et les roulements toutes les 8 semaines.

Belgique

N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

France

Vermeiren France S.A.
Z. I., 5, Rue d'Ennevelin
F-59710 Avelin
Tel: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Italie

Vermeiren Italia
Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Tel: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

Pologne

Vermeiren Polska Sp. z o.o
ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

République tchèque

Vermeiren ČR S.R.O.
Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
Tel: +420 596 133 923
Fax: +420 596 121 976
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

Allemagne

Vermeiren Deutschland GmbH
Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Tel: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Autriche

Vermeiren Austria GmbH
Schärdinger Strasse 4
A-4061 Pasching
Tel: +43(0)7229 64900
Fax: +43(0)7229 64900-90
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Suisse

Vermeiren Suisse S.A.
Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Tel: +41(0)33 335 14 75
Fax: +41(0)33 335 14 67
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Espagne / Portugal

Vermeiren Iberica, S.L.
Carratera de Cartellà, Km 0,5
Sant Gregori Parc Industrial Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 42 84 33
Fax: +34 972 40 50 54
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es

Fabricant

Vermeiren GROUP
Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be