

User manual

MANUEL D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE

Goliat Artro



Contents

Preface	4
1. Your product	6
2. Before use	7
2.1. Intended use and indications	7
2.2. Safety instructions and applicable risks	8
2.3. Symbols on the rollator	9
2.4. Upon delivery	10
2.5. Shipping and storage	10
3. Assembly/Disassembly and adjustments	11
3.1. Assembly	11
3.2. Disassembly	16
3.3. Mounting the walking stick holder (optional)	16
3.4. Height adjustments	17
4. Using your rollator	18
4.1. Brake system	18
4.2. Folding/Unfolding	19
4.3. Negotiating kerbs	20
4.4. Sitting down, standing up and walking	21
5. Maintenance	21
5.1. Cleaning	21
5.2. Disinfection	22
5.3. Inspection / Service / Repairs	22
5.4. Reuse	23
5.5. Disposal at end of life	23
6. Technical specifications	24

Preface

Congratulations! You are now owner of a Vermeiren rollator!

Thank you for your trust in the products of Vermeiren. To support you on the use of this rollator and its operating options, this manual is offered. Please read it carefully; it will help you to get familiar with the operation, capabilities and limitations of your rollator.

If you still have questions after reading this manual, do not hesitate to contact your specialist dealer. He/she will be glad to help you.

Important note

To ensure your safety, and to prolong the lifetime of your product, please take good care of it and have it checked and serviced on a regular basis.

This manual reflects the latest product developments. Vermeiren has the right to implement changes to this type of product without any obligation to adapt or replace similar products previously delivered.

Pictures of the product are used to clarify the instructions. Details of the depicted product may deviate from your product.

Information available

On our website <http://www.vermeiren.com/> you will always find the most recent version of the following information. Please consult this website regularly for possible updates.

Visually impaired people can download the electronic version of this manual and have it read out by means of a text-to-speech software application.

	User manual For user and specialist dealer
	Service manual for rollators For specialist dealer
	EC declaration of conformity

1. Your product



1. Handgrips
2. Brake lever
3. Underarm support
4. Backrest
5. Storage bag
6. Seat
7. Front wheels
8. Rear wheels
9. Brake cable
10. Tipping aid
11. Reflectors
12. Identification plate

2. Before use

2.1. Intended use and indications

- This product is a medical device.
- Indications and contraindications: The rollator is meant as support of the leg function during walking and daily activities. With the underarm supports, it is specifically suited for users suffering from mobility impairments involving reduced movement/balance but with sufficiently preserved walking ability and coordination, when the use of the standard rollator is not possible due to impaired hand function and the use of other walking aids is insufficient. Do not use the rollator if you have other physical limitations that may cause unsafe use of your rollator, like a weak arm, balance disorders, impaired vision, limb loss, ...
- The rollator is designed and produced solely to be used as walking aid for one person with a maximum weight of 200 kg.
- The rollator will compensate the lack of adequate support by the legs by leaning on, or moving with, the rollator with usage of the upper limbs or chest. The rollator will provide better stability, support and safety during walking.
- The rollator can be used indoors and outdoors.
- It is not intended for transport of goods and/or more people than the user. It is also not intended to be used as a transport aid while sitting down.
- It should only be used on surfaces where all four wheels are touching the ground. Do not use the rollator on rocky, bumpy or sandy terrain, or places with a steep inclination. The rollator may become unstable. Look for flat, stable areas, and bevelled kerbs to walk with your rollator.
- The warranty on this product is based on normal use and maintenance as described in this manual. Damage to your product caused by improper use or lack of maintenance will cause the warranty to lapse.
- Please check all technical details and limits of your rollator in §6..

2.2. Safety instructions and applicable risks

CAUTION

Risk of injuries

- Please read and follow the instructions in this manual. Otherwise you may get injured, or your product may get damaged.

Keep the following general warnings in mind during use:

- Check that no stones or other objects block the wheels of the rollator.
- Make sure that both brake levers are in parking mode before you use the rollator as aid to stand up. When you are standing comfortable and stable, you can unlock the parking brakes.
- While walking, keep both hands on the handgrips.
- Be aware that some parts of your rollator may get very hot or cold due to ambient temperature, solar radiation, heating devices, etc. Be careful when touching.
- Before every use, check that the height adjustments are firmly secured, see **§3.4.**
- Do not hold the handgrips with wet hands. If you do so, you can lose your grip and lose your balance.
- Do not proceed with your rollator into traffic. Always stay on the pavement.
- Take note of the instructions for care and service. The manufacturer is not liable for damage caused by improper servicing / care.

Any serious incident [MDR (EU) 2017/745 §2 (65)] that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Be aware that your rollator may interfere with some types of anti-theft systems, depending on the settings used. This may cause the shop's alarm to go off.

2.3. Symbols on the rollator

i Identification plate is located beneath the left handgrip at the inner side of the base frame

	Maximum weight of the user in kg
	Type designation
	Catalogue number
	Serial number
	Medical device
	Manufacturer
	Date of manufacture
	Declaration of conformity
	Attention: important information
	It is advised to read the manual

2.4. Upon delivery

Unpack your product and verify if the delivery is complete. The following items should be included:

- Base frame with seat, front and rear section;
- Front wheels with support;
- Rear wheels with support and brake cable connection;
- Handgrips with brakes
- Backrest
- Storage bag;
- Manual

Verify your product for transport damage. If you find any damages after delivery, contact the transporter.

2.5. Shipping and storage

The shipping and storage of the rollator should happen according to the technical specifications in §6.. Make sure that the rollator is stored dry.

Provide sufficient covering or packaging to protect the rollator from rust and foreign bodies (e.g. salt water, sea air, sand, dust).

Make sure no objects are stored on or against the rollator to prevent damage.

3. Assembly/Disassembly and adjustments

CAUTION

Risk of injuries

- Assemble the rollator completely, before adjusting its height.

3.1. Assembly

3.1.1. Mounting the front and rear wheels

CAUTION

Risk of falling or tipping over

- Always set the four wheels to the same height.
 - When mounting the front wheels, make sure they are installed on the correct side. The wheel axles must be vertical, see illustration.
-  When mounting the rear wheels, check that the brake cable connection **(4)** is positioned to the inside of the rollator.
1. Put the rollator on the front/back.
 2. Press and hold the spring button **(1)** on the wheel support.
 3. Slide the wheel support **(2)** into the frame tube **(3)** until the spring button pops out of the desired adjustment hole.
 4. Repeat for the other wheels. Make sure that all four wheels are well secured.




3.1.2. Mounting the handgrips

1. Place the rollator on four wheels. Make sure that it is standing stable.
2. Push and hold the spring button **(5)** on the handgrip.
3. Slide the handgrip into the frame tube **(6)** until the spring button pops out of the desired adjustment hole.
4. Repeat for the second handgrip. Make sure that both handgrips are well secured, and that they are set to the same height.
5. Insert the star knob **(7)** in the top hole on each side for extra rigidity.



Cable clamps

To prevent the cable from being trapped between moving parts of the rollator, secure the brake cable to the frame using the cable clamp **(8)**.

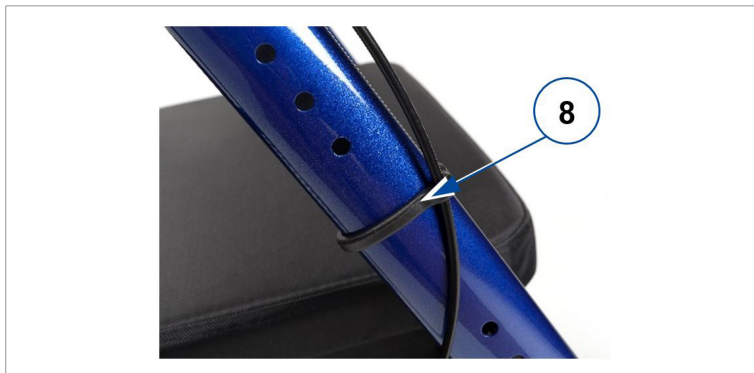


3.1.3. Mounting the storage bag

CAUTION

Risk of falling or tipping over

- Do not overload the storage bag.

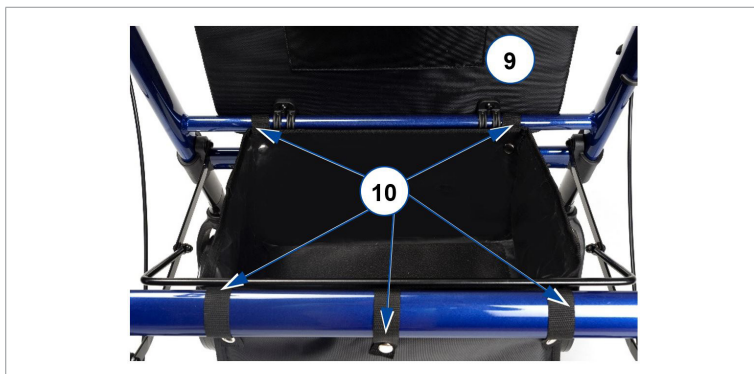

The maximum carrying weight of the storage bag can be found in §6..

The storage bag is meant to be mounted below the seat, on the two horizontal tubes on which the seat rests.

1. Fold the seat (9) open.
2. Mount the storage bag on the frame tubes with the five snap fasteners (10).
3. Fold the seat down again.

3.1.4. Mounting/Removing the backrest

Removing

1. Turn the locks on both sides of the backrest to “open” position [A] by turning the lever (11).
2. Slide the backrest upwards and remove.



Mounting

1. Make sure that the locks on both sides of the backrest are placed to “open” position [A].
2. Slide the backrest sides on the support (12), as far down as possible.
3. Adjust the locks on both sides of the backrest to “lock” position [B] by turning the lever (11). Make sure that the backrest is well secured into position before sitting down!



3.1.5. Handgrip position

CAUTION

Risk of falling

- Do not exceed the maximum range as marked on the handgrip support.

The position of the handgrips can be steplessly adjusted to suit the user's needs. To make adjustment easier, 5 positions have been marked on the handgrip support **(13)**.

1. Loosen the lever **(14)** below the underarm support.
2. Slide the handgrip forward/backward until the desired position.
3. Tighten the lever.
4. Repeat for the other handgrip and make sure that the handgrips are well secured.



3.2. Disassembly

CAUTION

Risk of damage

- Pay attention to the position of the brake cables. Don't pull the handgrips too high to prevent damage to the brake cable.

The disassembly of the rollator is conducted in reverse order to the assembly:

1. Storage bag: Open snap fasteners **(10)** and remove the bag.
2. Cable clamp **(8)** (2x): Carefully pull from the frame tube.
3. Handgrip with brake lever (2x): Press and hold the spring button **(5)**, and pull the handgrip out of the frame.
4. Front and rear wheels (4x): Press and hold the spring button **(1)**, and pull the wheel out of the frame.

3.3. Mounting the walking stick holder (optional)

1. Click the cup **(15)** onto the provided support on the lower rear frame.
2. Remove the screw **(16)** from the top frame and place the screw that is delivered with the walking stick holder in its place.
3. Place the clip with nut on the other side of the screw, and tighten firmly.



3.4. Height adjustments

- i** To adjust the height of the rollator according to body size:
- First adjust the seat height.
 - Next adjust the height of both handgrips.

⚠ CAUTION

Risk of falling or tipping over

- Always set the four wheels to the same height.

The rollator can be altered in height by adjusting the handgrips (6 positions, in steps of 25 mm)

The seat can be altered in height by adjusting the front wheels and rear wheels (5 positions, in steps of 25 mm).

To adjust either of these:

1. Press and hold the spring button.
2. Slide the wheel or handgrip up/down in the frame tube to the desired height, until the spring button pops out of the corresponding adjustment hole.

3. Make sure that the spring button is well secured.
4. Insert the star knob in the top hole to extra secure the handgrip.

Make sure that

- both handgrips have been set to the same height.
- all 4 wheels have been set to the same height.

4. Using your rollator

4.1. Brake system

CAUTION

Risk of falling

- Check the working of the brakes to ensure your safety. The condition of the brakes is influenced by wear, oil and other contamination of the rear wheels and braking mechanism.

The rollator is equipped with brakes, operated by two brake levers (15). The brake levers operate in two modes: running brakes and parking brakes.


CAUTION

Risk of damage

- Do not push the rollator too hard while using the running brakes. This may cause damage to the tyres or brakes.

To use the running brakes, pull both brake levers (15) simultaneously upwards [A] in a squeezing motion. To stop braking, release the brake levers.

To use the parking brakes, push both brake levers (15) downwards in locked position [B]. Always use both parking brakes simultaneously. To end the parking mode, pull both brake levers simultaneously upwards.

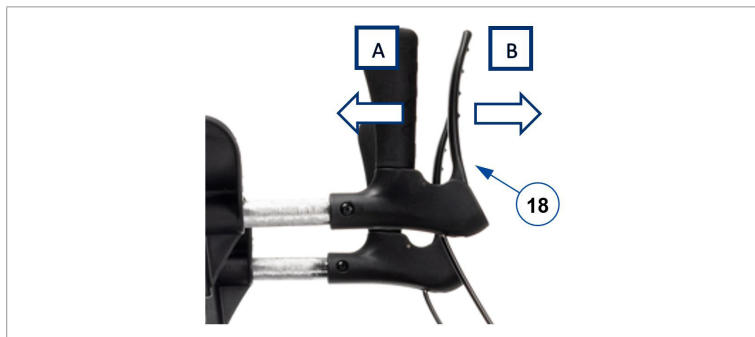

4.2. Folding/Unfolding

CAUTION

Risk of entrapment

- Keep fingers, buckles, jewellery and clothes away from the folding mechanism.

CAUTION

Risk of falling

- Check that the rollator is completely open and that the frame is locked.



4.2.1. Unfolding the rollator

1. Push both brake levers down to parking position, see §4.1..
2. Place the rollator with four wheels on the ground while holding the frame tubes.
3. Pull the front (18) and rear (19) frame tubes apart, and push the bars of the folding mechanism (20) as far down as possible. Prevent your fingers from being trapped in the mechanism!
4. Fold down the seat.
5. Mount the backrest, see §3.1.4..

4.2.2. Folding the rollator


1. Stand behind the rollator.
2. Push both brake levers down to parking position, see §4.1..
3. Fold the seat upward.
4. Empty the storage bag.
5. Pull the brace (20) upward to close the frame a bit.
6. Close the frame completely by pushing front and rear frame tubes together.
7. Remove the backrest, see §3.1.4..

4.3. Negotiating kerbs

CAUTION

Risk of falling

- Take kerbs straight, with both front wheels aligned to the kerb. Keep the rollator nearby.

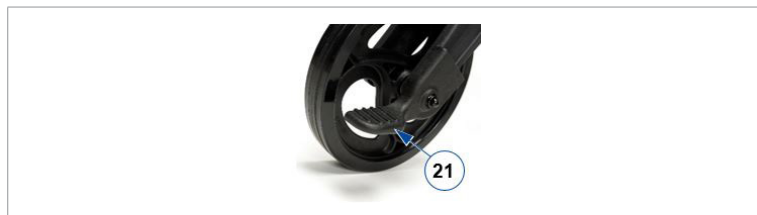

To make it easier to take small obstacles, such as kerbs, the rollator is equipped with a tipping aid on the two rear wheels.

1. Make sure you are standing stable while holding both handgrips.
2. Use one foot and push on tipping lever (21) to lift the front wheels.

3. Keep the rollator in that position with the handgrips and move slowly forward until the front wheels are on the kerb.
4. Now lift the handgrips and move forward to place the rear wheels on the kerb.
5. When the rollator is standing stable, you can take the kerb yourself.

4.4. Sitting down, standing up and walking

CAUTION

Risk of falling

- Make sure that both brake levers are in parking position before sitting down, see §4.1.. Keep the brake levers in this position until you start walking again. Keep your feet between the rear wheels.
 - Do not propel the rollator while seated.
1. Push both brake levers down to parking position.
 2. Check whether the backrest and seat are turned down and secured into place.
 3. While leaning on the handgrips, turn around and sit down on the seat.
 4. To stand up again, lean on the handgrips and turn around.
 5. Pull both brake levers up and use the running brakes.
 6. Release the brake levers and step forward with the rollator close to your body.

5. Maintenance

-  Regular care ensures that your rollator is preserved in a perfectly functional condition. For the maintenance manual, refer to the Vermeiren website: www.vermeiren.com.

5.1. Cleaning

Use a soft, damp cloth and lukewarm water with a mild household soap to clean the rollator. Avoid soaking. Do not use abrasive cleaning agents to clean.

5.2. Disinfection

CAUTION

Risk of damage

- Disinfections may only be undertaken by trained persons. Consult your specialist dealer.

Use a soft, damp cloth and lukewarm water with a mild household disinfectant to clean the rollator.

5.3. Inspection / Service / Repairs

The expected service life of your rollator is 5 years. The lifespan of the rollator is influenced by its use, storage, maintenance, service and cleaning.

Before you resume use of the rollator, it should be inspected on the following points:

- Completeness.
- Folding mechanism: functioning well.
- Bolts and nuts: tightly fastened.
- Brakes: functioning well.
- Wheels (stability, tracking, fixing screws).
- In case of regular contact with wires, hair or other residues, the wheels may get blocked.
Check regularly that the wheels rotate freely and that they are in good condition.
- Frame (deformation, stability, connections).
- Handgrips (safe locking of height adjustment system, good support of handgrips).
- Seat, backrest and storage bag (wear or damage).

Your rollator is constructed of aluminium and plastic components. We recommend to have your product inspected at least once a year, but the service frequency depends on the frequency and intensity of use. Consult your specialist dealer to make an agreement on service frequency.

Repairs and replacements may only be undertaken by trained persons, and only genuine replacement parts of Vermeiren should be used.

Do not hesitate to use the services offered by your specialist dealer. He/she will be glad to assist you regarding any service and repairs.

5.4. Reuse

Before each reuse, have the rollator disinfected, inspected and serviced according to the instructions in **§5.2.** and **§5.3.** .

5.5. Disposal at end of life

At end of life, you need to dispose your rollator according to the local environmental legislation. The best way to do so, is to disassemble the rollator to facilitate the transport of recyclable parts.

6. Technical specifications

The technical details below are only valid for this rollator, at standard settings and optimal ambient conditions. Take these details into account during use.

Brand	Vermeiren
Product group	Rollator
Type	Goliat Artro
Description	Dimensions
Maximum user weight	200 kg
Maximum weight of storage bag load	5 kg
Overall length	750 mm
Folded length	400 mm
Overall width	730 mm
Folded width	730 mm
Overall height	1140 - 1310 mm
Folded height	1080 - 1280 mm
Handgrip height	1140 - 1310 mm
Recommended body height	1650 - 2000 mm
Distance between handgrips	580 mm
Seat height	490 - 560 mm
Seat width	470 mm
Seat depth	410 mm
Total mass - without basket	12,35 kg 12 kg
Wheel diameter	200 x 30 mm
Brakes	Running & parking brakes
Turning width	1050 mm
Storage and use temperature	+5°C - +41°C
Storage and use humidity	30% - 70%
We reserve the right to introduce technical changes. Measurement tolerance +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Préface	26
1. Votre produit	28
2. Avant l'utilisation	29
2.1. Usage prévu et indications	29
2.2. Consignes de sécurité et risques applicables	30
2.3. Symboles sur le déambulateur	31
2.4. Lors de la livraison	32
2.5. Transport et entreposage	32
3. Montage/Démontage et réglages	32
3.1. Montage	33
3.2. Démontage	37
3.3. Montage du support de canne de marche (en option)	38
3.4. Réglages de hauteur	38
4. Utiliser votre déambulateur	39
4.1. Système de freinage	39
4.2. Pliage/Dépliage	40
4.3. Franchir des bordures	42
4.4. S'asseoir, se lever et marcher	42
5. Entretien	43
5.1. Nettoyage	43
5.2. Désinfection	43
5.3. Inspection / Entretien / Réparation	44
5.4. Réutilisation	45
5.5. Évacuation	45
6. Spécifications techniques	45

Préface

Félicitations ! Vous êtes à présent l'heureux propriétaire d'un déambulateur Vermeiren !

Merci de la confiance que vous accordez aux produits de Vermeiren. Ce manuel est destiné à vous aider dans l'utilisation de ce déambulateur et de ses options de fonctionnement. Veuillez le lire attentivement. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec le fonctionnement, les capacités et les limites de votre déambulateur.

Si vous avez encore des questions après la lecture de ce manuel, n'hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur spécialisé. Il vous aidera volontiers.

Remarque importante

Pour assurer votre sécurité et prolonger la durée de vie de votre produit, prenez-en grand soin et faites-le contrôler ou entretenir régulièrement.

Ce manuel est le reflet des derniers développements du produit. Vermeiren a le droit d'apporter des modifications à ce type de produit sans être tenu d'adapter ou de remplacer des produits similaires fournis précédemment.

Des images du produit sont utilisées pour clarifier les instructions. Les détails du produit illustré peuvent diverger de votre produit.

Informations disponibles

Sur notre site Internet <http://www.vermeiren.com/>, vous trouverez toujours la version la plus récente des informations suivantes. Veuillez consulter régulièrement ce site Internet pour d'éventuelles mises à jour.

Les personnes malvoyantes peuvent télécharger la version électronique de ce manuel et la lire au moyen d'une application de texte-parole.

	Manuel d'utilisation Pour l'utilisateur et le revendeur spécialisé
	Manuel entretien des déambulateurs Pour le revendeur spécialisé
	Déclaration de conformité CE

1. Votre produit



1. Poignées de poussée
2. Levier de frein
3. Appui ante-brachial
4. Dossier
5. Sac de rangement
6. Siège
7. Roues avant
8. Roues arrière
9. Câble de frein
10. Levier basculeur
11. Réflecteurs
12. Plaque d'identification

2. Avant l'utilisation

2.1. Usage prévu et indications

- Ce produit est un dispositif médical.
- Indications et contre-indications : Le déambulateur est conçu pour soutenir la fonction de la jambe pendant la marche et les activités quotidiennes. Avec les supports sous-bras, le déambulateur est spécifiquement adapté aux utilisateurs souffrant de déficiences motrices impliquant une réduction des mouvements et de l'équilibre, mais avec une capacité de marche et une coordination suffisamment préservées, lorsque l'utilisation du déambulateur standard n'est pas possible en raison d'une fonction réduite de la main et que l'utilisation d'autres aides à la marche n'est pas suffisante. N'utilisez pas votre déambulateur si vous souffrez d'autres défaillances physiques pouvant rendre l'utilisation du déambulateur dangereuse, comme une faiblesse du bras, des troubles de l'équilibre, déficience visuelle, perte de membres, etc.
- Le déambulateur est exclusivement conçu et produit pour servir d'aide à la marche, pour une seule personne d'un poids maximal de 200 kg.
- En prenant appui avec ses membres supérieurs ou son buste sur le déambulateur ou en le déplaçant, ce dernier compense la capacité de charge ou la force réduite des membres inférieurs. En outre, il assure une stabilité, un soutien et une sécurité accrus lors de la marche.
- Le déambulateur peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Il n'est pas conçu pour transporter des marchandises et/ou plus de personnes que l'utilisateur. Il n'est pas non plus conçu pour être utilisé comme aide au transport en position assise.
- Il ne peut être utilisé que sur une surface plane avec les quatre roues touchant le sol. N'utilisez pas le déambulateur sur un terrain rocailleux, accidenté ou sablonneux, ou sur des sols en forte pente. Cela peut nuire à la stabilité du déambulateur. Pendant la marche, déplacez-vous toujours sur des surfaces planes et stables ou sur les bords biseautés du trottoir.
- La garantie sur ce produit est basée sur une utilisation et un entretien normaux, tels que décrits dans le présent manuel. Les dommages à votre produit dus à un usage inapproprié ou à un manque d'entretien auront pour effet d'annuler la garantie.
- Consultez également les détails techniques et les limites de votre déambulateur au §6..

2.2. Consignes de sécurité et risques applicables

ATTENTION

Risque de blessures

- Veuillez lire et suivre les instructions stipulées dans le présent manuel d'utilisation. Autrement, vous pourriez vous blesser ou votre produit pourrait être endommagé.

Tenez compte des avertissements généraux suivants pendant l'emploi:

- Faites bien attention à ce qu'aucune pierre ni aucun autre objet ne bloque les roues du déambulateur.
- Assurez-vous que les deux freins de stationnement soient bien enclenchés avant d'utiliser votre déambulateur pour vous aider à vous lever. Une fois que vous êtes dans une position stable et confortable, vous pouvez relâcher les freins de stationnement.
- Maintenez les deux mains sur les poignées lorsque vous avancez.
- N'oubliez pas que certaines parties de votre déambulateur peuvent devenir très chaudes ou très froides en fonction de la température ambiante, des rayons du soleil, des dispositifs de chauffage, etc. Faites donc attention lorsque vous les touchez.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si le réglage de la hauteur est bien fixé, voir le **§3.4.**
- Ne tenez pas les poignées avec des mains mouillées. Si vous le faites, vous risquez de perdre votre équilibre.
- Ne vous mêlez pas à la circulation sur la chaussée avec votre déambulateur. Restez toujours sur le trottoir.
- Veuillez suivre les instructions pour le nettoyage et les contrôles. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise inspection ou d'un mauvais entretien.

Tout incident grave [RDM (UE) 2017/745 §2 (65)] survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.

Sachez que votre déambulateur peut interférer avec certains types de systèmes antivol, selon les paramètres utilisés. Cela peut provoquer le déclenchement de l'alarme du magasin.

2.3. Symboles sur le déambulateur

- i** La plaque d'identification se situe en dessous de la poignée gauche, sur la partie intérieure du châssis de base.

	Poids maximum de l'utilisateur en kg
	Indication du type
	Numéro de catalogue
	Numéro de série
	Dispositif médical
	Fabricant
	Date de fabrication
	Déclaration de conformité
	Attention : informations importantes
	Il est conseillé de lire le manuel

2.4. Lors de la livraison

Déballer votre produit et vérifiez si la livraison est complète. Les pièces suivantes sont incluses dans la livraison:

- Châssis de base avec siège, sections avant et arrière ;
- Roues avant avec support ;
- Roues arrière avec support et raccord de câble de frein ;
- Poignées avec freins
- Dossier
- Sac de rangement
- Manuel

Inspectez soigneusement l'expédition afin de vous assurer que le transport n'a occasionné aucun dommage. S'il s'avère que votre produit présente un défaut, prenez contact avec le transporteur.

2.5. Transport et entreposage

L'expédition et le stockage du déambulateur doivent être réalisés conformément aux caractéristiques techniques §6.. Assurez-vous que le déambulateur est entreposé correctement.

Protégez le déambulateur contre la rouille et la pénétration de substances étrangères (p. ex. eau salée, air marin, sel, poussière) au moyen d'une protection ou d'un emballage adéquat.

Lors de l'entreposage, assurez-vous qu'aucun autre objet n'est appuyé sur ou contre le déambulateur afin d'éviter tout dommage.

3. Montage/Démontage et réglages

ATTENTION

Risque de blessures

- Montez complètement le déambulateur avant de régler sa hauteur.

3.1. Montage

3.1.1. Montage des roues avant et arrière

⚠ ATTENTION

Risque de chute ou de basculement

- Réglez toujours les quatre roues à la même hauteur.
- Lors du montage des roues avant, veillez à ce qu'elles soient installées du bon côté. Les axes des roues doivent être verticaux, voir l'illustration.

i Lorsque vous montez les roues arrière, vérifiez si le raccord de câble de frein **(4)** est positionné à l'intérieur du déambulateur.

1. Placez le déambulateur sur le devant/l'arrière.
2. Appuyez sur le bouton à ressort **(1)** sur le support de roue, et maintenez-le enfoncé.
3. Faites glisser le support de roue **(2)** dans le tube de châssis **(3)** jusqu'à ce que le bouton à ressort ressorte du trou de réglage souhaité.
4. Répétez pour les autres roues. Assurez-vous que les quatre roues sont bien fixées.



3.1.2. Montage des poignées

1. Placez le déambulateur sur les quatre roues. Assurez-vous qu'il est stable.
2. Appuyez sur le bouton à ressort **(5)** sur la poignée, et maintenez-le enfoncé.
3. Faites glisser la poignée dans le tube de châssis **(6)** jusqu'à ce que le bouton à ressort ressorte du trou de réglage souhaité.

4. Répétez pour la deuxième poignée. Assurez-vous que les deux poignées sont bien fixées et qu'elles sont réglées à la même hauteur.
5. Insérez le bouton en étoile (7) dans le trou supérieur de chaque côté pour plus de rigidité.



Serre-câbles

Pour éviter que le câble ne se coince entre les éléments mobiles du déambulateur, fixez le câble de frein sur le châssis à l'aide d'un serre-câble (8).




3.1.3. Montage du sac de rangement

⚠ ATTENTION

Risque de chute ou de basculement

- Ne remplissez pas trop le sac de rangement.

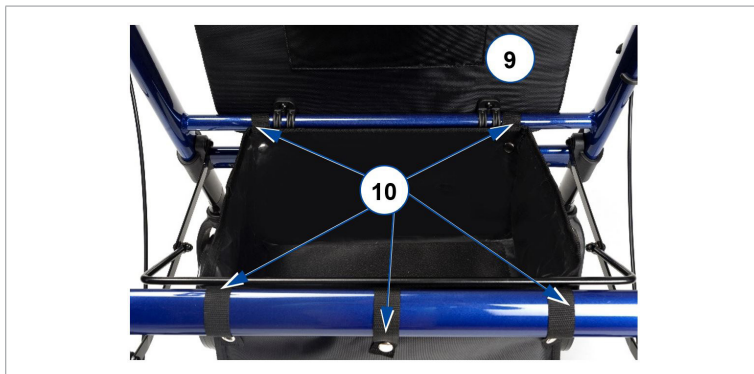

La capacité de charge maximale du sac de rangement est mentionnée dans le tableau du §6..

Le sac de rangement doit être installé en dessous du siège, sur les deux tubes horizontaux sur lesquels le siège repose.

1. Ouvrez le siège (9).
2. Installez le sac de rangement sur les tubes du châssis avec les cinq boutons-pression (10).
3. Repliez à nouveau le siège.

3.1.4. Installation/Retrait du dossier

Retrait

1. Positionnez le système de verrouillage des deux côtés du dossier sur « open » (ouvert) [A] en tournant le levier (11).
2. Faites glisser le dossier vers le haut et retirez-le.



Montage

1. Assurez-vous que systèmes de verrouillage des deux côtés du dossier sont positionnés sur « open » (ouvert) [A].
2. Faites glisser les côtés du dossier sur le support (12), le plus bas possible.
3. Positionnez le système de verrouillage des deux côtés du dossier sur « lock » (verrouillé) [B] en tournant le levier (11). Assurez-vous que le dossier est bien fixé avant de s'asseoir !



3.1.5. Position de la poignée


⚠ ATTENTION

Risque de chute

- Ne pas dépasser la portée maximale indiquée sur le support de la poignée.

La position des poignées peut être réglée en continu pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Pour faciliter le réglage, 5 positions ont été marquées sur le support de la poignée (13).

1. Desserrez le levier (14) situé sous le support de poignées.
2. Faites glisser la poignée en avant/en arrière jusqu'à la position souhaitée.
3. Resserrez le levier.
4. Répétez l'opération pour l'autre poignée et assurez-vous que les crochets sont bien fixés.

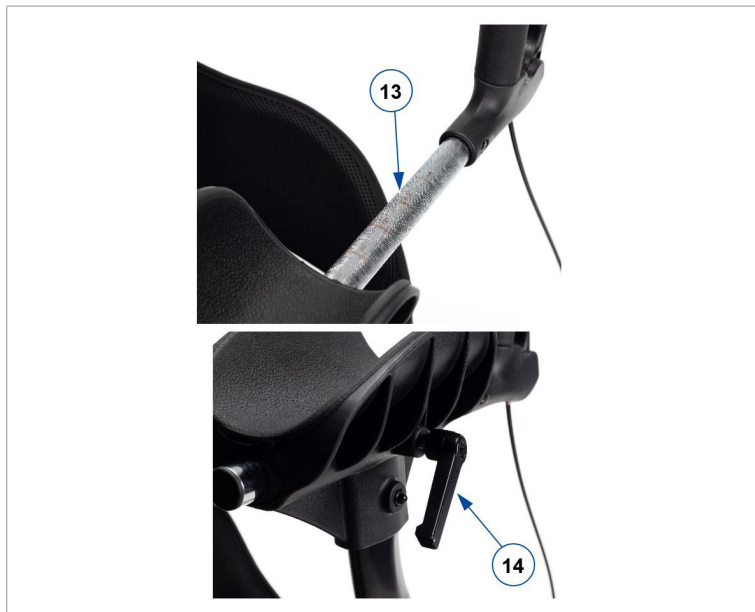

3.2. Démontage

⚠ ATTENTION

Risque de dommages

- Faites attention à la position des câbles de frein. Ne tirez pas les poignées trop haut pour éviter d'endommager le câble de frein.

Le démontage du déambulateur est réalisé dans l'ordre inverse du montage décrit dans la section précédente :

- Sac de rangement : Détachez les boutons-pression (10) et retirez le sac.
- Serre-câble (8) (2x) : Tirez avec précaution du tube de châssis.
- Poignée avec levier de frein (2x) : appuyez sur le bouton à ressort (5) et maintenez-le enfoncé, puis retirez la poignée du châssis.
- Roues avant et arrière (4x) : Appuyez sur le bouton à ressort (1) et maintenez-le enfoncé, puis retirez la roue du châssis.

3.3. Montage du support de canne de marche (en option)

1. Cliquez la coupelle (15) sur le support fourni sur le cadre arrière inférieur.
2. Retirez la vis (16) du cadre supérieur et placez la vis livrée avec le support de canne à sa place.
3. Placez la vis livrée avec l'écrou de l'autre côté de la vis et serrez fermement.



3.4. Réglages de hauteur

- i** Pour régler la hauteur du déambulateur en fonction de la taille de l'utilisateur :
- Réglez d'abord la hauteur du siège.
 - Ajustez ensuite la hauteur des deux poignées.

⚠ ATTENTION

Risque de chute ou de basculement

- Réglez toujours les quatre roues à la même hauteur.

La hauteur du déambulateur peut être modifiée en réglant les poignées (6 positions, par paliers de 25 mm)

La hauteur du siège peut être modifiée en réglant les roues avant (5 positions, par paliers de 25 mm).

Pour les régler :

1. Appuyez sur le bouton à ressort et maintenez-le enfoncé.
2. Faites glisser la roue ou la poignée vers le haut/bas dans le tube de châssis à la hauteur désirée, jusqu'à ce que le bouton à ressort ressorte du trou de réglage correspondant.
3. Assurez-vous que le bouton à ressort est bien fixé.
4. Insérez le bouton étoile dans le trou supérieur pour sécuriser davantage la poignée.

Assurez-vous que

- les deux poignées ont été réglées à la même hauteur.
- les 4 roues ont été réglées à la même hauteur.

4. Utiliser votre déambulateur

4.1. Système de freinage

ATTENTION

Risque de chute

- Pour garantir votre sécurité, vous devez contrôler le fonctionnement des freins. L'état du système de freinage est influencé par l'usure et la présence d'huile ainsi que de toute autre matière polluante sur les roues arrière et le mécanisme de freinage.

Le déambulateur est équipé de freins, actionnés par deux leviers de frein **(15)**. Les leviers de frein peuvent être utilisés de deux manières : freins standard et freins de stationnement.


ATTENTION

Risque de dommages

- N'appuyez pas trop fort sur le déambulateur lorsque vous utilisez les freins standard. Cela pourrait endommager les pneus ou les freins.

Pour utiliser les freins standard, tirez les deux leviers de frein **(15)** en même temps vers le haut [A] en appliquant une pression. Pour interrompre le freinage, relâchez les leviers de frein.

Pour utiliser le frein de stationnement, poussez les deux leviers de frein **(15)** à l'écart de la poignée jusqu'à atteindre la position verrouillée [B]. Utilisez toujours les deux freins de stationnement simultanément. Pour sortir de l'état de stationnement, tirez les deux leviers de frein en même temps vers le haut.

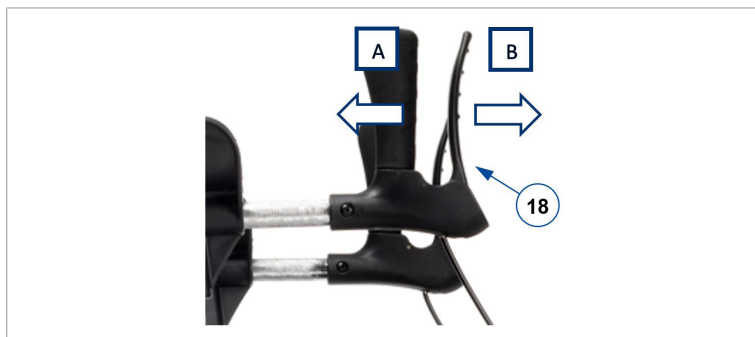

4.2. Pliage/Dépliage

⚠ ATTENTION

Risque de coincement

- Gardez les doigts, les boucles, les bijoux et les vêtements à l'écart du mécanisme de pliage.

⚠ ATTENTION

Risque de chute

- Vérifiez que le déambulateur soit entièrement ouvert et que le châssis soit bien bloqué.



4.2.1. Déplier le déambulateur

1. Abaissez les deux leviers de frein en position de stationnement, voir le §4.1..
2. Placez le déambulateur les quatre roues au sol tout en tenant les tubes du châssis.
3. Séparez les tubes du châssis avant (18) et arrière (19), et poussez les barres du mécanisme de pliage (20) le plus bas possible. Évitez de vous coincer les doigts dans le mécanisme !
4. Tournez le siège vers le bas.
5. Montez le dossier, voir §3.1.4..

4.2.2. Plier le déambulateur


1. Tenez-vous derrière le déambulateur.
2. Abaissez les deux leviers de frein en position de stationnement, voir le §4.1..
3. Relevez le siège.
4. Videz le sac de rangement.
5. Tirez le châssis du siège (20) vers le haut pour fermer légèrement le châssis.
6. Fermez complètement le châssis en appuyant en même temps sur le tube avant et le tube arrière.
7. Retirez le dossier, voir §3.1.4..

4.3. Franchir des bordures

ATTENTION

Risque de chute

- Montez sur la bordure en restant bien droit, avec les deux roues alignées par rapport à la bordure. Gardez le déambulateur proche de vous.

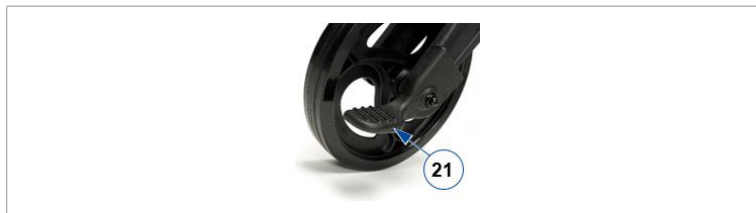

Pour faciliter le franchissement de petits obstacles, tels que les bordures de trottoir, le déambulateur est équipé d'un levier basculeur sur les deux roues arrière.

1. Assurez-vous d'être dans une position bien stable lorsque vous tenez les deux poignées.
2. Avec votre pied, appuyez sur le levier basculeur **(21)** pour soulever les roues avant.
3. Maintenez le déambulateur dans cette position au moyen des poignées, et déplacez-le ensuite lentement jusqu'à ce que les roues avant se trouvent sur la bordure.
4. À présent, soulevez les poignées et avancez pour placer les roues arrière sur la bordure.
5. Une fois que le déambulateur est bien stable, vous pouvez monter vous-même sur la bordure.

4.4. S'asseoir, se lever et marcher

ATTENTION

Risque de chute

- Assurez-vous que les deux leviers de frein se trouvent en position de stationnement avant de vous asseoir, voir §4.1.. Maintenez les leviers de frein dans cette position jusqu'à ce que vous recommenciez à vous déplacer. Gardez vos pieds entre les roues arrière.
- Ne pas déplacer le déambulateur en position assise.

1. Abaissez les deux leviers de frein en position de stationnement.
2. Vérifiez que le dossier et le siège soient abaissés et fixez-les.
3. En vous appuyant sur les poignées, retournez-vous et asseyez-vous sur le siège.
4. Pour vous redresser, appuyez-vous sur les poignées et retournez-vous.
5. Remontez les deux leviers de frein et utilisez les freins de stationnement.
6. Relâchez les leviers de frein et avancez en gardant le déambulateur proche de votre corps.

5. Entretien

- i** Un entretien régulier vous permet de conserver votre déambulateur dans un parfait état de fonctionnement. Pour le manuel d'entretien, consultez le site Web de Vermeiren : www.vermeiren.com.

5.1. Nettoyage

Nettoyez le déambulateur à l'aide d'un chiffon doux et humide, de l'eau tiède et du savon doux pour la maison. Évitez que les pièces ne soient trempées. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

5.2. Désinfection

⚠ ATTENTION

Risque de dommages

- La désinfection ne peut être réalisée que par des personnes qualifiées. Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé à cet égard.

Nettoyez le déambulateur à l'aide d'un chiffon doux et humide, de l'eau tiède et d'un désinfectant doux pour la maison.

5.3. Inspection / Entretien / Réparation

La durée de vie prévue de votre déambulateur est de 5 ans. La durée de vie est influencée par son utilisation, son entreposage, son entretien, son service et son nettoyage.

Avant que vous ne commenciez à utiliser votre déambulateur, vous devez contrôler les points suivants :

- Présence de toutes les pièces.
- Mécanisme de pliage : fonctionne bien.
- Boulons et écrous : solidement attachés.
- Freins : fonctionnent bien.
- Roues (stabilité, empreinte, vis de fixation).
- Si vos roues entrent régulièrement en contact avec des fils, des cheveux ou d'autres fibres, elles risquent de se bloquer. Vérifiez donc régulièrement si vos roues sont capables de tourner librement et si elles se trouvent dans un bon état.
- Châssis (déformations, stabilité, connexions).
- Poignées (verrouillage sécurisé du réglage de la hauteur, bon soutien des poignées).
- Siège, dossier et sac de rangement (usure ou dommages).

Votre déambulateur est fabriqué en aluminium et en plastique. Nous vous recommandons de faire inspecter votre produit au moins une fois par an, mais la fréquence d'entretien dépend de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation. Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé pour parvenir à un accord concernant la fréquence d'entretien.

Les réparations et les remplacements ne peuvent être réalisés que par des personnes formées, et seules des pièces de rechange d'origine de Vermeiren peuvent être utilisées.

N'hésitez pas à recourir au service qui vous est proposé par votre commerçant spécialisé. Ce dernier ne manquera pas de vous venir en aide pour tout ce qui a trait au service et aux réparations.

5.4. Réutilisation

Avant chaque réutilisation, faites désinfecter, inspecter et entretenir le déambulateur conformément aux instructions de §5.2. et §5.3..

5.5. Évacuation

À la fin de sa durée de vie, votre déambulateur doit être mis au rebut conformément à la législation environnementale locale. Il est recommandé de démonter le déambulateur afin de faciliter le transport des matériaux recyclables.

6. Spécifications techniques

Les détails techniques ci-dessous concernent uniquement ce déambulateur, avec des réglages standard et dans des conditions ambiantes optimales. Veuillez tenir compte de ces détails pendant l'utilisation.

Marque	Vermeiren
Groupe de produit	Déambulateur
Type	Goliat Artro
Description	Dimensions
Poids maximum de l'utilisateur	200 kg
Capacité de charge maximale du sac de rangement	5 kg
Longueur hors tout	750 mm
Longueur plié	400 mm
Largeur hors tout	730 mm
Largeur pliée	730 mm
Hauteur générale	1140 - 1310 mm
Hauteur plié	1080 - 1280 mm
Hauteur des poignées	1140 - 1310 mm
Hauteur du corps recommandée	1650 - 2000 mm
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Tolérance de mesures +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.	

Marque	Vermeiren
Groupe de produit	Déambulateur
Type	Goliat Artro
Description	Dimensions
Distance entre les poignées	580 mm
Hauteur de siège	490 - 560 mm
Largeur du siège	470 mm
Profondeur du siège	410 mm
Masse totale	12,35 kg
- sans panier	12 kg
Diamètre des roues	200 x 30 mm
Freins	Freins standard et freins de stationnement
Rayon de braquage	1050 mm
Température de stockage et d'utilisation	+5°C - +41°C
Humidité de stockage et d'utilisation	30% - 70%
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Tolérance de mesures +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.	

Inhoudsopgave

Voorwoord	48
1. Uw product	50
2. Voor gebruik	51
2.1. Beoogd gebruik en indicaties	51
2.2. Veiligheidsinstructies en relevante risico's	52
2.3. Symbolen op de rollator	53
2.4. Bij levering	54
2.5. Transport en opslag	54
3. Montage/Demontage en aanpassingen	55
3.1. Montage	55
3.2. Demontage	60
3.3. De stokhouder monteren (optioneel)	60
3.4. Hoogte aanpassingen	61
4. Uw rollator gebruiken	62
4.1. Remsysteem	62
4.2. Opvouwen/Ontvouwen	63
4.3. Stoepranden nemen	65
4.4. Gaan zitten, opstaan, wandelen	65
5. Onderhoud	66
5.1. Schoonmaak	66
5.2. Ontsmetting	66
5.3. Inspectie / Onderhoud / Reparatie	67
5.4. Hergebruik	68
5.5. Beëindiging van gebruik	68
6. Technische specificaties	68

Voorwoord

Proficiat! U bent nu eigenaar van een Vermeiren rollator!

Bedankt voor uw vertrouwen in de producten van Vermeiren. Om u te ondersteunen bij het gebruik van deze rollator en zijn bedieningsmogelijkheden, bieden we u deze handleiding aan. Lees deze informatie zorgvuldig door: het zal u helpen om vertrouwd te raken met de bediening, mogelijkheden en beperkingen van uw rollator.

Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vakhandelaar. Hij/Zij zal u met plezier verder helpen.

Belangrijke opmerking

Om uw veiligheid te garanderen, en om de levensduur van uw product te verlengen, raden we u aan om er goed zorg voor te dragen en om regelmatig nazicht en onderhoud te laten uitvoeren.

Deze handleiding houdt rekening met de recentste productontwikkelingen. De Firma Vermeiren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan dit type product door te voeren zonder verplicht te zijn om voordien geleverde producten aan te passen of te vervangen.

De productafbeeldingen in deze handleiding dienen om de instructies te verduidelijken. De productdetails in de afbeeldingen kunnen afwijken ten opzichte van uw product.

Beschikbare informatie

Op onze website <http://www.vermeiren.com/> kunt u altijd terecht voor de meest recente versie van onderstaande informatie. Raadpleeg deze website a.u.b. regelmatig voor eventuele bijgewerkte versies.

Mensen met een visuele beperking kunnen de elektronische versie van deze handleiding downloaden en laten voorlezen door een tekst-naar-spraak programma.

	Gebruiksaanwijzing Voor gebruiker en vakhandelaar
	Servicehandleiding voor rollators Voor de vakhandelaar
	EC-conformiteitsverklaring

1. Uw product



1. Handgrepen
2. Remhendel
3. Onderarmsteun
4. Rug
5. Opbergtas
6. Zit
7. Voorwielen
8. Achterwielen
9. Remkabel
10. Tiphulp
11. Reflectoren
12. Identificatieplaat

2. Voor gebruik

2.1. Beoogd gebruik en indicaties

- Dit product is een medisch hulpmiddel.
- Indicaties en contra-indicaties: De rollator is bedoeld ter ondersteuning van de beenfunctie tijdens het lopen en bij dagelijkse activiteiten. Door de onderarmsteunen is de rollator specifiek geschikt voor gebruikers met mobiliteitsbeperkingen die gepaard gaan met verminderde beweging/balans, maar met voldoende resterend loopvermogen en coördinatie, wanneer het gebruik van een standaard rollator niet meer mogelijk is door verminderde functie van de handen en het gebruik van andere loophulpmiddelen onvoldoende is. Gebruik uw rollator niet indien u andere fysieke beperkingen heeft waardoor het gebruik van de rollator onveilig wordt, zoals een zwakke arm, evenwichtsstoornis, verminderd zicht, verlies van ledematen, ...
- De rollator is uitsluitend ontworpen en geproduceerd om als loophulp, voor één persoon met een maximaal gewicht van 200 kg, te dienen.
- Door met de bovenste ledematen of de romp op de rollator te steunen of deze te verschuiven, compenseert de rollator de verminderde belastbaarheid of de kracht van de onderste ledematen. Bovendien zorgt deze voor een betere steun en veiligheid bij het gaan.
- De rollator kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
- Hij is niet bedoeld voor het vervoer van goederen en/of meer personen dan de gebruiker. Hij is eveneens niet bedoeld om zittend gebruikt te worden als transportmiddel.
- Hij mag alleen worden gebruikt op een vlakke ondergrond waarbij alle vier de wielen de grond raken. Gebruik de rollator niet op rotsachtig, hobbelig of zanderig terrein of op plaatsen met een steile helling. Dan kan de rollator instabiel worden. Ga tijdens het lopen altijd via vlakke, stabiele ondergronden en afgeschuinde stoepranden.
- De garantie op dit product is gebaseerd op normaal gebruik en onderhoud zoals beschreven in deze handleiding. De garantie vervalt bij schade die werd veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud.
- Raadpleeg ook de technische details en begrenzings van uw rollator in §6..

2.2. Veiligheidsinstructies en relevante risico's

VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel

- Lees de instructies in deze handleiding en volg ze nauwkeurig op. Zo niet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging aan uw product.

Houd rekening met de volgende algemene waarschuwingen tijdens het gebruik:

- Let erop dat er geen stenen of ander objecten de rollator wielen blokkeren.
- Zorg ervoor dat beide parkeerremmen aan staan, voordat u de rollator gebruikt als hulp om recht te staan. Zodra u comfortabel en stabiel staat, kunt u de parkeerremmen vrijzetten.
- Hou beide handen op de handgrepen tijdens het stappen.
- Houd er rekening mee dat sommige onderdelen van uw rollator zeer warm of koud kunnen worden door omgevingstemperatuur, de zon of verwarmingstoestellen. Wees daarom voorzichtig bij het aanraken.
- Verifieer voor elk gebruik of de hoogte-verstellingen goed vast staan, zie **§3.4.**
- Houd de handgrepen niet met natte handen vast. Als u dit wel doet, kunt u uw evenwicht verliezen.
- Begeef u met uw rollator niet op de rijweg. Blijf op het voetpad.
- Volg de instructies voor reiniging en controles. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door foutief onderhoud.

Ieder ernstig incident [MDR (EU) 2017/745 §2 (65)] dat zich heeft voorgedaan met trekking tot het product dient gerapporteerd te worden aan de producent en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Houd er rekening mee dat uw rollator, afhankelijk van de gebruikte instelling, bij sommige diefstalsystemen interferentie kan geven. Hierdoor kan het winkelalarm in werking gesteld worden.

2.3. Symbolen op de rollator

- i** De identificatieplaat bevindt zich onder de linker handgreep, aan de binnenkant van het basisframe

	Maximum gewicht van de gebruiker in kg
	Type aanduiding
	Catalogusnummer
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Producent
	Fabricagedatum
	EC-conformiteitsverklaring
	Let op: belangrijke informatie
	Het is aangeraden om de handleiding te lezen

2.4. Bij levering

Pak uw product uit en verifieer of de levering compleet is. Volgende onderdelen zijn bij de levering ingesloten:

- Basisframe met zit, voor- en achtersectie;
- Voorwielen met bevestiging;
- Achterwielen met bevestiging en remkabelverbinding;
- Handgrepen met remmen
- Rug
- Opbergzak
- Gebruiksaanwijzing

Controleer de zending zorgvuldig op transportschade. Wanneer blijkt dat uw product een defect vertoont, neem dan contact op met de transporteur.

2.5. Transport en opslag

Transport en opslag van de rollator moet gebeuren volgens de technische specificaties in §6.. Bewaar de rollator droog.

Bescherm de rollator tegen roest en het binnendringen van vreemde stoffen (bijv. zout water, zeelucht, zand, stof) middels een degelijke afscherming of verpakking).

Zorg er bij het opbergen voor dat er geen andere voorwerpen op of tegen de rollator liggen waardoor de rollator beschadigd kan worden.

3. Montage/Demontage en aanpassingen

VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel

- Monteer uw rollator volledig voordat u zijn hoogte instelt.

3.1. Montage

3.1.1. De voor- en achterwielen monteren

VOORZICHTIG

Risico op vallen, kantelen

- Stel de vier wielen steeds op dezelfde hoogte in.
 - Let er bij het monteren van de voorwielen op dat ze geïnstalleerd worden aan de correcte kant. De wielassen moeten verticaal staan, zie afbeelding.
-  Zorg ervoor dat de remkabelverbinding **(4)** op het achterwiel zich aan de binnenkant van de rollator bevindt bij het monteren van de wielen.
1. Plaats de rollator op de voor-/achterkant.
 2. Houd de veerknop **(1)** op de wielbevestiging ingedrukt.
 3. Schuif de wielbevestiging **(2)** in de framebuis **(3)** totdat de veerknop uit het gewenste gat van de hoogteverstelling springt.
 4. Herhaal voor alle wielen. Zorg ervoor dat alle wielen goed bevestigd zijn.



3.1.2. De handgrepen monteren

1. Plaats de rollator op 4 wielen. Zorg ervoor dat hij stabiel staat.
2. Houd de veerknop (5) op de handgreep ingedrukt.
3. Schuif de handgreep in de framebuis (6) totdat de veerknop uit het gewenste gat van de hoogteverstelling springt.
4. Herhaal voor de tweede handgreep. Zorg ervoor dat beide handgrepen op dezelfde hoogte werden ingesteld, en dat ze stevig werden vastgezet.
5. Steek de sterknop (7) in het bovenste gat aan elke kant voor extra stijfheid.



Kabelklemmen

Om te voorkomen dat de remkabel geklemd komt te zitten tussen bewegende onderdelen van de rollator, bevestigt u de kabel aan het frame met de kabelklem (8).




3.1.3. De opbergzak monteren

⚠ VOORZICHTIG

Risico op vallen, kantelen

- Laad uw opbergzak niet te zwaar.

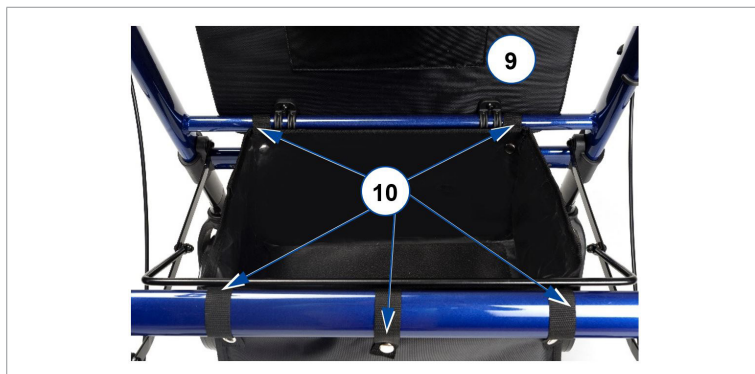

Het maximale laadvermogen van de opbergzak is opgenomen in §6..

De opbergzak is bedoeld om onder de zit te monteren; op de twee horizontale buizen waar de zit op rust.

1. Vouw de zit (9) open.
2. Bevestig de opbergzak aan de framebuizen met de vijf drukknopen (10).
3. Klap de zit weer naar beneden.

3.1.4. De rugsteun plaatsen/verwijderen

Verwijderen

1. Draai de vergrendeling aan beide zijden van de rugsteun naar "open" positie [A] door hendel (11) te draaien.
2. Schuif de rugsteun omhoog en verwijder.



Plaatsen

1. Zorg ervoor dat de vergrendelingen aan beide zijden van de rugsteun op "open" [A] positie staan.
2. Schuif beide zijden van de rugsteun over de bevestigingen (12), zo ver mogelijk naar beneden.
3. Zet beide vergrendelingen op "lock" positie [B] door hendel (11) te verdraaien. Zorg ervoor dat de rugsteun stevig vaststaat vooraleer te gaan zitten!



3.1.5. Handgripepositie


⚠ VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Overschrijd niet het maximale bereik zoals aangegeven op de handgreepsteun.

De positie van de handgrepen kan traploos worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker. Om de afstelling te vergemakkelijken, zijn er 5 posities gemarkeerd op de handgreepsteun **(13)**.

1. Draai de hendel **(14)** onder de okselsteun los.
2. Schuif de handgreep naar voren/achteren tot de gewenste positie.
3. Draai de hendel vast.
4. Herhaal dit voor de andere handgreep en zorg ervoor dat de hangrips goed vastzitten.

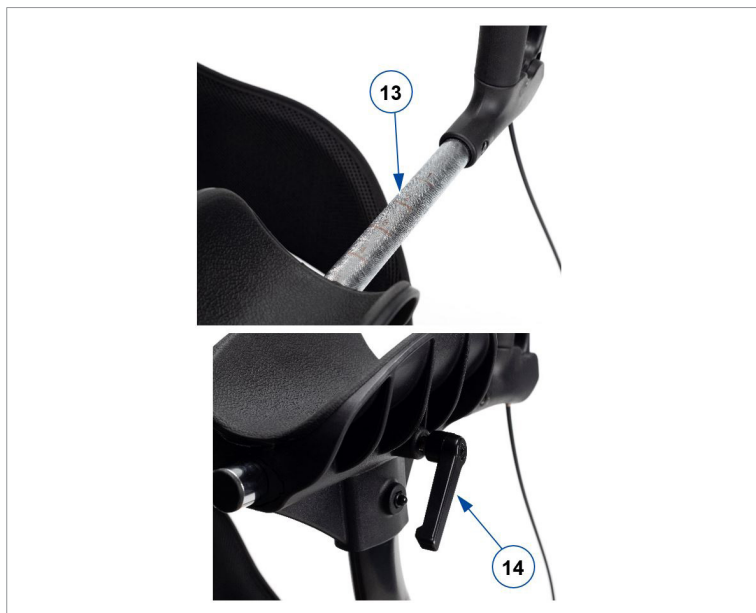

3.2. Demontage

VOORZICHTIG

Gevaar voor beschadiging

- Let op de positie van de remkabels en trek deze niet te hoog zodat de remkabel niet beschadigd raakt. .

Het demonteren van de rollator gebeurt in omgekeerde volgorde van de montage beschreven in vorige sectie:

1. Opbergzak: Open de drukknopen **(10)** en verwijder de zak.
2. Kabelklem **(8)** (2x): Trek voorzichtig van de framebuis.
3. Handgreep met remhendel (2x): Houd de veerknop **(5)** ingedrukt en trek de handgreep uit het frame.
4. Voor- en achterwielen (4x): Houd de veerknop **(1)** ingedrukt en trek het wiel uit het frame.

3.3. De stokhouder monteren (optioneel)

1. Klik de houder **(15)** op de daarvoor voorziene bevestiging op het achterste onderframe.
2. Verwijder de schroef **(16)** uit het boven-frame en steek de schroef die geleverd wordt bij de stokhouder in de plaats.
3. Plaats de klem met moer op de andere kant van de schroef en draai vast aan.



3.4. Hoogte aanpassingen

- i** Om de hoogte van de rollator aan te passen aan de lichaamsgrootte:
- En pas de zadelhoogte aan
 - Pas vervolgens de hoogte van beide handgrepen aan.

⚠ VOORZICHTIG

Risico op vallen, kantelen

- Stel de vier wielen steeds op dezelfde hoogte in.

De rollator is in hoogte aanpasbaar door de handgrepen te verstellen (6 posities, in stappen van 25 mm)

De zit is in hoogte aanpasbaar door de voor- en achterwielen te verstellen (5 posities, in stappen van 25 mm).

Om een van deze te verstellen:

1. Houd de veerknop ingedrukt.
2. Schuif het wiel of de handgreep omhoog/omlaag in de framebuis tot de gewenste hoogte, totdat de veerknop uit het overeenkomstige gat van de hoogteverstelling springt.
3. Zorg ervoor dat de veerknop goed vaststaat.
4. Steek de sterknop in het bovenste gat om de handgreep extra vast te zetten.

Zorg ervoor dat

- beide handgrepen op dezelfde hoogte zijn ingesteld.
- de 4 wielen op dezelfde hoogte zijn ingesteld.

4. Uw rollator gebruiken

4.1. Remsysteem

VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Om uw veiligheid te garanderen dient u de werking van de remmen te controleren. De staat van het remsysteem wordt beïnvloed door slijtage, de aanwezigheid van olie en andere vervuilende stoffen op de achterwielen en het remmechanisme.

De rollator is voorzien van remmen, die door twee remhendels **(15)** bediend kunnen worden. De remhendels kunnen op twee manieren gebruikt worden: als standaard rem of als parkeerrem.


VOORZICHTIG

Gevaar voor beschadiging

- Duw de rollator niet te hard wanneer u de standaard rem gebruikt. Dit kan de remmen en wielen beschadigen.

Om de standaard rem te gebruiken trekt u beide remhendels **(15)** gelijktijdig omhoog [A], in een knijpbeweging. Om het remmen te stoppen laat u de remhendels los.

Om de parkeerrem te gebruiken, drukt u beide remhendels **(15)** naar beneden tot in vergrendelstand [B]. Gebruik altijd de beide parkeerremmen gelijktijdig. Om de parkeerstand te verlaten, trek beide remhendels tegelijk omhoog.

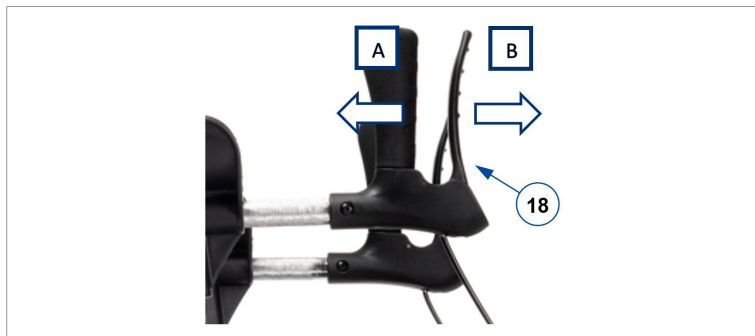

4.2. Opvouwen/Ontvouwen

⚠ VOORZICHTIG

Risico voor knellen

- Houd vingers, gespen, sieraden en kleding uit de buurt van het vouwsysteem.

⚠ VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Verifieer dat de rollator volledig open staat en het frame geblokkeerd is.



4.2.1. De rollator uitvouwen

1. Duw beide remhendels omlaag in parkeerstand, zie §4.1..
2. Plaats de rollator met 4 wielen op de grond en houd de framebuizen vast.
3. Trek de voorste (18) en achterste (19) framebuizen uit elkaar en duw de stangen van het vouwmechanisme (20) zo ver mogelijk naar beneden. Vermijd dat uw vingers gekneld komen te zitten tussen het mechanisme!
4. Klap de zit naar beneden.
5. Plaats de rugsteun, zie §3.1.4..

4.2.2. De rollator opvouwen


1. Ga achter de rollator staan.
2. Duw beide remhendels omlaag in parkeerstand, zie §4.1..
3. Klap de zit omhoog.
4. Maak de opbergzak leeg.
5. Trek de steunbeugel (20) omhoog om het frame gedeeltelijk te sluiten.
6. Sluit het frame volledig door de voorste (16) en achterste (17) buizen samen te drukken.
7. Verwijder de rugsteun, zie §3.1.4..

4.3. Stoepranden nemen

VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Neem stoepranden recht, met beide voorwielen gericht op de stoeprand. Houd de rollator dicht bij u.

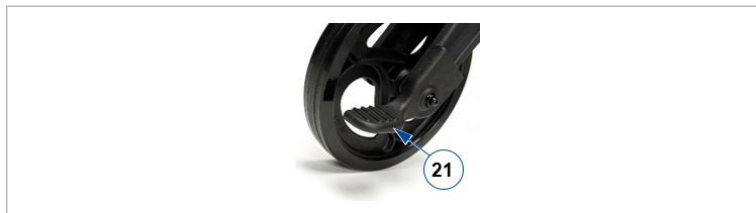

Om het nemen van kleine obstakels, zoals stoepranden, te vergemakkelijken, is uw rollator voorzien van een tiphulp op de twee achterwielen.

1. Zorg ervoor dat u stabiel staat met beide handen op de handgrepen.
2. Gebruik één voet en duw op de tiphulp **(21)** om de voorwielen van de grond te tillen.
3. Houd de rollator met de handgrepen in deze positie en beweeg traag naar voor tot de voorwielen op de stoeprand staan.
4. Til nu de handgrepen op en beweeg naar voor om de achterwielen op de stoeprand te zetten.
5. Als de rollator stabiel staat, kan u zelf de stoeprand opstappen.

4.4. Gaan zitten, opstaan, wandelen

VOORZICHTIG

Kans op vallen

- Let erop dat beide remhendels in parkeerstand staan voordat u gaat zitten, zie §4.1.. Laat de remhendels in deze stand staan totdat u gaat wandelen. Houd uw voeten tussen de achterwielen.
- Beweeg de rollator niet al zittend voort.

1. Duw beide remhendels omlaag in parkeerstand.
2. Verifieer of de rugsteun en de zit neer gedraaid en bevestigd zijn.
3. Terwijl u op de handgrepen steunt, draait u zich om en gaat u op de zit neerzitten.
4. Om opnieuw op te staan, leun op de handgrepen en draai u om.
5. Trek beide remhendels omhoog en gebruik de standaard remmen.
6. Laat de remhendels los en stap voorwaarts met de rollator dicht bij uw lichaam.

5. Onderhoud

- i** Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat uw rollator in een perfect werkende staat blijft. Voor de onderhoudshandleiding kan u de website van Vermeiren raadplegen: www.vermeiren.com.

5.1. Schoonmaak

Gebruik een zachte, vochtige doek en lauwwarm water met een milde huishoudelijke zeep om de rollator schoon te maken. Vermijd dat onderdelen doorweekt raken. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

5.2. Ontsmetting

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor beschadiging

- Ontsmetting mag enkel worden uitgevoerd door getraind personeel. Neem contact op met uw vakhandelaar.

Gebruik een zachte, vochtige doek en lauwwarm water met een mild huishoudelijk desinfectiemiddel om de rollator schoon te maken.

5.3. Inspectie / Onderhoud / Reparatie

De verwachte levensduur van uw rollator is 5 jaar. De levensduur wordt beïnvloed door zijn gebruik, opslag, onderhoud, service en reiniging.

Voordat u met uw rollator op pad gaat, moet deze nagekeken worden op volgende punten:

- Volledigheid.
- Vouwmechanisme: goed werkend.
- Bouten en moeren: zitten goed vast.
- Remmen: goed werkend.
- Wielen (stabiliteit, spoor, bevestigingsschroeven).
- Indien uw wielen regelmatig in contact komen met draden, haren of andere vezels, kunnen deze geblokkeerd raken. Kijk daarom regelmatig uw wielen na of ze vrij kunnen roteren en of ze in een goede staat verkeren.
- Frame (vervormingen, stabiliteit, verbindingen).
- Handgrepen (veilige blokkering van de hoogteverstelling, goede steun van de handgrepen).
- Zit, rugsteun en opbergzak (slijtage of beschadigingen).

Uw rollator is opgebouwd uit aluminium en plastic onderdelen. We raden aan om uw product minstens één keer per jaar te laten inspecteren, maar de onderhoudsfrequentie hangt af van de frequentie en intensiteit van gebruik. Raadpleeg uw vakhandelaar om tot een overeenstemming betreffende de onderhoudsfrequentie te komen.

Reparaties en vervangingen mogen enkel door opgeleide personen worden uitgevoerd en enkel met originele vervangonderdelen van Vermeiren.

Aarzel niet om de service die door uw vakhandelaar aangeboden wordt, te gebruiken. Hij/zij zal u graag helpen met betrekking tot service en reparaties.

5.4. Hergebruik

Voor ieder hergebruik moet de rollator gedesinfecteerd, geïnspecteerd en onderhouden worden volgens de instructies in §5.2. en §5.3..

5.5. Beëindiging van gebruik

Op het einde van de levensduur moet u de rollator vernietigen volgens de lokale milieuwetgeving. U kunt best de rollator demonteren om transport van recyclebare materialen te vergemakkelijken.

6. Technische specificaties

Onderstaande technische gegevens zijn enkel geldig voor deze rollator, bij standaardinstellingen en optimale omgevingsfactoren. Houd bij gebruik rekening met deze details.

Merk	Vermeiren
Productgroep	Rollator
Type	Goliat Artro
Beschrijving	Afmetingen
Max. gebruikersgewicht	200 kg
Maximaal vulgewicht van opbergzak	5 kg
Totale lengte	750 mm
Lengte dichtgevouwen	400 mm
Totale breedte	730 mm
Breedte dichtgevouwen	730 mm
Totale hoogte	1140 - 1310 mm
Hoogte dichtgevouwen	1080 - 1280 mm
Handgreephoogte	1140 - 1310 mm
Aanbevolen lichaamsgrootte	1650 - 2000 mm
Afstand tussen de handgrepen	580 mm
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren.	
Meettolerantie +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Merk	Vermeiren
Productgroep	Rollator
Type	Goliat Artro
Beschrijving	Afmetingen
Zithoogte	490 - 560 mm
Zitbreedte	470 mm
Zitdiepte	410 mm
Totaal gewicht	12,35 kg
- zonder mandje	12 kg
Wieldiameter	200 x 30 mm
Remmen	Standaard remmen & parkeerremmen
Draaicirkel	1050 mm
Opslag en gebruikstemperatuur	+5°C - +41°C
Opslag en gebruiksluchtvochtigheid	30% - 70%
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren. Meettolerantie +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Inhalt

Vorwort	71
1. Ihr Produkt	73
2. Vor der Benutzung	74
2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung und Indikationen	74
2.2. Sicherheitshinweise und mögliche Risiken	75
2.3. Symbole an dem Rollator	76
2.4. Bei Lieferung	77
2.5. Transport und Aufbewahrung	77
3. Montage/Demontage und Anpassungen	78
3.1. Montage	78
3.2. Auseinanderbauen	83
3.3. Montage des Gehstockhalters (optional)	84
3.4. Höhenverstellung	84
4. Benutzen des Rollators	85
4.1. Bremssystem	85
4.2. Falten / Entfalten	86
4.3. Bewältigen von Bordsteinkanten	88
4.4. Setzen, Aufstehen und Gehen	88
5. Wartung	89
5.1. Reinigung	89
5.2. Desinfektion	89
5.3. Inspektion / Wartung / Reparatur	90
5.4. Wiederbenutzung	90
5.5. Entsorgung	91
6. Technische Daten	91

Vorwort

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun Besitzer eines Vermeiren-Rollator!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Produkte von Vermeiren. Dieses Handbuch soll Ihnen bei der Benutzung dieses Rollators und seiner Bedienmöglichkeiten helfen. Lesen Sie es daher bitte aufmerksam durch, um sich mit der Bedienung, den Fähigkeiten und Beschränkungen Ihres Rollator vertraut zu machen.

Sollten Sie nach der Lektüre dieses Handbuchs noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Ihren Fachhändler wenden. Er wird Ihnen gerne in dieser Angelegenheit weiterhelfen.

Wichtiger Hinweis

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Nutzungsdauer Ihres Produkts zu verlängern, sollten Sie es gut behandeln und regelmäßig überprüfen und/oder warten lassen.

Dieses Handbuch enthält die neuesten Produktentwicklungen. Vermeiren behält sich das Recht vor, Veränderungen an dieser Art von Produkt vorzunehmen, ohne eine Verpflichtung einzugehen, ähnliche bereits ausgelieferte Produkte anzupassen oder auszutauschen.

Die Produktabbildungen dienen zur Verdeutlichung der Anweisungen. Das gezeigte Produkt kann in Details von Ihrem Produkt abweichen.

Verfügbare Informationen

Auf unserer Webseite <http://www.vermeiren.com/> finden Sie stets die aktuellste Version der folgenden Informationen. Informieren Sie sich bitte regelmäßig auf dieser Website nach eventuell verfügbaren Aktualisierungen.

Sehbehinderte Menschen können sich die elektronische Version dieses Handbuchs herunterladen und mit Hilfe einer Sprachsyntheselösung („Text-to-Speech-Software“) vorlesen lassen.

	Bedienungsanleitung Für Benutzer und Fachhändler
	Wartungshandbuch für Rollatoren Für Fachhändler
	EG-Konformitätserklärung

1. Ihr Produkt



1. Handgriffe
2. Bremshebel
3. Unterarmauflage
4. Rücken
5. Aufbewahrungstasche
6. Sitz
7. Vorderräder
8. Hinterräder
9. Bremskabel
10. Kipphilfe
11. Reflektoren
12. Typenschild

2. Vor der Benutzung

2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung und Indikationen

- Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt.
- Indikationen und Kontraindikationen: Der Rollator dient zur Unterstützung der Beinfunktion beim Gehen und bei alltäglichen Aktivitäten. Mit den Unterarmstützen ist er speziell für Benutzer geeignet, die unter Mobilitätseinschränkungen mit eingeschränkter Bewegungs-/ Gleichgewichtsfähigkeit leiden, deren Gehfähigkeit und Koordination aber noch ausreichend erhalten ist, wenn die Verwendung des Standard-Rollators aufgrund einer eingeschränkten Handfunktion nicht möglich ist und die Verwendung anderer Gehhilfen unzureichend ist. Benutzen Sie Ihren Rollator nicht, wenn Sie andere körperliche Einschränkungen haben, durch die die Nutzung des Rollators unsicher wird, zum Beispiel bei geschwächter/ eingeschränkter Armfunktion, bei Gleichgewichtsstörungen, Sehbehinderung, Gliedmaßenverlust, usw.
- Der Rollator ist ausschließlich als Gehhilfe für eine Person mit einem maximalen Gewicht von 200 kg vorgesehen.
- Indem Sie sich mit den oberen Extremitäten oder dem Rumpf auf den Rollator stützen oder diesen verschieben, gleicht der Rollator die verminderte Belastbarkeit oder Leistungsfähigkeit der unteren Extremitäten aus. Außerdem sorgt er für eine bessere Unterstützung und Sicherheit beim Gehen.
- Der Rollator kann sowohl in Räumen als auch im Freien verwendet werden.
- Der Rollator ist nicht für den Transport von Gegenständen und/oder von mehr Personen als dem Benutzer vorgesehen. Er ist auch nicht dazu bestimmt, im Sitzen als Transporthilfe verwendet zu werden.
- Er darf nur auf einem ebenen Untergrund verwendet werden, bei dem alle vier Räder Bodenkontakt haben. Nutzen Sie den Rollator nicht auf steinigem, holperigem oder sandigen Böden oder starkem Gefälle, da sonst Kippgefahr besteht. Führen Sie den Rollator beim Gehen immer über einen ebenen, stabilen Untergrund und abgesenkte Bordsteinkanten.
- Die Garantie für dieses Produkt beruht auf dessen normaler Benutzung und Wartung wie in diesem Handbuch beschrieben. Schäden an Ihrem Produkt, die auf unsachgemäße Benutzung oder mangelnde Wartung zurückzuführen sind, führen zum Erlöschen der Garantie.
- Sehen Sie sich auch die technischen Daten und die Grenzen Ihres Rollators in Abschnitt 6. an.

2.2. Sicherheitshinweise und mögliche Risiken

VORSICHT

Verletzungsgefahr

- Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, da andernfalls Verletzungsgefahr besteht oder Ihr Produkt beschädigt werden kann.

Beachten Sie bei der Benutzung die folgenden allgemeinen Warnhinweise:

- Achten Sie darauf, dass sich keine Steine oder andere Gegenstände in den Laufflächen der Räder befinden und dadurch die Räder des Rollators blockieren.
- Achten Sie darauf, dass beide Feststellbremsen erst immer in die Parkposition gestellt werden, bevor Sie den Rollator als Hilfsmittel zum Aufstehen benutzen. Lösen Sie die Feststellbremsen erst, wenn Sie sicher stehen.
- Halten Sie beide Hände an den Handgriffen, wenn Sie vorwärts gehen.
- Beachten Sie, dass bestimmte Teile Ihres Rollators infolge der Umgebungstemperatur, Sonneneinstrahlung, Heizkörpern usw. sehr warm oder sehr kalt werden können. Daher ist beim Berühren Vorsicht geboten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Höhenverstellungen fest gesichert sind, siehe Abschnitt **3.4.**.
- Fassen Sie die Handgriffe nicht mit nassen Händen an. Sie könnten abrutschen und den Halt verlieren.
- Begeben Sie sich mit Ihrem Rollator nicht in den fließenden Verkehr. Bleiben Sie auf dem Fußweg.
- Beachten Sie die Pflege- und Wartungshinweise. Bei Schäden aufgrund von mangelnder Wartung/Pflege haftet der Hersteller nicht.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall [MDR (EU) 2017/745 §2 (**65**)], der im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Denken Sie bitte daran, dass Ihr Rollator je nach den verwendeten Einstellungen einige Diebstahlsicherungen stören kann. Dadurch kann der Alarm ausgelöst werden.

2.3. Symbole an dem Rollator

- i** Das Typenschild befindet sich unter dem linken Handgriff an der Innenseite des Grundrahmens.

	Maximalgewicht des Benutzers (in kg)
	Typbezeichnung
	Katalognummer
	Seriennummer
	Medizinprodukt
	Hersteller
	Produktionsdatum
	Konformitätserklärung
	Achtung: wichtige Informationen
	Bitte Bedienungsanleitung beachten

2.4. Bei Lieferung

Packen Sie Ihr Produkt aus und kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Folgende Teile müssen enthalten sein:

- Grundrahmen mit Sitz, vorderer und hinterer Teil;
- Vorderräder mit Träger;
- Hinterräder mit Träger und Bremskabelanschluss;
- Handgriffe mit Bremsen
- Rücken
- Aufbewahrungstasche;
- Handbuch

Prüfen Sie Ihr Produkt auf Transportschäden. Sollten Sie nach der Auslieferung Schäden feststellen, kontaktieren Sie bitte den Spediteur.

2.5. Transport und Aufbewahrung

Versand und Aufbewahrung des Rollators sollten gemäß den technischen Spezifikationen in §6. erfolgen. Achten Sie darauf, dass der Rollator an einem trockenen Ort aufbewahrt wird.

Schützen Sie den Rollator mit einer geeigneten Abdeckung oder Verpackung gegen Rost und das Eindringen von Fremdkörpern (z. B. Salzwasser, Seeluft, Sand und Staub).

Achten Sie beim Aufbewahren des Rollators darauf, dass keine anderen Gegenstände auf dem Rollator abgelegt oder daran gelehnt werden, weil der Rollator hierdurch beschädigt werden kann.

3. Montage/Demontage und Anpassungen

VORSICHT

Verletzungsgefahr

- Bauen Sie den Rollator vollständig zusammen, bevor Sie seine Höhe einstellen.

3.1. Montage

3.1.1. Montage der Vorderräder und Hinterräder

VORSICHT

Sturz- oder Kipprisiko

- Stellen Sie die vier Räder immer auf die gleiche Höhe ein.
 - Achten Sie bei der Montage der Vorderräder darauf, dass sie auf der richtigen Seite montiert werden. Die Achsen der Räder müssen senkrecht stehen, siehe Abbildung.
-  Kontrollieren Sie beim Montieren der Hinterräder, dass sich der Bremskabelanschluss **(4)** auf der Innenseite des Rollators befindet.
1. Legen Sie den Rollator auf die Vorder-/Rückseite.
 2. Drücken Sie den Federknopf **(1)** am Radträger und halten Sie ihn gedrückt.
 3. Schieben Sie den Radträger **(2)** auf das Rahmenrohr **(3)**, bis der Federknopf aus dem gewünschten Einstellungsloch herauspringt.
 4. Wiederholen Sie dies für die anderen Räder. Kontrollieren Sie, dass alle vier Räder ordnungsgemäß gesichert sind.



3.1.2. Montage der Handgriffe

1. Stellen Sie den Rollator auf vier Räder. Achten Sie darauf, dass er stabil steht.
2. Drücken Sie den Federknopf **(5)** am Handgriff und halten Sie ihn gedrückt.
3. Schieben Sie den Handgriff auf das Rahmenrohr **(6)**, bis der Federknopf aus dem gewünschten Einstellungsloch herauspringt.
4. Wiederholen Sie dies für den zweiten Handgriff. Stellen Sie sicher, dass beide Handgriffe gut gesichert sind und dass sie auf die gleiche Höhe eingestellt sind.
5. Setzen Sie den Sterngriff **(7)** in das obere Loch auf jeder Seite ein, um die Stabilität zu erhöhen.



Kabelschellen

Um zu verhindern, dass sich das Kabel zwischen den beweglichen Teilen des Rollators verfängt, befestigen Sie das Bremskabel mit der Kabelschelle **(8)** an dem Rahmen.




3.1.3. Befestigen der Aufbewahrungstasche

⚠ VORSICHT

Sturz- oder Kipprisiko

- Beladen Sie die Aufbewahrungstasche nicht zu schwer.

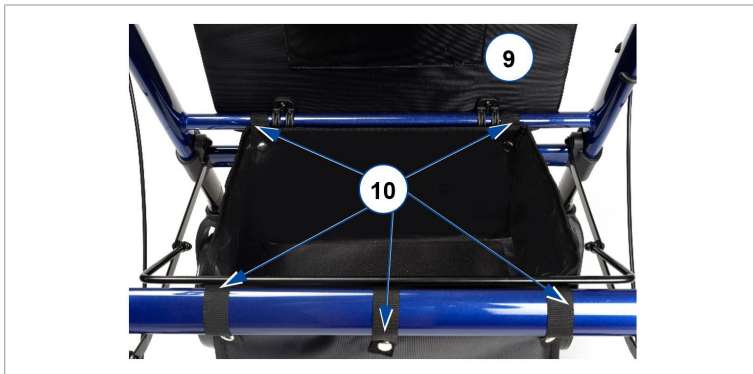

Die maximale Zuladung der Aufbewahrungstasche ist in Abschnitt 6. angegeben.

Die Aufbewahrungstasche wird unterhalb der Sitzfläche an den beiden waagrechten Rohren angebracht, auf denen die Sitzfläche aufliegt.

1. Klappen Sie die Sitzfläche (9) nach oben.
2. Befestigen Sie die Aufbewahrungstasche mit den fünf Druckknöpfen (10) an den Rahmenrohren.
3. Klappen Sie die Sitzfläche wieder herunter.

3.1.4. Montieren/Abbauen der Rückenlehne

Abbauen

1. Drehen Sie die Verriegelungen auf beiden Seiten der Rückenlehne in die Position „offen“ [A], indem Sie den Hebel (11) drehen.
2. Schieben Sie die Rückenlehne nach oben und nehmen Sie sie ab.



Montieren

1. Achten Sie darauf, dass die Verriegelungen der Rückenlehne in der Position „offen“ [A] stehen.
2. Schieben Sie die Rückenlehnenseiten so weit wie möglich auf den Träger (12).
3. Stellen Sie die Verriegelungen auf beiden Seiten der Rückenlehne auf die Position „verriegelt“ [B], indem Sie den Hebel (11) drehen. Achten Sie darauf, dass die Rückenlehne gut in ihrer Position gesichert ist, bevor Sie sich setzen!



3.1.5. Position des Handgriffs


⚠ VORSICHT

Sturzgefahr

- Überschreiten Sie nicht die maximale Reichweite, die auf der Handgriffhalterung angegeben ist.

Die Position der Handgriffe kann stufenlos eingestellt werden, um sie den Bedürfnissen des Benutzers anzupassen. Um die Einstellung zu erleichtern, sind 5 Positionen auf der Griffstütze **(13)** markiert.

1. Lösen Sie den Hebel **(14)** unterhalb der Unterarmstütze.
2. Schieben Sie den Handgriff nach vorne/hinten, bis die gewünschte Position erreicht ist.
3. Ziehen Sie den Hebel fest.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen Haltegriff und vergewissern Sie sich, dass die Bügel gut befestigt sind.

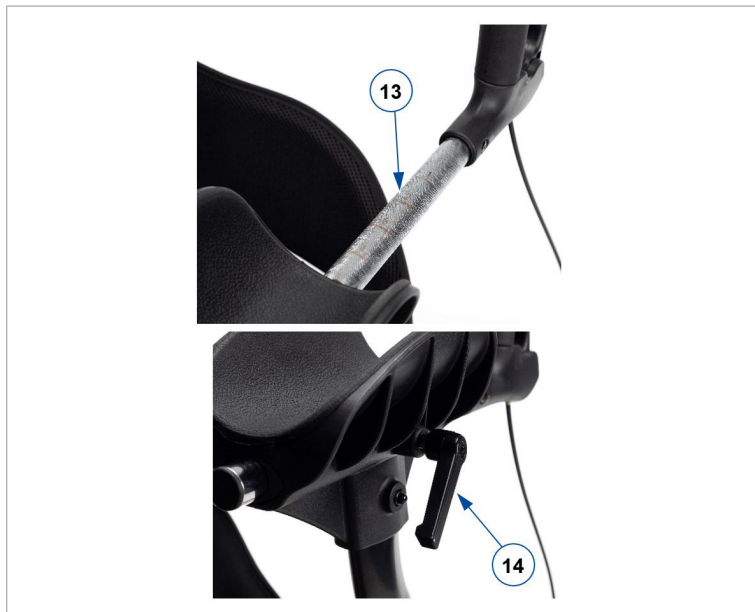

3.2. Auseinanderbauen

VORSICHT

Beschädigungsgefahr

- Achten Sie auf die Position der Bremskabel. Ziehen Sie die Handgriffe nicht zu hoch, damit das Bremskabel nicht beschädigt wird.

Zum Auseinanderbauen des Rollators führen Sie die in dem vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch:

1. Aufbewahrungstasche: Lösen Sie die Druckknöpfe **(10)** und nehmen Sie die Tasche ab.
2. Kabelschelle **(8)** (2x): Ziehen Sie sie vorsichtig von dem Rahmenrohr ab.
3. Handgriff mit Bremshebel (2x): Drücken Sie den Federknopf **(5)** und halten Sie ihn gedrückt, während Sie den Handgriff aus dem Rahmen herausziehen.
4. Vorder- und Hinterräder (4x): Drücken Sie den Federknopf **(1)** und halten Sie ihn gedrückt, während Sie das Rad aus dem Rahmen herausziehen.

3.3. Montage des Gehstockhalters (optional)

1. Klicken Sie das Unterteil **(15)** auf die mitgelieferte Halterung am unteren hinteren Rahmen.
2. Entfernen Sie die Schraube **(16)** am oberen Rahmen und setzen Sie die mitgelieferte Schraube ein.
3. Setzen Sie den Clip mit der Mutter auf die andere Seite der Schraube und ziehen Sie ihn fest an.



3.4. Höhenverstellung

- i** So passen Sie die Höhe des Rollators an die Körpergröße an:
- Stellen Sie zuerst die Höhe der Sitzfläche ein.
 - Stellen Sie anschließend die Höhe der beiden Handgriffe ein.

⚠ VORSICHT

Sturz- oder Kipprisiko

- Stellen Sie die vier Räder immer auf die gleiche Höhe ein.

Die Höhe des Rollators kann durch Einstellen der Handgriffe (6 Positionen in Schritten von 25 mm) angepasst.

Der Sitz kann durch Einstellen der Vorderräder und Hinterräder (5 Positionen in Schritten von 25 mm) in der Höhe verändert werden.

Zum Anpassen von einem dieser:

1. Drücken Sie den Federknopf und halten Sie ihn gedrückt.
2. Schieben Sie das Rad oder den Handgriff im Rahmenrohr auf die gewünschte Höhe, bis der Federknopf aus dem gewünschten Einstellungsloch herauspringt.
3. Achten Sie darauf, dass der Federknopf korrekt fixiert ist.
4. Setzen Sie den Sterngriff in das obere Loch ein, um den Handgriff zusätzlich zu sichern.

Stellen Sie sicher, dass

- beide Handgriffe auf die gleiche Höhe eingestellt sind.
- alle 4 Räder auf die gleiche Höhe eingestellt sind.

4. Benutzen des Rollators

4.1. Bremssystem

VORSICHT

Sturzgefahr

- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie die Funktion der Bremsen vor jeder Nutzung kontrollieren. Der Zustand des Bremssystems kann durch Verschleiß, die Anwesenheit von Öl und anderen Verunreinigungen an den Hinterrädern und dem Bremsmechanismus beeinträchtigt werden.

Der Rollator ist mit Bremsen ausgestattet, die mit zwei Bremshebeln **(15)** betätigt werden. Die Bremshebel können auf zwei Arten genutzt werden: als normale Bremse (Betriebsbremse) und als Feststellbremse (Parkbremse).


⚠ VORSICHT

Beschädigungsgefahr

- Schieben Sie den Rollator nicht zu stark, wenn Sie die Betriebsbremse betätigen. Hierdurch könnten die Reifen oder Bremsen beschädigt werden.

Um die normale Bremse zu benutzen, ziehen Sie beide Bremshebel **(15)** gleichzeitig in einer zusammen-drückenden Bewegung nach oben [A]. Um den Bremsvorgang zu beenden, lassen Sie die Bremshebel los.

Um die Feststellbremse zu aktivieren, drücken Sie beide Bremshebel **(15)** nach unten in die Einraststellung [B]. Aktivieren Sie immer beide Feststellbremsen gleichzeitig. Zum Lösen der Feststellbremsen ziehen Sie beide Bremshebel gleichzeitig nach oben.

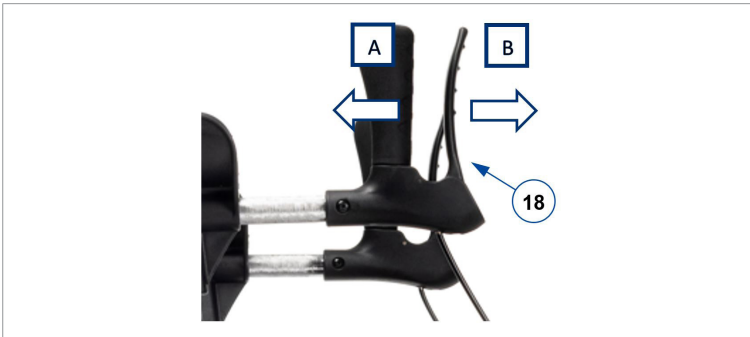

4.2. Falten / Entfalten

⚠ VORSICHT

Einklemmgefahr

- Halten Sie Finger, Schnallen, Schmuck und Kleidung vom Klappmechanismus fern.

⚠ VORSICHT

Sturzgefahr

- Überprüfen Sie, dass der Rollator vollständig aufgefaltet ist und der Rahmen arretiert ist.



4.2.1. Auffalten des Rollators

1. Drücken Sie beide Bremshebel herunter in die Parkposition, siehe Abschnitt **4.1.**.
2. Stellen Sie den Rollator mit den vier Rädern auf den Boden und halten Sie dabei Rahmenrohre fest.
3. Ziehen Sie die vorderen **(18)** und hinteren **(19)** Rahmenrohre auseinander und drücken Sie die Stangen für den Faltmechanismus **(20)** so weit wie möglich nach unten. Achten Sie darauf, dass Sie sich Ihre Finger nicht in dem Mechanismus einklemmen!
4. Klappen Sie die Sitzfläche herunter.
5. Montieren Sie die Rückenlehne, wie in **§3.1.4.** beschrieben.

4.2.2. Zusammenfallen des Rollators


1. Stellen Sie sich hinter den Rollator.
2. Drücken Sie beide Bremshebel herunter in die Parkposition, siehe Abschnitt **4.1.**.
3. Klappen Sie die Sitzfläche nach oben.
4. Leeren Sie die Aufbewahrungstasche.
5. Ziehen Sie den Sitzrahmen **(20)** nach oben, um den Rahmen etwas zu schließen.
6. Schließen Sie den Rahmen vollständig, indem Sie die vorderen und hinteren Rohre aufeinander zu drücken.
7. Nehmen Sie die Rückenlehne ab, wie in **§3.1.4.** beschrieben.

4.3. Bewältigen von Bordsteinkanten

VORSICHT

Sturzgefahr

- Nehmen Sie Bordsteinkanten direkt, mit beiden Vorderrädern ausgerichtet auf die Bordsteinkante. Halten Sie den Rollator nahe.

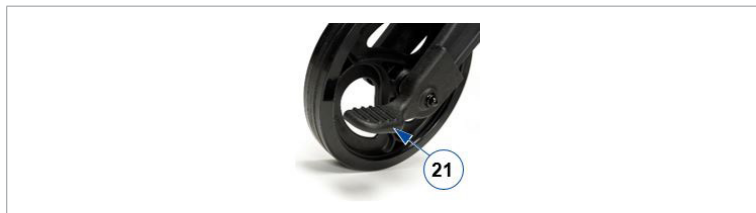

Um das Überwinden kleiner Hindernisse, wie z.B. Bordsteine, zu erleichtern, ist der Rollator mit einer Kipphilfe an den beiden Hinterrädern ausgestattet.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie stabil stehen und halten Sie beide Handgriffe.
2. Drücken Sie mit einem Fuß auf den Kipphelb (21), um die Vorderräder anzuheben.
3. Halten Sie den Rollator mit den Handgriffen in dieser Position und schieben Sie ihn langsam nach vorne, bis die Vorderräder auf dem Bordstein stehen.
4. Heben Sie jetzt die Handgriffe an und schieben Sie den Rollator weiter nach vorne, um die Hinterräder auf den Bordstein zu stellen.
5. Wenn der Rollator stabil steht, können Sie selbst die Bordsteinkante in Angriff nehmen.

4.4. Setzen, Aufstehen und Gehen

VORSICHT

Sturzgefahr

- Achten Sie darauf, dass beide Bremshebel in Parkposition sind, bevor Sie sich setzen; siehe Abschnitt 4.1.. Halten Sie die Bremshebel in dieser Position, bis Sie wieder zu gehen beginnen. Bleiben Sie mit Ihren Füßen zwischen den Hinterrädern.
- Bewegen Sie den Rollator nicht im Sitzen.

1. Drücken Sie beide Bremshebel herunter in die Parkposition.
2. Überprüfen Sie, ob die Rückenlehne und die Sitzfläche heruntergeklappt und in ihrer Position gesichert sind.
3. Stützen Sie sich auf die Handgriffe, drehen Sie sich um und setzen Sie sich auf die Sitzfläche.
4. Zum Aufstehen stützen Sie sich auf die Handgriffe und drehen Sie sich um.
5. Ziehen Sie beide Bremshebel nach oben und benutzen Sie die Betriebsbremsen.
6. Lassen Sie die Bremshebel los und machen Sie mit dem Rollator nahe vor Ihrem Körper einen Schritt vorwärts.

5. Wartung

- i** Durch eine regelmäßige Pflege wird Ihr Rollator in einem einwandfreiem Zustand bleiben. Bezüglich des Wartungshandbuchs besuchen Sie die Vermeiren-Website unter: www.vermeiren.com.

5.1. Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Rollators ein weiches, feuchtes Tuch und lauwarmes Wasser mit einer milden Seifenlösung für den Haushalt. Vermeiden Sie eine Durchnässung der Teile. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

5.2. Desinfektion

⚠ VORSICHT

Beschädigungsgefahr

- Eine Desinfektion darf nur von dafür geschultem Personal durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Fachhändler.

Verwenden Sie zum Reinigen des Rollators ein weiches, feuchtes Tuch und lauwarmes Wasser mit einem milden Desinfektionsmittel für den Haushalt.

5.3. Inspektion / Wartung / Reparatur

Die erwartete Nutzungsdauer Ihres Rollators beträgt 5 Jahre. Die Lebensdauer Ihres Rollators hängt von der Art der Nutzung, der Einlagerung, der Pflege, Wartung und Reinigung ab.

Bevor Sie Ihren Rollator nutzen, muss dieser auf die folgenden Punkte kontrolliert werden:

- Vollständigkeit.
- Faltmechanismus: Funktioniert gut.
- Schrauben und Muttern: fest angezogen.
- Bremsen: funktionieren gut.
- Räder (Stabilität, Spur, Befestigungsschrauben).
- Wenn die Räder regelmäßig mit Drähten, Haaren oder anderen Fasern in Kontakt kommen, können sie hierdurch blockiert werden. Kontrollieren Sie daher regelmäßig, ob sich die Räder leichtgängig drehen lassen und in gutem Zustand befinden.
- Rahmen (Verformung, Standsicherheit, Verschraubungen).
- Handgriff (sichere Arretierung der Höhenverstellung, sicherer Halt der Handgriffe).
- Sitzfläche, Rückenlehne und Aufbewahrungstasche (Verschleiß oder Beschädigung).

Ihr Rollator besteht aus Aluminium- und Kunststoffkomponenten. Wir empfehlen, Ihren Rollator mindestens einmal pro Jahr überprüfen zu lassen, aber die Wartungshäufigkeit hängt von der Häufigkeit und Intensität der Nutzung ab. Beraten Sie sich bezüglich der geeigneten Wartungshäufigkeit mit Ihrem Fachhändler.

Reparaturen und Erneuerungen dürfen nur von geschultem Personal und mit Original-Ersatzteilen von Vermeiren durchgeführt werden.

Fühlen Sie sich frei, den von Ihrem Fachhändler angebotenen Service zu nutzen. Er wird Ihnen gerne in Bezug auf Service und Reparaturen behilflich sein.

5.4. Wiederbenutzung

Lassen Sie den Rollator vor jeder Wiederverwendung gemäß den Anweisungen in **§5.2.** und **§5.3.** desinfizieren, inspizieren und warten.

5.5. Entsorgung

Am Ende seiner Lebensdauer muss der Rollator in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen entsorgt werden. Am besten demonstrieren Sie den Rollator, um den Transport von wiederverwertbaren Materialien zu erleichtern.

6. Technische Daten

Die nachstehenden technischen Daten gelten für diesen Rollator nur bei Standardeinstellungen und optimalen Umgebungsbedingungen. Berücksichtigen Sie diese Daten bei der Benutzung.

Marke	Vermeiren
Produktgruppe	Rollator
Typ	Goliat Artro
Beschreibung	Abmessungen
Maximales Gewicht des Benutzers	200 kg
Maximale Zuladung der Aufbewahrungstasche	5 kg
Gesamtlänge	750 mm
Länge zusammengeklappt	400 mm
Gesamtbreite	730 mm
Breite zusammengeklappt	730 mm
Gesamthöhe	1140 - 1310 mm
Höhe im zusammengeklappten Zustand	1080 - 1280 mm
Höhe der Handgriffe	1140 - 1310 mm
Empfohlene Körpergröße	1650 - 2000 mm
Abstand zwischen den Handgriffen	580 mm
Sitzhöhe	490 - 560 mm
Sitzbreite	470 mm
Sitztiefe	410 mm
Gesamtgewicht	12,35 kg
- ohne Korb	12 kg
Durchmesser Räder	200 x 30 mm
Technische Änderungen vorbehalten. Messtoleranzen +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Marke	Vermeiren
Produktgruppe	Rollator
Typ	Goliat Artro
Beschreibung	Abmessungen
Bremsen	Betriebsbremse und Feststellbremse
Wendekreis	1050 mm
Temperaturbereich für Lagerung und Nutzung	+5 °C - +41 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich für Lagerung und Nutzung	30% - 70%
Technische Änderungen vorbehalten. Messtoleranzen +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Sommario

Premessa	94
1. Il prodotto	96
2. Prima dell'uso	97
2.1. Uso previsto e indicazioni	97
2.2. Istruzioni di sicurezza e rischi applicabili	98
2.3. Simboli presenti sul deambulatore	99
2.4. Alla consegna	100
2.5. Spedizione e magazzinaggio	100
3. Montaggio/smontaggio e regolazioni	101
3.1. Montaggio	101
3.2. Smontaggio	106
3.3. Montaggio del porta stampelle/bastone (optional)	107
3.4. Regolazioni dell'altezza	107
4. Uso del deambulatore	108
4.1. Sistema frenante	108
4.2. Chiusura / Apertura	109
4.3. Affrontare i cordoli	111
4.4. Sedersi, alzarsi in piedi e camminare	111
5. Manutenzione	112
5.1. Pulizia	112
5.2. Disinfezione	112
5.3. Ispezione / assistenza / riparazioni	113
5.4. Utilizzi successivi	114
5.5. Smaltimento	114
6. Specifiche tecniche	114

Premessa

Congratulazioni Ora possiede un deambulatore Vermeiren!

Grazie per la fiducia accordata ai prodotti Vermeiren. Questo manuale viene fornito come supporto per l'uso del deambulatore e delle sue opzioni operative. Leggerlo attentamente, in quanto aiuta a familiarizzarsi con il funzionamento, le prestazioni e le limitazioni del deambulatore.

Per eventuali ulteriori domande successive alla lettura di questo manuale, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato, che sarà lieto di fornire un supporto.

Nota importante

Per garantire la propria sicurezza e prolungare la durata del prodotto, trattarlo con cura e farlo controllare e/o sottoporlo a manutenzione con regolarità.

Questo manuale rispecchia gli sviluppi più recenti del prodotto. Vermeiren si riserva il diritto di introdurre modifiche di questo tipo di prodotto senza alcun obbligo di adattare o sostituire i prodotti analoghi consegnati in precedenza.

Le immagini del prodotto vengono utilizzate per chiarire le istruzioni. I dettagli del prodotto mostrato possono essere diversi da quelli del prodotto in uso.

Informazioni disponibili

Sul sito Web di Vermeiren, all'indirizzo <http://www.vermeiren.com/>, è sempre disponibile la versione più recente delle informazioni indicate di seguito. Visitare con regolarità tale sito per verificare l'esistenza di eventuali aggiornamenti.

Le persone ipovedenti possono scaricare la versione elettronica di questo manuale e farlo leggere da un software applicativo di sintesi vocale.

	Manuale di istruzioni Per l'utente e il rivenditore specializzato
	Manuale di assistenza per le deambulatori Per il rivenditore specializzato
	Dichiarazione di conformità CE

1. Il prodotto



1. Impugnature
2. Leva del freno
3. Supporto per avambracci
4. Schienale
5. Borsa portaoggetti
6. Sedile
7. Ruote anteriori
8. Ruote posteriori
9. Cavo del freno
10. Leva di inclinazione
11. Riflettori
12. Targhetta di identificazione

2. Prima dell'uso

2.1. Uso previsto e indicazioni

- L'ausilio è un prodotto medicale.
- Indicazioni e controindicazioni: Il deambulatore è studiato per supportare il funzionamento delle gambe durante la deambulazione e le attività quotidiane. Grazie al supporto per avambracci, è specificamente indicato per gli utenti che soffrono di disabilità motorie che comportano una riduzione dei movimenti e dell'equilibrio, ma con una capacità di deambulazione e una coordinazione sufficientemente conservate, quando l'uso del rollator standard non è possibile a causa di un'alterata funzionalità delle mani e l'uso di altri ausili per la deambulazione è insufficiente. Non utilizzarlo se si soffre di altre limitazioni fisiche, come debolezza delle braccia, disturbi dell'equilibrio e così via, vista compromessa, perdita degli arti, in grado di causare un uso non sicuro del deambulatore.
- Il deambulatore è progettato e realizzato esclusivamente per l'uso come ausilio per la deambulazione di una sola persona di peso non superiore a 200 kg.
- Il deambulatore compensa l'assenza di un sostegno adeguato da parte delle gambe dell'utente, che deve appoggiarsi o spostarsi con esso servendosi degli arti superiori o del busto. Il deambulatore offre un maggior livello di stabilità, supporto e sicurezza durante la deambulazione.
- È possibile utilizzare il deambulatore al coperto e all'aperto.
- Esso non è destinato al trasporto di merci e/o di persone in più oltre all'utente. Inoltre, non deve essere utilizzato come ausilio per il trasporto da seduti.
- Esso deve essere utilizzato soltanto su superfici sulle quali tutte le quattro ruote tocchino il suolo. Non utilizzare il deambulatore su terreni pietrosi, irregolari o sabbiosi, o in punti con una forte inclinazione. Il deambulatore può diventare instabile. Per camminare con il deambulatore, scegliere aree piane e stabili e cordoli smussati.
- La garanzia del prodotto presuppone un uso e una manutenzione normali del medesimo, come descritti in questo manuale. I danni al prodotto dovuti a uso improprio o manutenzione carente causano la decadenza della garanzia.
- Verificare tutti i dettagli tecnici e le limitazioni del deambulatore nel §6..

2.2. Istruzioni di sicurezza e rischi applicabili

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

- Leggere e osservare le istruzioni contenute in questo manuale. In caso contrario, è possibile ferirsi o danneggiare il prodotto.

Durante l'uso, tenere presenti le seguenti avvertenze generali:

- Verificare che nessuna pietra o altro oggetto blocchi le ruote del deambulatore.
- Prima di utilizzare il deambulatore come ausilio per alzarsi in piedi, accertarsi che entrambe le leve dei freni si trovino in posizione di parcheggio. È opportuno sbloccare i freni di parcheggio soltanto una volta che si sia in piedi in modo confortevole e stabile.
- Durante la deambulazione, tenere entrambe le mani sulle impugnature.
- Non dimenticare che alcune parti del deambulatore possono diventare molto calde o fredde a causa della temperatura ambiente, della radiazione solare e di dispositivi di riscaldamento. Prestare attenzione quando si tocca la carrozzina.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che le regolazioni dell'altezza siano saldamente bloccate; vedere il **§3.4.**
- Non afferrare le impugnature con le mani bagnate. In caso contrario si possono perdere la presa e l'equilibrio.
- Non utilizzare il deambulatore nel traffico. Rimanere sempre sul marciapiede.
- Prendere nota delle istruzioni per la cura e la manutenzione. Il produttore declina ogni responsabilità per danni dovuti a errori di manutenzione/cura.

Qualsiasi incidente grave [MDR (UE) 2017/745 **§2 (65)**] che si sia verificato in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Prestare attenzione alla possibilità che il deambulatore può interferire con alcuni tipi di sistemi antifurto, a seconda delle impostazioni utilizzate. Ciò può fare scattare l'allarme dei negozi.

2.3. Simboli presenti sul deambulatore

- i** La targhetta di identificazione è situata sotto l'impugnatura sinistra, sul lato interno del telaio base

	Peso massimo dell'utente, in kg
	Indicazione del modello
	Codice prodotto
	Numero di serie
	Dispositivo medico
	Produttore
	Data di produzione
	Dichiarazione di conformità
	Attenzione: informazioni importanti
	Si consiglia di leggere il manuale

2.4. Alla consegna

Disimballare il prodotto e verificare che sia completo. Devono essere presenti i seguenti articoli:

- Telaio base con sedile, sezione anteriore e posteriore;
- Ruote anteriori con supporto;
- Ruote posteriori con supporto e attacco per il cavo del freno;
- Impugnature con freni
- Schienale
- Borsa portaoggetti;
- Manuale

Verificare che il prodotto non presenti danni dovuti al trasporto. Se si rilevano danni dopo la consegna, rivolgersi al trasportatore.

2.5. Spedizione e magazzinaggio

La spedizione e il magazzinaggio del deambulatore devono avvenire come indicato nelle specifiche tecniche riportate nel §6.. Avere cura di immagazzinare il deambulatore in un luogo asciutto.

Fornire una copertura o un imballaggio sufficienti a proteggere il deambulatore da ruggine e corpi estranei (ad esempio acqua salata, aria di mare, sabbia e polvere).

Per evitare danni, accertarsi che sul deambulatore, o contro il medesimo, non sia immagazzinato alcun oggetto.

3. Montaggio/smontaggio e regolazioni

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

- Prima di regolare l'altezza del deambulatore, montarlo completamente.

3.1. Montaggio

3.1.1. Montaggio delle ruote anteriori e posteriori

ATTENZIONE

Rischio di caduta o di ribaltamento

- Regolare sempre le quattro ruote sulla stessa altezza.
 - Quando si montano le ruote anteriori, accertarsi che siano installate sul lato corretto. Gli assi delle ruote devono essere verticali, vedi figura.
-  Quando si montano le ruote posteriori, verificare che l'attacco **(4)** per il cavo del freno si trovi dal lato interno del deambulatore.
1. Poggiare il deambulatore sul lato anteriore/posteriore.
 2. Tenere premuto il pulsante a molla **(1)** presente sul supporto della ruota.
 3. Inserire il supporto della ruota **(2)** nel tubo del telaio **(3)** facendolo scorrere fino a quando il pulsante a molla non si inserisce nel foro di regolazione desiderato.
 4. Ripetere l'operazione per le altre ruote. Accertarsi che tutte e quattro le ruote siano fissate saldamente.



3.1.2. Montaggio delle impugnature

1. Poggiare il deambulatore sulle quattro ruote. Accertarsi che sia stabile.
2. Tenere premuto il pulsante a molla (5) presente sull'impugnatura.
3. Inserire l'impugnatura nel tubo (6) del telaio, facendovelo scorrere fino a quando il pulsante a molla non si inserisce nel foro di regolazione desiderato.
4. Ripetere l'operazione per la seconda impugnatura. Accertarsi che entrambe le impugnature siano fissate saldamente e regolate sulla stessa altezza.
5. Inserire el pomo de estrella (7) en el orificio superior de cada lado para obtener una mayor rigidez.



Per evitare che il cavo del freno venga intrappolato fra i componenti in movimento del deambulatore, fissarlo al telaio con la fascetta fermacavo (8).




3.1.3. Montaggio della borsa portaoggetti

⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta o di ribaltamento

- Non sovraccaricare la borsa portaoggetti.

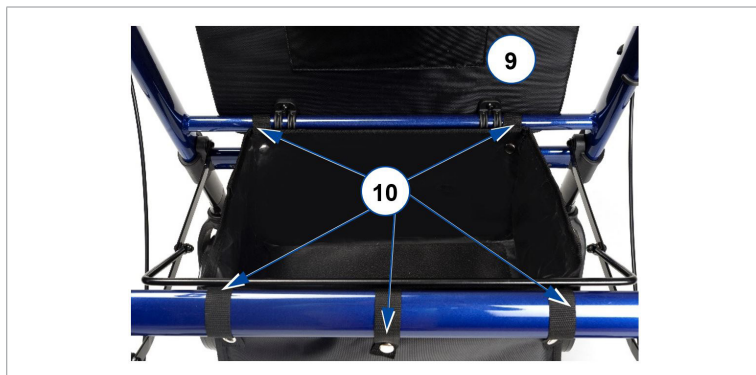

Il peso massimo che la borsa è in grado di trasportare è riportato nel §6..

La borsa portaoggetti deve essere montata sotto il sedile, sui due tubi orizzontali di appoggio del medesimo.

1. Sollevare il sedile (9).
2. Montare la borsa portaoggetti sui tubi del telaio con i cinque fissaggi a scatto (10).
3. Riabbassare il sedile.

3.1.4. Montaggio/smontaggio dello schienale

Smontaggio

1. Ruotare la leva (11) portando nella posizione "aperta" [A] i blocchi presenti su entrambi i lati dello schienale.
2. Fare scorrere lo schienale verso l'alto e rimuoverlo.



Montaggio

1. Accertarsi che i blocchi presenti su entrambi i lati dello schienale si trovino nella posizione "aperta" [A].
2. Fare scorrere i fianchi dello schienale sul supporto (12) fino a raggiungere la posizione più bassa possibile.
3. Ruotare la leva (11) per portare i blocchi su entrambi i lati dello schienale nella posizione di "blocco" [B]. Prima di sedersi, verificare che lo schienale sia fissato saldamente nella posizione corretta!



3.1.5. Posizione dell'impugnatura

⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Non superare la portata massima indicata sul supporto dell'impugnatura.

La posizione delle impugnature può essere regolata in modo continuo per adattarsi alle esigenze dell'utente. Per facilitare la regolazione, sono state contrassegnate 5 posizioni sul supporto dell'impugnatura **(13)**.

1. Allentare la leva **(14)** sotto il supporto ascellare.
2. Fare scorrere l'impugnatura in avanti/indietro fino alla posizione desiderata.
3. Serrare la leva.
4. Ripetere l'operazione per l'altra impugnatura e assicurarsi che le cinghie siano ben fissate.



3.2. Smontaggio

ATTENZIONE

Rischio di danni

- Prestare attenzione alla posizione dei cavi dei freni. Non tirare troppo in alto le impugnature, per evitare di danneggiare il cavo del freno.

Per smontare il deambulatore, procedere nell'ordine inverso a quello di montaggio descritto nella sezione precedente:

1. Borsa portaoggetti: Aprire i fissaggi a scatto **(10)** e rimuovere la borsa.
2. Fascetta fermacavo **(8)** (2x): staccare dal tubo del telaio tirando con precauzione.
3. Impugnatura con leva del freno (2x): Tenere premuto il pulsante a molla **(5)** e sfilare l'impugnatura dal telaio.
4. Ruote anteriori e posteriori (4x): tenere premuto il pulsante a molla **(1)** e sfilare la ruota dal telaio.

3.3. Montaggio del porta stampelle/bastone (optional)

1. Inserire la parte porta stampelle/puntale **(15)** nel supporto posizionato nella parte bassa del telaio posteriore.
2. Togliere la vite **(16)** nella parte alta del telaio ed inserire invece la vite che viene consegnata con il porta stampelle.
3. Posizionare la clip con il dado sull'altro lato della vite ed avvitare.



3.4. Regolazioni dell'altezza

- i** Regolazione dell'altezza del deambulatore in base alle dimensioni del corpo:
 - Regolare anzitutto l'altezza del sedile.
 - Regolare quindi l'altezza di entrambe le impugnature.

⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta o di ribaltamento

- Regolare sempre le quattro ruote sulla stessa altezza.

È possibile variare l'altezza del deambulatore regolando le impugnature (6 posizioni a intervalli di 25 mm)

È possibile variare l'altezza del sedile regolando le ruote anteriori e posteriori (5 posizioni a intervalli di 25 mm).

Per effettuare tali regolazioni:

1. Tenere premuto il pulsante a molla.
2. Fare scorrere la ruota o l'impugnatura verso l'alto / il basso all'interno del tubo del telaio fino a raggiungere l'altezza desiderata, quando il pulsante a molla si inserisce nel foro di regolazione desiderato.
3. Accertarsi che il pulsante a molla sia fissato saldamente.
4. Inserire il pomello a stella nel foro superiore per fissare ulteriormente l'impugnatura.

Accertarsi che

- le impugnature siano state regolate sulla stessa altezza.
- tutte e 4 le ruote siano state regolate sulla stessa altezza.

4. Uso del deambulatore

4.1. Sistema frenante

ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Per garantire la propria sicurezza, verificare il funzionamento dei freni. Le condizioni del sistema frenante sono influenzate dalla presenza di usura, olio e altri contaminanti sulle ruote posteriori e sul meccanismo di frenata.

Il deambulatore è dotato di freni azionati da due apposite leve **(15)**. È possibile utilizzare le leve dei freni in due modalità di frenata, vale a dire esercizio e parcheggio.

⚠ ATTENZIONE


IT

Rischio di danni

- Non spingere il deambulatore con una forza eccessiva mentre si utilizzano i freni nella modalità di esercizio. Ciò può danneggiare gli pneumatici o i freni.

Per utilizzare i freni nella modalità di esercizio, tirare simultaneamente entrambe le leve dei freni **(15)** verso l'alto [A] con un movimento di compressione. Per interrompere la frenatura, rilasciare le leve dei freni.

Per utilizzare i freni di parcheggio, spingere entrambe le leve dei freni **(15)** verso il basso nella posizione bloccata [B]. Utilizzare sempre simultaneamente entrambi i freni di parcheggio. Per uscire dalla modalità di parcheggio, tirare simultaneamente entrambe le leve dei freni verso l'alto.

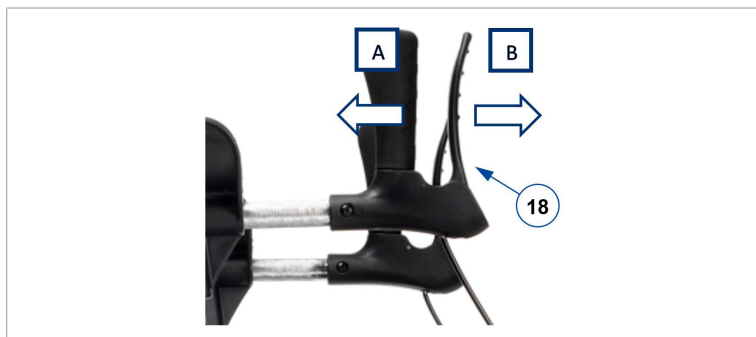

4.2. Chiusura / Apertura

⚠ ATTENZIONE

Rischio di intrappolamento

- Tenere dita, fibbie, gioielli e indumenti lontani dal meccanismo di piegatura.

⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Verificare che il deambulatore sia completamente aperto e che il telaio sia bloccato.



4.2.1. Apertura del deambulatore

1. Spingere entrambe le leve dei freni verso il basso, fino alla posizione di parcheggio; vedere il §4.1..
2. Disporre il deambulatore con le quattro ruote sul terreno, afferrando allo stesso tempo i tubi del telaio.
3. Tirare i tubi anteriori (18) e posteriori (19) del telaio allontanandoli gli uni dagli altri e spingere il più possibile verso il basso le barre del meccanismo di chiusura (20). Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita nel meccanismo!
4. Piegare il sedile verso il basso.
5. Montare lo schienale; vedere il §3.1.4..

4.2.2. Chiusura del deambulatore


1. Posizionarsi in piedi dietro il deambulatore.
2. Spingere entrambe le leve dei freni verso il basso, fino alla posizione di parcheggio; vedere il §4.1..
3. Sollevare il sedile.
4. Svuotare la borsa portaoggetti.
5. Tirare verso l'alto il telaio (20) del sedile per chiudere leggermente il telaio.
6. Chiudere completamente il telaio spingendo i tubi anteriori e posteriori gli uni verso gli altri.
7. Rimuovere lo schienale; vedere il §3.1.4..

4.3. Affrontare i cordoli

ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Affrontare i cordoli perpendicolarmente, con entrambe le ruote anteriori allineate con il cordolo. Tenere il deambulatore vicino a sé.

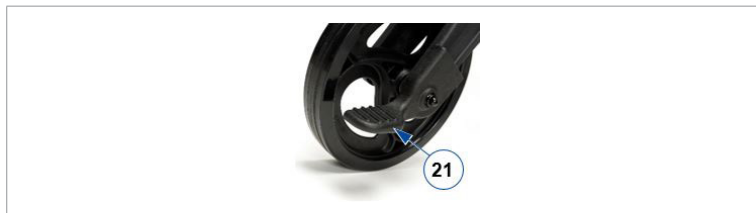

Per facilitare il superamento di piccoli ostacoli, come i cordoli, il deambulatore è dotato di una leva di inclinazione sulle due ruote posteriori.

1. Verificare di essere stabili in posizione eretta, afferrando allo stesso tempo entrambe le impugnature.
2. Premere con un piede la leva di inclinazione **(21)** per sollevare le ruote anteriori.
3. Mantenere il deambulatore in tale posizione servendosi delle impugnature, quindi e avanzare lentamente fino a quando le ruote anteriori si trovano sul cordolo.
4. A questo punto, sollevare le impugnature e avanzare fino a portare le ruote posteriori sul cordolo.
5. Quando il deambulatore raggiunge una posizione stabile, affrontare a propria volta il cordolo.

4.4. Sedersi, alzarsi in piedi e camminare

ATTENZIONE

Rischio di caduta

- Prima di sedersi sul deambulatore, accertarsi che entrambe le leve dei freni si trovino nella posizione di parcheggio; vedere il §4.1.. Mantenere le leve dei freni in tale posizione fino a quando non si riprende a camminare. Tenere i piedi fra le ruote posteriori.
- Non spingete il deambulatore da seduti.

1. Spingere entrambe le leve dei freni verso il basso, fino alla posizione di parcheggio.
2. Verificare che lo schienale e il sedile siano abbassati e bloccati nella posizione corretta.
3. Appoggiandosi alle impugnature, voltarsi e accomodarsi sul sedile.
4. Per rialzarsi, appoggiarsi alle impugnature e voltarsi.
5. Tirare entrambe le leve dei freni verso l'alto e utilizzare i freni nella modalità di esercizio.
6. Rilasciare le leve dei freni e avanzare di un passo con il deambulatore vicino al corpo.

5. Manutenzione

i Una cura regolare garantisce che il deambulatore rimanga in perfette condizioni di funzionamento. Per il manuale di manutenzione, fare riferimento al sito Web di Vermeiren all'indirizzo www.vermeiren.com.

5.1. Pulizia

Per pulire il deambulatore, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida e un detergente delicato per la casa. Non immergere il deambulatore. Non utilizzare detergenti abrasivi per la pulizia.

5.2. Disinfezione

ATTENZIONE

Rischio di danni

- La disinfezione deve essere eseguita esclusivamente da personale con un'opportuna formazione. Consultare il proprio rivenditore specializzato.

Per pulire il deambulatore, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida e un disinfettante delicato per la casa.

5.3. Ispezione / assistenza / riparazioni

La durata media prevista del vostro deambulatore è di 5 anni. La durata del deambulatore è influenzata dalle modalità di uso, stoccaggio, manutenzione, assistenza e pulizia.

Prima di riprendere a utilizzare il deambulatore, occorre ispezionarlo in relazione ai seguenti punti:

- Completezza.
- Meccanismo di chiusura: funzionamento corretto.
- Bulloni e dadi: fissati saldamente.
- Freni: funzionamento corretto.
- Ruote (stabilità, direzione e viti di fissaggio).
- In caso di contatto regolare con fili, capelli o altri residui, è possibile che le ruote si blocchino. Verificare con regolarità che le ruote ruotino liberamente e siano in buone condizioni.
- Telaio (deformazione, stabilità e collegamenti).
- Impugnature (bloccaggio sicuro del sistema di regolazione dell'altezza e supporto adeguato delle impugnature).
- Sedile, schienale e borsa portaoggetti (usura o danni).

Il deambulatore è costruito con componenti in alluminio e plastica. Consigliamo di far ispezionare il rollator almeno una volta all'anno, ma la frequenza di assistenza dipende dalla frequenza e dall'intensità dell'uso. Consultare il proprio rivenditore autorizzato per accordarsi sulla frequenza di assistenza.

Riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite esclusivamente da personale con un'opportuna formazione e utilizzando unicamente ricambi originali Vermeiren.

Non esitare a utilizzare i servizi offerti dal proprio concessionario autorizzato. Che sarà lieto di fornire un supporto per l'assistenza e le riparazioni.

5.4. Utilizzi successivi

Prima di ogni riutilizzo, disinfettare il deambulatore, verificarlo e fare la manutenzione come indicato in §5.2. e §5.3..

5.5. Smaltimento

A fine vita, occorre smaltire il deambulatore conformemente alla legislazione ambientale locale. Il modo migliore per farlo consiste nello smontare il deambulatore per agevolare il trasporto dei componenti riciclabili.

6. Specifiche tecniche

I dettagli tecnici riportati di seguito sono validi soltanto per il deambulatore oggetto del manuale, con le impostazioni standard e in condizioni ambiente ottimali. Durante l'uso, tenere conto di questi dati di dettaglio.

Marchio	Vermeiren
Gruppo prodotto	Deambulatore
Tipo	Goliat Artro
Descrizione	Dimensioni
Peso massimo dell'utente	200 kg
Peso massimo del carico della borsa portaoggetti	5 kg
Lunghezza complessiva	750 mm
Lunghezza in configurazione ripiegata	400 mm
Larghezza complessiva	730 mm
Larghezza ripiegata	730 mm
Altezza complessiva	1140 - 1310 mm
Altezza ripiegata	1080 - 1280 mm
Altezza delle impugnature	1140 - 1310 mm
Altezza persona raccomandata	1650 - 2000 mm
La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Tolleranza misurazioni +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5° .	

Marchio	Vermeiren
Gruppo prodotto	Deambulatore
Tipo	Goliat Artro
Descrizione	Dimensioni
Distanza fra le impugnature	580 mm
Altezza del sedile	490 - 560 mm
Larghezza del sedile	470 mm
Profondità del sedile	410 mm
Massa totale - senza cestino	12,35 kg 12 kg
Diametro delle ruote	200 x 30 mm
Freni	Freni di esercizio e di parcheggio
Larghezza di svolta	1050 mm
Temperatura per utilizzo e conservazione	+5°C - +41°C
Umidità per utilizzo e conservazione	30% - 70%
La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Tolleranza misurazioni +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5° .	

Índice

Introducción	117
1. Su producto	119
2. Antes de su uso	120
2.1. Uso previsto y indicaciones	120
2.2. Instrucciones de seguridad y riesgos aplicables	121
2.3. Símbolos presentes en el andador	122
2.4. Entrega	123
2.5. Transporte y almacenamiento	123
3. Montaje/desmontaje y ajustes	124
3.1. Montaje	124
3.2. Desmontaje	129
3.3. Montaje del soporte del bastón (opcional)	130
3.4. Ajustes de altura	130
4. Uso del andador	131
4.1. Sistema de frenado	131
4.2. Plegado / Desplegado	132
4.3. Salvando bordillos	134
4.4. Sentarse, levantarse y caminar	134
5. Mantenimiento	135
5.1. Limpieza	135
5.2. Desinfección	135
5.3. Inspección / Mantenimiento / Reparación	136
5.4. Reutilizar	136
5.5. Desechar el producto	137
6. Especificaciones técnicas	137

Introducción

¡Felicidades! Es usted el propietario de un andador Vermeiren!

Le agradecemos su confianza en los productos Vermeiren. Le ofrecemos este manual para ayudarle en la utilización de su andador y sus opciones de manejo. Léalo detenidamente. Le ayudará a familiarizarse con el manejo, las capacidades y limitaciones de su andador.

Si todavía tiene alguna duda después de leer este manual, contacte con su distribuidor especializado, estará encantado de ayudarle.

Nota importante

Para garantizar su seguridad y prolongar la vida útil de su producto, cuídalo bien y asegúrese de realizar revisiones y mantenimientos de manera regular.

Este manual refleja los desarrollos más recientes del producto. Vermeiren se reserva el derecho a implementar cambios en este tipo de producto sin que ello suponga obligación alguna de adaptar o cambiar productos similares previamente entregados.

Hay imágenes del producto para ayudar a explicar las instrucciones. Los detalles del producto mostrado pueden variar con su producto.

Información disponible

En nuestro sitio web <http://www.vermeiren.com/> siempre encontrará la versión más reciente de la siguiente información. Consulte este sitio web de manera regular para estar al tanto de posibles actualizaciones.

Las personas con discapacidad visual pueden descargarse la versión electrónica del manual y utilizar un software de síntesis de voz para poder oír su contenido.



Manual de instrucciones
Para el usuario y el distribuidor especializado



Manual de mantenimiento para andadores
Para el distribuidor especializado



Declaración CE de conformidad

1. Su producto



1. Empuñaduras
2. Palanca de freno
3. Soporte axilar
4. Respaldo
5. Bolsa de almacenamiento
6. Asiento
7. Ruedas delanteras
8. Ruedas traseras
9. Cable de los frenos
10. Palanca de inclinación
11. Reflectores
12. Placa de identificación

2. Antes de su uso

2.1. Uso previsto y indicaciones

- Este producto es un dispositivo médico.
- Indicaciones y contraindicaciones: El andador está pensado como apoyo para la función de las piernas al andar y durante las actividades diarias. Con los soportes de antebrazos, está especialmente indicado para usuarios que sufren problemas de movilidad que implican una reducción del movimiento/equilibrio pero con una capacidad de caminar y una coordinación suficientemente preservadas, cuando el uso del rollator estándar no es posible debido a una función deficiente de las manos y el uso de otras ayudas para caminar es insuficiente. No utilice el andador si tiene otras discapacidades físicas por las que su uso podría suponer un riesgo, como brazos débiles, trastornos del equilibrio, visión deficiente, pérdida de extremidades, etc.
- El andador está diseñado exclusivamente como un instrumento de ayuda para andar para una persona con un peso máximo de 200 kg.
- Al apoyar o mover las partes superiores del cuerpo o el tronco encima del andador, este compensa la capacidad o la fuerza reducidas de las partes inferiores del cuerpo. Además, el andador asegura un apoyo más óptimo y más seguridad.
- El andador puede usarse tanto en el interior como en el exterior.
- El andador no es apto para transportar cosas o a más de una persona que no sea el usuario. Tampoco está diseñado para ser utilizado como ayuda de transporte mientras se está sentado.
- Sólo debe usarse sobre una superficie plana en la que las cuatro ruedas estén en contacto con el suelo. No utilizar el andador sobre terreno rocoso, irregular o arenoso, o en lugares con pendientes empinadas, ya que el andador puede desestabilizarse. Circule siempre con su andador por suelos planos y estables y por bordillos biselados.
- La garantía de este producto se basa en el uso y mantenimiento normales descritos en este manual. La garantía se invalida si el producto sufre cualquier daño causado por un uso indebido o falta de mantenimiento.
- Consulte los detalles técnicos y las limitaciones del andador en §6..

2.2. Instrucciones de seguridad y riesgos aplicables

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones

- Lea y siga las instrucciones contenidas en este manual. De no seguirlas, puede acabar lesionándose a sí mismo, o acabar rompiendo el producto.

Tener en cuenta las siguientes advertencias durante su utilización:

- Asegurarse de que no haya piedras u otros elementos que estén bloqueando las ruedas del andador.
- Asegurarse de que ambos frenos de estacionamiento estén echados antes de usar el andador para ponerse de pie. Una vez que el usuario se sienta cómodo y estable, pueden quitarse los frenos de estacionamiento.
- Mantener siempre ambas manos en las empuñaduras al andar con el andador.
- Téngase en cuenta que ciertas partes del andador pueden llegar a calentarse o enfriarse demasiado a causa de la temperatura ambiente, la luz del sol, equipos de calefacción, etc. Debe tener siempre cuidado al tocar el scooter.
- Comprobar que el ajuste de altura esté bien sujeto antes de cada uso, véase **§3.4.**
- No sujete las empuñaduras con las manos mojadas, ya que podría perder el equilibrio.
- No circular con el andador por la carretera, mantenerse siempre en la acera.
- Seguir las instrucciones de lavado y control. El fabricante no se hace responsable de daños ocasionados por un mal mantenimiento o una mala inspección.

Cualquier incidente grave [MDR (UE) 2017/745 §2 (65)] que se produzca en relación con el producto deberá comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario y/o paciente.

Tener en cuenta que su andador puede llegar a interferir con algunos sistemas antirrobo, dependiendo de la configuración que se use. Esto puede hacer que salte la alarma de las tiendas.

2.3. Símbolos presentes en el andador

i La placa de identificación está debajo de la empuñadura izquierda en la parte interior del bastidor base

	Peso máximo del usuario en kg
	Tipo de modelo
	Referencia
	Número de serie
	Dispositivo médico
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Declaración de conformidad
	Atención: información importante
	Se recomienda leer el manual

2.4. Entrega

Desembalar el producto y verificar que la entrega está completa. Las siguientes piezas vienen incluidas en la entrega:

- Bastidor base con asiento, sección delantera y trasera;
- Ruedas delanteras con soporte;
- Ruedas traseras con soporte y conexión del cable de los frenos;
- Empuñaduras con frenos
- Respaldo
- Bolsa de almacenamiento;
- Manual

Compruebe que el producto no haya sufrido daños durante el transporte. Si detectase algún defecto en el producto tras su entrega, contacte con el transportista.

2.5. Transporte y almacenamiento

El transporte y almacenamiento del andador debe llevarse a cabo según las especificaciones técnicas en §6.. Asegurarse de que el andador esté almacenado en un lugar seco.

Proteger el andador de la oxidación y materiales extraños (p. ej. agua salada, aire marino, arena, polvo) mediante una protección o un embalaje adecuado.

Asegurarse de que no haya otros objetos encima o apoyados en el andador durante el almacenamiento para prevenir daños.

3. Montaje/desmontaje y ajustes

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones

- Montar el andador completamente antes de ajustar su altura.

3.1. Montaje

3.1.1. Montaje de las ruedas delanteras y traseras

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída o volcado

- Siempre ajustar las cuatro ruedas a la misma altura.
 - Al montar las ruedas delanteras, asegúrese de que están instaladas en el lado correcto. Los ejes de las ruedas deben estar verticales, véase la ilustración.
-  Durante el montaje de las ruedas traseras, comprobar que la conexión del cable de freno **(4)** está posicionada en el lado interno del andador.
1. Colocar el andador delante/detrás.
 2. Pulsar el botón de resorte **(1)** en el soporte de la rueda.
 3. Deslizar el soporte de la rueda **(2)** en el tubo del bastidor **(3)** hasta que el botón de resorte salga por el agujero de ajuste deseado.
 4. Repetir estos pasos para las otras ruedas. Asegurarse de que las cuatro ruedas estén bien fijadas.



3.1.2. Montaje de las empuñaduras

1. Colocar el andador sobre sus cuatro ruedas. Asegurarse de que el andador esté en una posición estable.
2. Mantener pulsado el botón de resorte (5) en la empuñadura.
3. Deslizar la empuñadura en el tubo del bastidor (6) hasta que el botón de resorte salga por el agujero de ajuste deseado.
4. Repetir estos pasos para la segunda empuñadura. Asegurarse de que ambas empuñaduras estén bien aseguradas y de que estén ajustadas a la misma altura.
5. Insertar la perilla estrellada (7) en el orificio superior de cada lado para mayor rigidez.



Sujetacables

Para evitar que el cable se quede atrapado entre las piezas móviles del andador, asegurar el cable de freno al bastidor utilizando el sujetacables **(8)**.




3.1.3. Montaje de la bolsa de almacenamiento

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de caída o volcado

- No llenar la bolsa de almacenamiento demasiado.

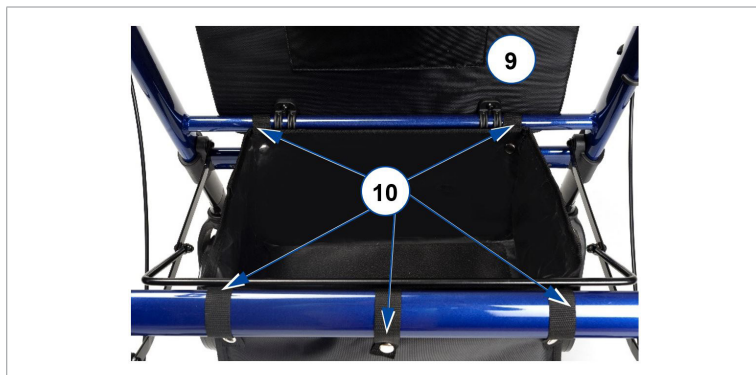

La capacidad de carga máxima de la bolsa de almacenamiento está descrita en §6..

La bolsa de almacenamiento debe montarse debajo del asiento, en los dos tubos horizontales en donde se coloca encima el asiento.

1. Desplegar el asiento **(9)** hacia arriba.
2. Montar la bolsa de almacenamiento en los tubos del bastidor con los cinco cierres a presión **(10)**.
3. Plegar otra vez el asiento hacia abajo.

3.1.4. Montar/Retirar el respaldo

Retirar

1. Girar los cierres a ambos lados del respaldo en la posición "Open" (abierto) [A] girando la palanca **(11)**.
2. Tirar hacia arriba del respaldo para retirarlo.



Montar

1. Asegurarse de que ambos cierres en ambos lados del respaldo estén en la posición "Open" (abierto) [A].
2. Deslizar los extremos del respaldo en el soporte **(12)**, lo más hacia abajo posible.
3. Girar los cierres a ambos lados del respaldo en la posición "Lock" (bloqueado) [B] girando la palanca **(11)**. ¡Asegurarse de que el respaldo esté bien fijado en su sitio antes de sentarse!



3.1.5. Posición de la empuñadura


⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- No exceder el rango máximo marcado en el soporte de la empuñadura.

La posición de las empuñaduras se puede ajustar de forma continua para adaptarse a las necesidades del usuario. Para facilitar el ajuste, se han marcado 5 posiciones en el soporte de la empuñadura (13).

1. Aflojar la palanca (14) por debajo del soporte de la axila.
2. Deslizar el tubo interno hacia delante/atrás hasta conseguir la posición deseada.
3. Apretar la palanca.
4. Repetir el proceso con la otra empuñadura y asegurarse de que las empuñaduras estén bien fijadas.

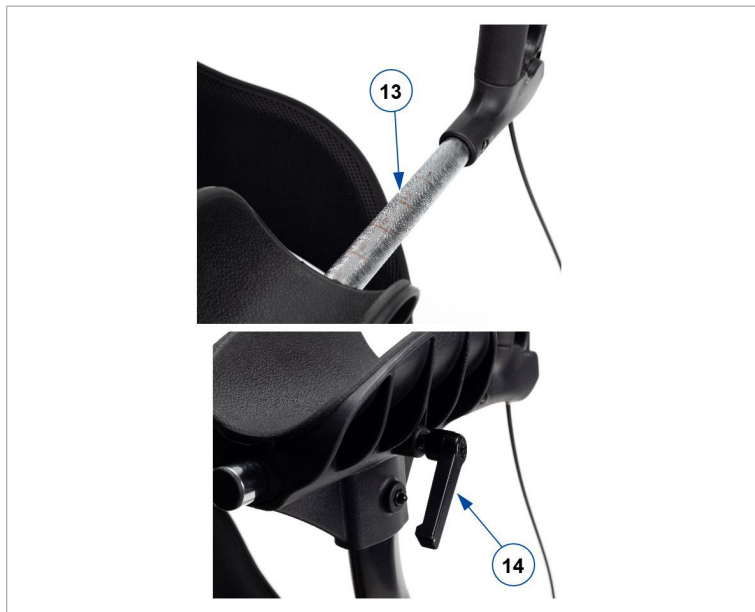

3.2. Desmontaje

PRECAUCIÓN

Riesgo de daños

- Prestar atención a la posición de los cables de los frenos. No levantar las empuñaduras demasiado alto para que no se dañe el cable de los frenos.

El desmontaje del andador se realizar en orden inverso del montaje descrito en la sección previa:

1. Bolsa de almacenamiento: Abrir los cierres a presión **(10)** y retirar la bolsa.
2. Sujetacables **(8)** (2x): Sacar con cuidado del tubo del bastidor.
3. Empuñadura con palanca de freno (2x): Mantener pulsado el botón de resorte **(5)** y tirar de la empuñadura para retirarla del bastidor.
4. Ruedas delanteras y traseras (4x): Mantener pulsado el botón de resorte **(1)** y tirar de la rueda para retirarla del bastidor.

3.3. Montaje del soporte del bastón (opcional)

1. Haga clic en la copa (15) en el soporte entregado con el chasis posterior.
2. Quite el tornillo (16) del chasis superior y coloque el tornillo que se entrega con el soporte de bastón en su lugar.
3. Coloque el clip con la tuerca en el otro lado del tronillo y apriete firmemente.



3.4. Ajustes de altura

- i** Para ajustar la altura del andador según el tamaño del cuerpo:
- Primero ajustar la altura del asiento.
 - Después ajustar la altura de ambas empuñaduras.

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de caída o volcado

- Siempre ajustar las cuatro ruedas a la misma altura.

Se puede cambiar la altura del andador ajustando las empuñaduras (6 posiciones, en escalones de 25 mm)

Se puede cambiar la altura del andador ajustando las empuñaduras (5 posiciones, en escalones de 25 mm).

Para ajustar cualquiera uno de ellos:

1. Mantener pulsado el botón de resorte.
2. Deslizar hacia arriba/abajo la rueda o empuñadura en el tubo del bastidor a la altura deseada hasta que el botón de resorte salga por el agujero de ajuste correspondiente.
3. Comprobar que el botón de resorte esté bien asegurado.
4. Inserte la perilla estrellada en el orificio superior para asegurar aún más la empuñadura.

Asegurarse de que

- ambas empuñaduras estén ajustadas a la misma altura.
- las 4 ruedas estén ajustadas a la misma altura.

4. Uso del andador

4.1. Sistema de frenado

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- Para garantizar su seguridad, controle el funcionamiento de los frenos. El estado del sistema de frenado se puede ver afectado por desgaste y la presencia de aceite o suciedad en las ruedas traseras y en el mecanismo de frenado.

El andador lleva frenos que se pueden manejar con las dos palancas de freno **(15)**. Las palancas de freno pueden usarse de dos maneras: como freno normal o como freno de estacionamiento.


PRECAUCIÓN

Riesgo de daños

- No empujar el andador demasiado fuerte mientras se usan los frenos normales. Esto puede ocasionar daños a las ruedas o los frenos.

Para usar el freno normal, tirar hacia arriba de ambas palancas de freno (15) a la vez [A] apretándolas. Para dejar de frenar, soltar las palancas de freno.

Para usar el freno de estacionamiento, tirar hacia abajo de ambas palancas de freno (15) hasta que queden bloqueadas [B]. Usar siempre ambos frenos de estacionamiento a la vez. Para salir de la posición de estacionamiento, tirar hacia arriba de ambas palancas de freno a la vez.

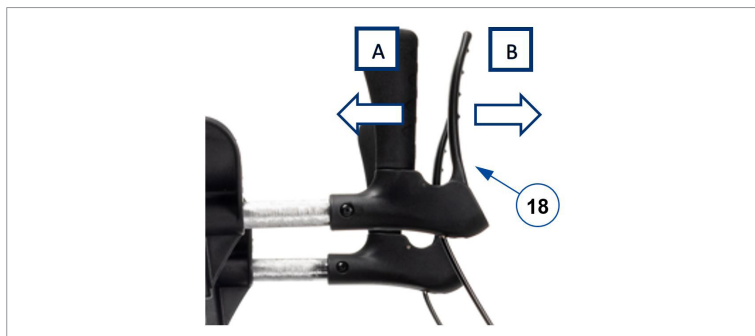

4.2. Plegado / Desplegado

PRECAUCIÓN

Riesgo de aprisionamiento

- Mantener dedos, correas, joyas y vestimentas fuera del mecanismo de plegado.

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- Comprobar que el andador está completamente desplegado y que el bastidor esté bloqueado.



4.2.1. Despliegue del andador

1. Tirar ambas palancas de freno hacia abajo en la posición de estacionamiento, véase §4.1..
2. Colocar el andador con las cuatro ruedas en el suelo mientras se sujetan los tubos del bastidor.
3. Separar los tubos delantero (18) y trasero (19), y empujar las barras del mecanismo de plegado (20) lo más hacia abajo posible. ¡Tener cuidado de no pillarse los dedos en el mecanismo!
4. Plegar el asiento hacia abajo.
5. Montar el respaldo, véase §3.1.4..

4.2.2. Plegado del andador


1. Colocarse detrás del andador.
2. Tirar ambas palancas de freno hacia abajo en la posición de estacionamiento, véase §4.1..
3. Girar el asiento hacia arriba.
4. Vaciar la bolsa de almacenamiento.
5. Tirar del bastidor del asiento (20) hacia arriba, para cerrar el bastidor un poco.
6. Cerrar el bastidor completamente empujando juntos los tubos delanteros y traseros.
7. Retirar el respaldo, véase §3.1.4..

4.3. Salvando bordillos

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- Salvar los bordillos de manera recta, con ambas ruedas alineadas con el bordillo. Mantener el andador cerca.

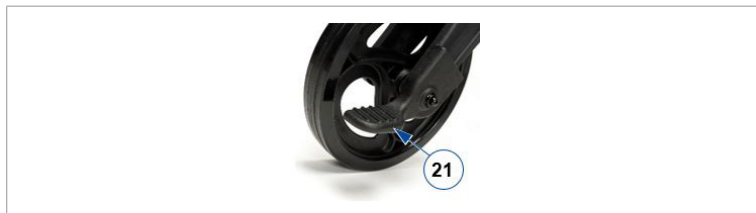

Para facilitar la toma de pequeños obstáculos, como los bordillos, el andador está equipado con una palanca de inclinación en las dos ruedas traseras.

1. Asegurarse de que se está posicionado de manera estable sujetando ambas empuñaduras.
2. Utilizar un pie para presionar la palanca de inclinación (21) para levantar las ruedas delanteras.
3. Mantener el andador en esa posición sujetando las empuñaduras y moverse lentamente hacia adelante hasta que las ruedas estén encima del bordillo.
4. Levantar las empuñaduras y moverse hacia delante para colocar las ruedas traseras encima del bordillo.
5. Cuando el andador esté en una posición estable, salvar el bordillo.

4.4. Sentarse, levantarse y caminar

PRECAUCIÓN

Riesgo de caída

- Asegurarse de que ambas palancas de freno están en la posición de estacionamiento antes de sentarse, véase §4.1.. Mantener las palancas de freno en esta posición hasta que vaya a volver a caminar. Mantener ambos pies entre las ruedas traseras.
- No propulse el andador mientras.

1. Tirar ambas palancas de freno hacia abajo en la posición de estacionamiento.
2. Comprobar que el respaldo y el asiento estén plegados y fijados en su sitio.
3. Apoyándose en las empuñaduras, darse la vuelta y sentarse en el asiento.
4. Para volver a levantarse, apoyarse en las empuñaduras y darse la vuelta.
5. Tirar de ambas palancas de freno hacia arriba y utilizar el freno normal.
6. Soltar las palancas de frenos y caminar hacia delante con el andador cerca del cuerpo.

5. Mantenimiento

- i** Un mantenimiento regular asegura que el andador permanezca en perfecto estado. Para consultar el manual de mantenimiento, visitar el sitio web de Vermeiren: www.vermeiren.com.

5.1. Limpieza

Utilizar un paño limpio y húmedo y agua templada con jabón doméstico suave para limpiar el andador. Evitar que las piezas se mojen demasiado. No utilice productos de limpieza abrasivos.

5.2. Desinfección

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de daños

- La desinfección sólo puede llevarla a cabo personal debidamente cualificado. Consultar con su distribuidor especializado al respecto.

Utilizar un paño limpio y húmedo y agua templada con desinfectante doméstico suave para limpiar el andador.

5.3. Inspección / Mantenimiento / Reparación

La vida útil esperada del andador es de 5 años. La vida útil del andador se ve afectada por su uso, almacenamiento, mantenimiento y limpieza.

Antes de utilizar el andador, deben comprobarse los siguientes puntos:

- Integridad.
- Mecanismo de plegado: funciona bien.
- Tornillos y tuercas: Atornillados firmemente.
- Frenos: funcionan bien.
- Ruedas (estabilidad, rotación, tornillos de sujeción).
- Si las ruedas entran regularmente en contacto con hilos, pelos y otras fibras, podrían llegar a atascarse. Por tanto, comprobar regularmente que las ruedas pueden girar libremente y que están en buen estado.
- Bastidor (deformaciones, estabilidad, conexiones).
- Empuñadura (un bloqueo seguro del ajuste máximo de altura, buen soporte de las empuñaduras).
- Asiento, cinta de respaldo y bolsa (desgaste y daños).

Su andador está construido con componentes de aluminio y plástico. Recomendamos que inspeccionen su andador al menos una vez al año, pero la frecuencia de los mantenimientos depende de la frecuencia e intensidad de uso. Consulte con su distribuidor especializado para llegar a un acuerdo sobre la frecuencia de mantenimiento.

Cualquier reparación o cambios sólo pueden llevarse a cabo por personal debidamente cualificado y sólo pueden utilizarse piezas de recambio Vermeiren originales.

No dude en hacer uso de los servicios ofrecidos por su distribuidor especializado, estará encantado de ayudarle con el mantenimiento y las reparaciones.

5.4. Reutilizar

Antes de cada reutilización, desinfecte, inspeccione y repare el andador de acuerdo a las instrucciones en **§5.2.** y **§5.3.**

5.5. Desechar el producto

Al final de la vida útil, deberá desechar el andador siguiendo las leyes medioambientales de su localidad. Para transportar materiales reciclables del andador de manera más cómoda, se recomienda que se desmonte primero.

6. Especificaciones técnicas

Los datos técnicos expuestos a continuación son sólo válidos para este andador, con configuración estándar y en condiciones ambientales óptimas. Tener en cuenta estos datos durante la utilización de la silla para ducha.

Marca	Vermeiren
Grupo de productos	Andador
Tipo	Goliat Artro
Descripción	Dimensiones
Peso máximo del usuario	200 kg
Peso de llenado máximo de la bolsa	5 kg
Longitud total	750 mm
Longitud plegado	400 mm
Anchura total	730 mm
Anchura plegada	730 mm
Altura total	1140 - 1310 mm
Altura plegada	1080 - 1280 mm
Altura de las empuñaduras	1140 - 1310 mm
Altura de usuario recomendada	1650 - 2000 mm
Distancia entre las empuñaduras	580 mm
Altura del asiento	490 - 560 mm
Anchura del asiento	470 mm
Profundidad del asiento	410 mm
Peso total	12,35 kg
- sin cesta	12 kg
Nos reservamos el derecho a aplicar modificaciones técnicas. Tolerancia de la medida +/- 15 mm/1,5 kg/1,5°	

Marca	Vermeiren
Grupo de productos	Andador
Tipo	Goliat Artro
Descripción	Dimensiones
Diámetro de las ruedas	200 x 30 mm
Frenos	Frenos normales y frenos de estacionamiento
Radio de giro	1050 mm
Temperatura de almacenamiento y de uso	+5°C - +41 °C
Humedad de almacenamiento y de uso	30% - 70%
Nos reservamos el derecho a aplicar modificaciones técnicas. Tolerancia de la medida +- 15 mm/1,5 kg/1,5°	

Spis treści

Wstęp	140
1. Twój produkt	142
2. Przed użyciem	143
2.1. Przewidziane zastosowanie i wskazania	143
2.2. Instrukcja bezpieczeństwa i związane z nimi zagrożenia	144
2.3. Symbole na balkoniku	145
2.4. Przy dostawie	146
2.5. Wysyłka i przechowywanie	146
3. Montaż/demontaż i regulacje	147
3.1. Montaż	147
3.2. Demontaż	152
3.3. Montaż uchwytu laski (opcjonalnie)	152
3.4. Regulacja wysokości	153
4. Korzystanie z balkonika	154
4.1. Hamulec	154
4.2. Składanie / Rozkładanie	155
4.3. Wjeżdżanie na krawężniki	157
4.4. Siadanie, wstawanie i chodzenie	157
5. Konserwacja	158
5.1. Czyszczenie	158
5.2. Dezynfekcja	158
5.3. Kontrole / serwisowanie / naprawy	158
5.4. Ponowne użycie	159
5.5. Usuwanie odpadów	159
6. Parametry techniczne	160

Wstęp

Gratulacje! Jesteś teraz właścicielem balkonika Vermeiren!

Dziękujemy za zaufanie firmie Vermeiren i jej produktom. Niniejsza instrukcja pomoże właścicielowi w eksploatacji balkonika i korzystaniu z jego opcji. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli ona na zapoznanie się z działaniem, możliwościami i ograniczeniami balkonika.

W razie pytań, na które odpowiedzi nie ma w instrukcji, prosimy o kontakt z Państwem wyspecjalizowanym sprzedawcą. Sprzedawca chętnie służy pomocą.

Ważna uwaga

Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydłużyć okres użytkowania produktu, prosimy o dbanie o niego oraz regularne dokonywanie przeglądów i serwisowanie.

Instrukcja obejmuje najnowsze rozwiązania zastosowane w produkcie. Firma Vermeiren ma prawo do wprowadzania zmian w produktach tego typu bez obowiązku adaptowania lub wymiany podobnych, poprzednio dostarczonych produktów.

Ilustracje produktu zamieszczone w instrukcji są wyłącznie poglądowe. Szczegóły prezentowanego produktu mogą się różnić od rzeczywistego produktu posiadanego przez użytkownika.

Dostępne informacje

W naszej witrynie internetowej <http://www.vermeiren.com/> zawsze znajduje się najnowsza wersja odpowiednich informacji. Prosimy regularnie odwiedzać witrynę, ponieważ możemy w niej zamieszczać zaktualizowane informacje.

Osoby z zaburzeniami wzroku mogą pobrać elektroniczną wersję niniejszej instrukcji i odsłuchać ją przy użyciu oprogramowania zamieniającego tekst na mowę.

	Instrukcja obsługi Dla użytkownika i wyspecjalizowanego sprzedawcy
	Podręcznik serwisowy dla balkoników Dla wyspecjalizowanego sprzedawcy
	Deklaracja zgodności WE

1. Twój produkt



1. Uchwyty
2. Dźwignia hamulca
3. Podtrzymywanie przedramion
4. Oparcie
5. Torba
6. Siedzisko
7. Przednie koła
8. Tylne koła
9. Linka hamulcowa
10. Dźwignia przechylania
11. Reflektory
12. Tabliczka znamionowa

2. Przed użyciem

2.1. Przewidziane zastosowanie i wskazania

- Ten produkt jest wyrobem medycznym.
- Wskazania i przeciwwskazania: Balkonik jest przeznaczony do wspomagania nóg podczas chodzenia i codziennych czynności. Dzięki podpórkom przedramienia jest szczególnie odpowiedni dla użytkowników cierpiących na upośledzenia ruchowe obejmujące ograniczone ruchy/równowagę, ale z wystarczająco zachowaną zdolnością chodzenia i koordynacją, gdy korzystanie ze standardowego rollatora nie jest możliwe z powodu upośledzonej funkcji rąk, a korzystanie z innych pomocy do chodzenia jest niewystarczające. Nie używaj balkonika, jeśli masz inne ograniczenia fizyczne, które mogą sprawiać, że używanie balkonika nie będzie bezpieczne, np. słabe ramię, zaburzenia równowagi, upośledzenie wzroku, utrata części ciała ...
- Balkonik został zaprojektowany i jest produkowany wyłącznie w celu używania jako pomoc przy chodzeniu dla jednej osoby o maksymalnej wadze 200 kg.
- Balkonik kompensuje brak odpowiedniego wsparcia przez nogi, dzięki możliwości oparcia się na balkoniku lub poruszania wraz z nimi, korzystając z siły rąk i klatki piersiowej. Balkonik zapewnia lepszą stabilność, wsparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.
- Można go używać w pomieszczeniach i na zewnątrz.
- Nie jest przeznaczony do transportu towarów ani większej liczby osób niż użytkownik. Nie jest on również przeznaczony do użytku jako pomoc w transporcie w pozycji siedzącej.
- Należy korzystać z niego tylko na powierzchniach, na których wszystkie cztery koła dotykają podłoża. Nie należy używać balkonika w terenie skalistym, wyboistym lub piaszczystym, ani w miejscach o stromym nachyleniu. Mogłoby to spowodować brak stabilności balkonika. Spacer z balkonikiem należy odbywać na płaskich, stabilnych powierzchniach z fazowanymi krawężnikami.
- Gwarancja na produkt jest udzielona przy założeniu normalnego użytkowania i konserwacji, opisanych w niniejszej instrukcji. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidłową eksploatacją lub brakiem konserwacji spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Należy zapoznać się z wszystkimi danymi technicznymi i ograniczeniami balkonika, które są podane w §6..

2.2. Instrukcja bezpieczeństwa i związane z nimi zagrożenia

UWAGA

Ryzyko obrażeń

- Należy przeczytać zalecenia podane w niniejszej instrukcji i postępować zgodnie z nimi. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować uraz lub uszkodzenie produktu.

Podczas użytkowania należy pamiętać o ostrzeżeniach ogólnych:

- Sprawdź, czy kamienie lub inne przedmioty nie blokują kół balkonika.
- Przed użyciem balkonika jako pomocy przy wstawianiu sprawdź, czy obie dźwignie hamulców są w położeniu postojowym. Kiedy staniesz wygodnie i stabilnie, możesz odblokować hamulce postojowe.
- Podczas chodzenia trzymaj obiema dłońmi za rączki.
- Pamiętaj, że niektóre części balkonika mogą stać się bardzo gorące lub zimne ze względu na temperaturę otoczenia, promieniowanie słoneczne, urządzenia grzewcze itp. Dotykając ich, należy zachować ostrożność.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy regulatory wysokości są pewnie unieruchomione, patrz **§3.4.**
- Nie trzymaj rączek mokrymi rękami. To mogłoby spowodować utratę pewności chwytu i równowagi.
- Nie zjeżdżaj balkonikiem na jezdnię. Zawsze pozostawaj na chodniku.
- Przestrzegaj instrukcji konserwacji i serwisu. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieprawidłowe serwisowanie/konserwację.

Każdy poważny incydent [MDR (UE) 2017/745 **§2 (65)**], który miał miejsce w związku z urządzeniem, powinien zostać zgłoszony wytwórcy oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

Korzystając z chodzika musisz być świadomym, że w zależności od użytych ustawień może on kolidować z niektórymi systemami antykradzieżowymi. Może to spowodować uruchomienie alarmu w sklepie.

2.3. Symbole na balkoniku

- i** Tabliczka identyfikacyjna znajduje się pod lewą rączką, po wewnętrznej stronie ramy głównej

	Maksymalna masa użytkownika w kg
	Oznaczenie typu
	Numer artykułu
	Numer seryjny
	Wyrób medyczny
	Producent
	Data produkcji
	Deklaracja zgodności
	Uwaga: ważna informacja
	Zaleca się przeczytanie instrukcji

2.4. Przy dostawie

Dostarczony produkt należy rozpakować i sprawdzić, czy zawiera wszystkie elementy. Powinny zostać dostarczone następujące elementy:

- Rama podstawy z siedziskiem, przednia i tylna sekcja;
- Koła przednie ze wspornikami;
- Koła tylne ze wspornikami i podłączeniem linki hamulca;
- Rączki z hamulcami
- Oparcie
- Torba.
- Instrukcja

Proszę sprawdzić wyrób pod kątem zniszczeń w transporcie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń po dostawie, należy się skontaktować z przewoźnikiem.

2.5. Wysyłka i przechowywanie

Transport i przechowywanie balkonika powinny się odbywać zgodnie z parametrami technicznymi w §6.. Upewnij się, że balkonik jest przechowywany w stanie suchym.

Należy zapewnić dostateczną osłonę lub opakowanie, aby chronić balkonik przed korozją i ciałami obcymi (np. morską wodą, morskim powietrzem, piaskiem, pyłem).

Należy zadbać o to, aby nad balkonikiem lub obok niego nie znajdowały się żadne przedmioty, które mogłyby go uszkodzić.

3. Montaż/demontaż i regulacje

UWAGA

Ryzyko obrażeń

- Złóż całkowicie balkonik, zanim wykonasz regulację wysokości.

3.1. Montaż

3.1.1. Montaż kół przednich i tylnych

UWAGA

Ryzyko upadku lub przewrócenia

- Wszystkie cztery koła zawsze ustawiaj tak, aby były na tej samej wysokości.
 - Podczas montażu przednich kół należy upewnić się, że są one zamontowane po właściwej stronie. Osie kół muszą być ustawione pionowo, patrz ilustracja.
-  Podczas montażu kół tylnych sprawdź, czy podłączenie linki hamulcowej **(4)** znajduje się od wewnątrz balkonika.
1. Postaw balkonik na przedniej/tylnej części.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ze sprężyną **(1)** na wsporniku koła.
 3. Wsuń wspornik koła **(2)** w rurę ramy **(3)**, aż przycisk ze sprężyną wysunie się przez żądany otwór regulacyjny.
 4. Powtórz z pozostałymi kołami. Upewnij się, czy wszystkie cztery koła są prawidłowo zamocowane.



3.1.2. Montaż rączek

1. Ustaw balkonik na czterech kołach. Upewnij się, że stoi stabilnie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ze sprężyną **(5)** na rączce.
3. Wsuń rączkę w rurę ramy **(6)**, aż przycisk ze sprężyną wysunie się przez żądany otwór regulacyjny.
4. Powtórz z drugą rączką. Upewnij się, że obie rączki są prawidłowo zamontowane i ustawione na tej samej wysokości.
5. Włóż gałkę gwiazdkową **(7)** w górny otwór po każdej stronie dla dodatkowej sztywności.



Uchwyty linek

Aby uniknąć sytuacji, w której linka zostaje pochwycona i przytrzaśnięta między ruchomymi częściami balkonika, przypiecz linkę hamulca do ramy za pomocą uchwyty linki **(8)**.




3.1.3. Montaż torby

⚠ UWAGA

Ryzyko upadku lub przewrócenia

- Nie przeładowuj torby.

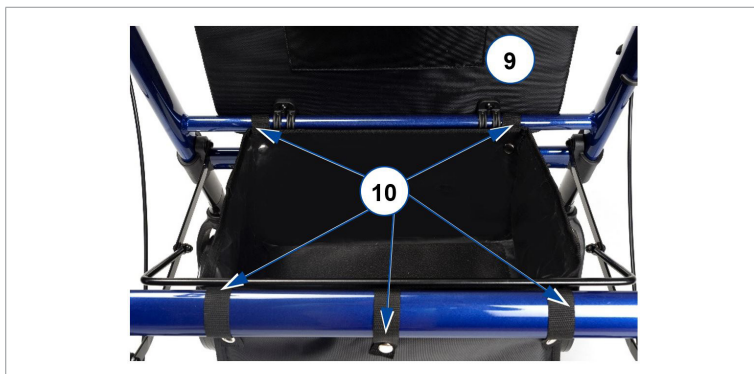

Maksymalne obciążenie torby jest podane w §6..

Torbę należy zamocować poniżej siedziska, na dwóch poziomych rurach, o które opiera się siedzisko.

1. Podnieś siedzisko (9).
2. Przymocuj torbę do ramy za pomocą pięciu zatrzasków (10).
3. Opuść siedzisko.

3.1.4. Montaż/demontaż oparcia

Zdejmowanie

1. Obróć blokady po obu stronach oparcia do położenia „otwarte” [A], obracając dźwignię **(11)**.
2. Wysuń oparcie w górę i je zdejmij.



Montaż

1. Upewnij się, że blokady po obu stronach oparcia są w położeniu „otwarte” [A].
2. Nasuń boki oparcia na wspornik **(12)**, w dół do oporu.
3. Ustaw blokady po obu stronach oparcia w położeniu „zamknięte” [B], obracając dźwignię **(11)**. Zanim usiądziesz, upewnij się, że oparcie jest mocno i prawidłowo przymocowane!



3.1.5. Pozycja uchwytu ręcznego

UWAGA

Ryzyko upadku

- Nie należy przekraczać maksymalnego zasięgu oznaczonego na uchwycie.

Pozycję uchwytów można płynnie dopasować do potrzeb użytkownika. W celu ułatwienia regulacji na wsporniku uchwytu oznaczono 5 pozycji **(13)**.

1. Poluzować dźwignię **(14)** znajdującą się pod wspornikiem pachowym.
2. Przesunąć handgrip do przodu/do tyłu, aż do uzyskania pożądanej pozycji.
3. Dokręcić dźwignię.
4. Powtórzyć dla drugiego uchwytu ręcznego i upewnić się, że wieszaki są dobrze zabezpieczone.



3.2. Demontaż

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia

- Zwróć uwagę na położenie linek hamulcowych. Nie podciągaj rączek zbyt wysoko, aby nie uszkodzić linki hamulcowej.

Demontaż balkonika wykonuje się w odwrotnej kolejności do montażu:

1. Torba: Otwórz zatrzaski **(10)** i wyjmij torbę.
2. Uchwyt linki **(8)** (2x): Ostrożnie ściągnij z rury ramy.
3. Rączka z dźwignią hamulca (2x): Naciśnij i przytrzymaj przycisk ze sprężyną **(5)** i wyciągnij rączkę z ramy.
4. Koła przednie i tylne (4x): Naciśnij i przytrzymaj przycisk ze sprężyną **(1)** i wyciągnij koło z ramy.

3.3. Montaż uchwytu laski (opcjonalnie)

1. Zatrzaśnij miseczkę **(15)** na przewidzianym wsporniku na dolnej tylnej ramie.
2. Wykręć śrubę **(16)** z górnej ramy i umieść na swoim miejscu śrubę dostarczoną z uchwytem laski.
3. Umieść zacisk z nakrętką po drugiej stronie śruby i mocno dokręć.



3.4. Regulacja wysokości

- i** Regulacja wysokości balkonika w zależności od rozmiaru nadwozia:
- Najpierw ustaw wysokość siedziska.
 - Następnie ustaw wysokość obu rączek:

UWAGA

Ryzyko upadku lub przewrócenia

- Wszystkie cztery koła zawsze ustawiaj tak, aby były na tej samej wysokości.

Można zmienić wysokość balkonika, odpowiednio ustawiając rączki (6 położeń, w krokach co 25 mm).

Można zmienić wysokość siedziska, odpowiednio ustawiając koła przednie i tylne (5 położeń, w krokach co 25 mm).

Aby wyregulować któryś z elementów:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ze sprężyną.
2. Przesuń koło lub rączkę w górę/w dół w rurze ramy na żadaną wysokość, aż przycisk ze sprężyną wysunie się przez odpowiedni otwór regulacyjny.
3. Upewnij się, że przycisk ze sprężyną jest dobrze zamocowany.
4. Włożyć gałkę gwiazdkową w górny otwór, aby dodatkowo zabezpieczyć uchwyt.

Upewnij się, że

- obie rączki są ustawione na tę samą wysokość;
- wszystkie 4 koła są ustawione na tę samą wysokość.

4. Korzystanie z balkonika

4.1. Hamulec

UWAGA

Ryzyko upadku

- Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, sprawdź działanie hamulców. Na stan układu hamulcowego wpływa jego zużycie, a także obecność oleju i innych zanieczyszczeń na tylnych kołach i w mechanizmie hamulcowym.

Balkonik jest wyposażony w hamulce sterowane za pomocą dwóch dźwigni hamulców (15). Dźwignie hamulców mogą być użyte do dwóch rodzajów hamowania – obsługi hamulców jezdnych i hamulców postojowych.


UWAGA

Ryzyko uszkodzenia

- Nie pchaj balkonika zbyt mocno, gdy są wciśnięte hamulce jezdne. To może powodować uszkodzenie opon lub hamulców.

Aby użyć hamulców jezdnych, pociągnij obie dźwignie hamulców (15) jednocześnie do góry [A] ruchem ściskającym. Aby przerwać hamowanie, zwolnij dźwignie hamulców.

Aby użyć hamulców postojowych, naciśnij obie dźwignie hamulców **(15)** w dół, do położenia zablokowanego [B]. Zawsze używaj obu hamulców postojowych na raz. Aby wyłączyć tryb postojowy, pociągnij obie dźwignie hamulców jednocześnie do góry.

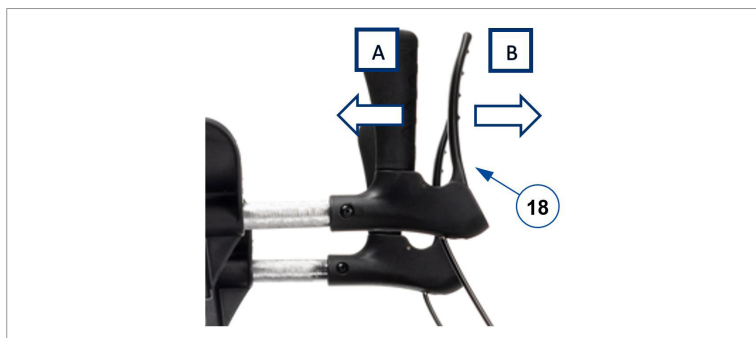

4.2. Składanie / Rozkładanie

UWAGA

Ryzyko przycięcia

- Nie zbliżać palców, klamer, biżuterii ani ubrań do mechanizmu składania.

UWAGA

Ryzyko upadku

- Sprawdź, czy balkonik jest w pełni otwarty i czy rama jest zablokowana.



4.2.1. Rozkładanie balkonika

1. Wciśnij obie dźwignie hamulców do położenia parkowania, patrz §4.1..
2. Ustaw balkonik wszystkimi czterema kołami na podłożu, jednocześnie trzymając rury ramy.
3. Pociągnij przednie (18) i tylne (19) rury ramy, odchylając je od siebie. Popchnij drążki mechanizmu składania (20) w dół do oporu. Uważaj, aby palce nie zostały pochwycone przez mechanizm!
4. Opuść siedzisko.
5. Zamontuj oparcie, patrz §3.1.4..

4.2.2. Składanie balkonika


1. Stań za balkonikiem.
2. Wciśnij obie dźwignie hamulców do położenia parkowania, patrz §4.1..
3. Obróć siedzisko do góry.
4. Opróżnij torbę.
5. Pociągnij ramę siedziska (20) do góry i trochę zamknij ramę.
6. Złóż ramę całkowicie, dociskając razem przednie i tylne rurki.
7. Zdemontuj oparcie, patrz §3.1.4..

4.3. Wjeżdżanie na krawężniki

⚠ UWAGA

Ryzyko upadku

- Wjeżdżaj na krawężniki prosto, z oboma kołami przednimi wyrównanymi wobec krawężnika. Utrzymuj balkonik w pobliżu.

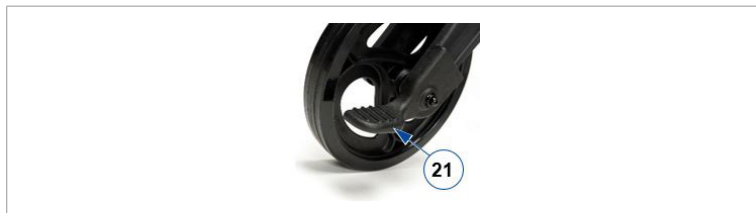

Aby uprościć pokonywanie małych przeszkód, takich jak krawężniki, rolator wyposażony jest w elementy pomocne w przechylaniu na dwóch tylnych kołach.

1. Upewnij się, że stoisz stabilnie i trzymasz obie rączki.
2. Aby podnieść przednie koła, naciśnij stopą dźwignię przechylania (21).
3. Trzymaj balkonik w tym położeniu za pomocą rączek i przesuwaj powoli do przodu, aż przednie koła znajdą się na krawężniku.
4. Teraz podnieś rączki i pójdz do przodu, aby ustawić tylne koła na krawężniku.
5. Gdy balkonik już stoi pewnie, możesz wejść na krawężnik.

4.4. Siadanie, wstawanie i chodzenie

⚠ UWAGA

Ryzyko upadku

- Zanim usiądziesz, sprawdź, czy obie dźwignie hamulców znajdują się w położeniu parkowania, patrz §4.1.. Dźwignie hamulców muszą pozostawać w tym położeniu, aż znowu zaczniesz chodzić. Ustaw stopy między dwoma kołami tylnymi.
- Nie należy napędzać chodzika w pozycji siedzącej.

1. Wciśnij obie dźwignie hamulców do położenia parkowania.
2. Sprawdź, czy oparcie i siedzisko są opuszczone i zabezpieczone w odpowiednim położeniu.

3. Opierając się na rączkach, obróć się i usiądź na siedzisku.
4. Aby znowu wstać, oprzyj się na rączkach i obróć.
5. Podciągnij obie dźwignie hamulców do góry i użyj hamulców jezdnych.
6. Zwolnij dźwignie hamulców i zrób krok naprzód, z balkonikiem blisko ciała.

5. Konserwacja

i Regularna konserwacja zapewnia utrzymanie pełnej sprawności balonika. Instrukcję konserwacji można znaleźć w witrynie Vermeiren: www.vermeiren.com.

5.1. Czyszczenie

Do mycia balkonika używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki i letniej wody z dodatkiem łagodnego, domowego mydła. Nie dopuszczaj do długotrwałego namaczania. Do czyszczenia nie używaj ściernych środków czyszczących.

5.2. Dezynfekcja

⚠ UWAGA

Ryzyko uszkodzenia

- Dezynfekcja może być przeprowadzana tylko przez przeszkolone osoby. Skonsultować się ze specjalistycznym dystrybutorem.

Do mycia łóżka używać miękkiej, wilgotnej ściereczki i letniej wody z delikatnym mydłem.

5.3. Kontrole / serwisowanie / naprawy

Oczekiwany okres użytkowania balkonika wynosi 5 lat. Trwałość balkonika jest zależna od jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, serwisowania i czyszczenia.

Przed ponownym użyciem balkonika, należy sprawdzić następujące punkty:

- Kompletność.
- Mechanizm składania: czy działa prawidłowo.
- Śruby i nakrętki: mocno dokręcone.
- Hamulce: prawidłowe działanie.
- Koła (stabilność, skręcanie w żądanym kierunku, śruby ustalające).
- W przypadku powtarzającego się kontaktu z drutami, włosami lub innymi pozostałościami, koła mogą zostać zablokowane. Należy regularnie sprawdzać, czy koła obracają się swobodnie i czy są w dobrym stanie;
- Rama (odkształcenia, stabilność, połączenia);
- Uchwyty (bezpieczne blokowanie systemu regulacji wysokości, solidne wsparcie uchwytów).
- Siedzisko, oparcie i torba (sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia).

Rolator skonstruowany jest z aluminiowych i plastikowych elementów. Zalecamy, aby kontrolować produkt co najmniej raz na rok. Częstotliwość serwisowania zależy jednak od częstości i intensywności eksploatacji. Należy się skonsultować z wyspecjalizowanym sprzedawcą w celu uzgodnienia częstotliwości serwisu.

Naprawa i wymiana części mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Vermeiren.

Warto korzystać z usług oferowanych przez wyspecjalizowanego sprzedawcę. On/ona chętnie udzieli pomocy w zakresie serwisu i napraw.

5.4. Ponowne użycie

Przed każdym ponownym użyciem rolkę należy zdezynfekować, skontrolować i poddać konserwacji zgodnie z instrukcjami w **§5.2.** i **§5.3.**.

5.5. Usuwanie odpadów

Po zakończeniu użytkowania należy poddać balkonik utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Najlepszym sposobem, aby to zrobić jest demontaż balkonu, w celu ułatwienia transportu części nadających się do przetworzenia.

6. Parametry techniczne

Parametry techniczne zamieszczone poniżej dotyczą tylko tego balkonika, przy standardowych ustawieniach i optymalnych warunkach otoczenia. Podczas użytkowania należy uwzględnić te dane.

Marka	Vermeiren
Grupa produktów	Balkonik
Typ	Goliat Artro
Opis	Wymiary
Maksymalna waga użytkownik	200 kg
Maksymalna waga ładunku w torbie	5 kg
Długość całkowita	750 mm
Długość po złożeniu	400 mm
Łączna szerokość	730 mm
Szerokość po złożeniu	730 mm
Łączna wysokość	1140 - 1310 mm
Wysokość po złożeniu	1080 - 1280 mm
Wysokość rączek	1140 - 1310 mm
Zalecana wysokość ciała	1650 - 2000 mm
Odległość między uchwytami	580 mm
Wysokość siedziska	490 - 560 mm
Szerokość siedziska	470 mm
Głębokość siedziska	410 mm
Ciężar całkowity - bez koszyka	12,35 kg 12 kg
Średnica koła	200 x 30 mm
Hamulce	Hamulce jezdne i postojowe
Promień skrętu	1050 mm
Temperatura przechowywania i użytkowania	+5°C - +41°C
Wilgotność powietrza do przechowywania i użytkowania	30% - 70%
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych. Tolerancja pomiarów +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Předmluva	162
1. Tento výrobek	164
2. Před použitím	165
2.1. Určené použití a indikace	165
2.2. Bezpečnostní pokyny a příslušná rizika	166
2.3. Symboly na chodítku	167
2.4. Při dodávce	168
2.5. Přeprava a skladování	168
3. Montáž/demontáž a nastavení	169
3.1. Montáž	169
3.2. Rozložení	174
3.3. Montáž držáku vycházkové hole (volitelně)	174
3.4. Nastavení výšek	175
4. Použití chodítka	176
4.1. Brzdový systém	176
4.2. Složení a rozložení	177
4.3. Přejíždění obrubníků	179
4.4. Posazení, zvednutí se a chození	179
5. Údržba	180
5.1. Čištění	180
5.2. Dezinfekce	180
5.3. Kontrola / servis / opravy	180
5.4. Znovupoužití výrobku	181
5.5. Likvidace	181
6. Technické údaje	182

Předmluva

Blahopřejeme! Nyní jste vlastníkem chodítka Vermeiren!

Děkujeme za vaši důvěru ve výrobky společnosti Vermeiren. Tento návod slouží k tomu, aby vám pomáhal s použitím tohoto chodítka a jeho provozních možností. Řádně si jej přečtěte; pomůže vám seznámit se s provozem, schopnostmi a omezeními tohoto chodítka.

Máte-li po přečtení tohoto návodu nějaké dotazy, obraťte se bez obav na svého odborného prodejce. Rád vám pomůže.

Důležitá poznámka

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a prodloužena životnost tohoto výrobku, věnujte mu řádnou péči a nechávejte jej pravidelně kontrolovat a opravovat.

Tento návod obsahuje nejnovější verzi produktu. Společnost Vermeiren má právo provádět změny tohoto typu výrobku, aniž by byla povinna upravit nebo nahradit podobné výrobky, které již byly dodány.

Obrázky výrobku slouží pouze k upřesnění pokynů. Detaily výrobku na obrázcích se mohou od daného výrobku lišit.

Dostupné informace

Nejnovější verzi následujících informací vždy naleznete na našich webových stránkách <http://www.vermeiren.com/>. Tyto webové stránky pravidelně navštěvujte pro případné aktualizace.

Osoby se zrakovým postižením si mohou stáhnout elektronickou verzi tohoto návodu, kterou jim může přečíst softwarová aplikace text-to-speech.

	Návod k obsluze Pro uživatele a odborného prodejce
	Servisní příručka pro chodítka Pro odborného prodejce
	Prohlášení o shodě (ES)

1. Tento výrobek



1. Madla
2. Brzdová páka
3. Podpěra předloktí
4. Zádová opěrka
5. Úložná taška
6. Sedadlo
7. Přední kola
8. Zadní kola
9. Brzdový kabel
10. Zvedací páka
11. Reflektory
12. Identifikační štítek

2. Před použitím

2.1. Určené použití a indikace

- Tento výrobek je zdravotnický zařízení.
- Indikace a kontraindikace: Chodítko je určeno jako podpora funkce nohou při chůzi a každodenních činnostech. S podpažními podpěrami je speciálně vhodný pro uživatele trpící poruchami pohyblivosti zahrnujícími omezení pohybu/rovnováhy, ale s dostatečně zachovanou schopností chůze a koordinace, kdy použití standardního rollatoru není možné z důvodu zhoršené funkce rukou a použití jiných pomůcek pro chůzi je nedostatečné. Nepoužívejte chodítko, máte-li jiná fyzická omezení, jež mohou způsobit jeho nebezpečné použití, jako jsou slabé ruce, poruchy rovnováhy, zhoršené vidění, ztráta končetin apod.
- Chodítko je navrženo a vyrobeno výhradně k použití jako pomůcka při chůzi pro jednu osobu o maximální váze 200 kg.
- Chodítko kompenzuje absenci přiměřené podpory nohou tím, že se osoba opírá o chodítko či pohybuje s ním pomocí horních končetin nebo hrudníku. Chodítko poskytuje lepší stabilitu, podporu a bezpečnost při chůzi.
- Chodítko lze používat doma i venku.
- Není určeno pro přepravu zboží anebo více lidí než jednoho uživatele. Není také určen k použití jako přepravní pomůcka vsedě.
- Smí se používat pouze na povrchu, kde se všechna čtyři kola dotýkají země. Chodítko nepoužívejte na skalnatém, nerovném či písčitém povrchu nebo na strmých místech. Chodítko může být nestabilní. Pro chůzi s chodítkem hledejte rovné stabilní plochy a zkosené obrubníky.
- Záruka na tento výrobek je založena na běžném použití a údržbě, jak je to popsáno v tomto návodu. V případě poškození výrobku způsobeného nesprávným použitím či absencí údržby tato záruka zanikne.
- Ověřte si všechny technické detaily a omezení chodítka v odst 6..

2.2. Bezpečnostní pokyny a příslušná rizika

POZOR

Riziko zranění

- Přečtěte si pokyny v tomto návodu a postupujte podle nich. Jinak se můžete zranit nebo se váš výrobek může poškodit.

Při použití mějte na paměti následující obecná upozornění:

- Ověřte, zda kamínky či jiné předměty neblokují kola chodítka.
- Než použijete chodítko jako pomůcku k postavení se ujistěte, že jsou obě brzdové páčky v režimu parkování. Jakmile se pohodlně a stabilně postavíte, můžete parkovací brzdy odblokovat.
- Během chůze mějte obě ruce stále na rukojetích.
- Mějte na paměti, že některé části chodítka mohou být velmi teplé či studené vlivem okolní teploty, slunečního záření, topných těles atd. Buďte opatrní při dotýkání.
- Před každým použitím ověřte, zda jsou nastavení výšek řádně zajištěna, viz odst. **3.4.**
- Nedržte se rukojetí mokřýma rukama. Jinak může dojít k uklouznutí úchopu a ztrátě vaší rovnováhy.
- Nechodte s chodítkem v silničním provozu. Chodte vždy po chodníku.
- Dbejte na pokyny týkající se údržby a servisu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným servisem / péčí o výrobek.

Jákýkoli závažný incident [MDR (EU) 2017/745 §2 (65)], k němuž došlo ve spojitosti s tímto zařízením, musí být oznámen jeho výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel anebo pacient etablován.

Mějte na paměti, že chodítko může rušit některé typy systémů proti krádeži v závislosti na použitém nastavení. To může způsobit spuštění alarmu v obchodu.

2.3. Symboly na chodítku

i Identifikační štítek se nachází pod levou rukojetí na vnitřní straně základního rámu

	Max. hmotnost uživatele v kg
	Typové označení
	Katalogové číslo
	Sériové číslo
	Zdravotnické zařízení
	Výrobce
	Datum výroby
	Prohlášení o shodě
	Pozor: důležité informace
	Doporučení prostudovat příručku

2.4. Při dodávce

Rozbalte výrobek a ověřte, zda jde o kompletní dodávku. Musí obsahovat následující položky:

- Základní rám se sedadlem, přední a zadní část;
- Přední kola s podpěrrou;
- Zadní kola s podpěrrou a připojení brzdového kabelu;
- Rukojeti s brzdami
- Zádová opěrka
- Úložnou tašku;
- Návod

Ověřte, zda výrobek nebyl poškozen přepravou. Zjistíte-li po dodání jakékoli škody, obraťte se na dopravce.

2.5. Přeprava a skladování

Při přepravě a skladování chodítka postupujte podle technických specifikací v odst. 6.. Ověřte, že bude chodítko skladováno v suchu.

Chodítko dostatečně zakryjte pro ochranu před korozí a cizími tělesy (např. slaná voda, mořský vzduch, písek, prach).

Aby se chodítko nepoškodilo, ověřte, že na něm nejsou skladovány ani o něj opřeny žádné předměty.

3. Montáž/demontáž a nastavení

⚠ POZOR

Riziko zranění

- Před nastavením výšky chodítka jej kompletně sestavte.

3.1. Montáž

3.1.1. Montáž předních a zadních kol

⚠ POZOR

Riziko pádu nebo překlpení

- Všechna čtyři kola vždy nastavujte na stejnou výšku.
- Při montáži předních kol dbejte na to, aby byla namontována na správné straně. Osy kol musí být svislé, viz obrázek.

i Při montáži zadních kol zkontrolujte, že se připojení brzdového kabelu **(4)** nachází uvnitř chodítka.

1. Postavte chodítko na přední/zadní stranu.
2. Stiskněte a podržte pružinové tlačítko **(1)** na podpěře kola.
3. Zasunujte podpěru kola **(2)** do trubky rámu **(3)**, až vyskočí pružinové tlačítko z požadovaného nastavovacího otvoru.
4. Opakujte u ostatních kol. Zkontrolujte, že jsou všechna čtyři kola správně zajištěna.



3.1.2. Montáž rukojeti

1. Chodítko postavte na všechna čtyři kola. Zkontrolujte, že stojí stabilně.
2. Stiskněte a podržte pružinové tlačítko **(5)** na rukojeti.
3. Zasunujte rukojeť do trubky rámu **(6)**, až pružinové tlačítko vyskočí z požadovaného nastavovacího otvoru.
4. Opakujte s druhou rukojetí. Zkontrolujte, že jsou obě rukojeti správně zajištěny a že jsou nastaveny na stejnou výšku.
5. Do horního otvoru na každé straně vložte hvězdicový knoflík **(7)**, který zajistí větší pevnost.



Kabelové svorky

Aby se kabel nezachytil mezi pohyblivé součástky chodítka, připevněte brzdový kabel k rámu kabelovou svorkou **(8)**.




3.1.3. Montáž úložné tašky

⚠ POZOR

Riziko pádu nebo překlolení

- Nákupní tašku nepřeplyňte.

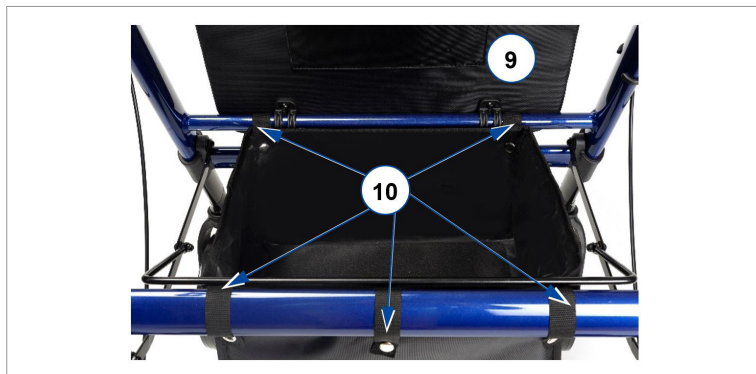

Maximální nosnost úložné tašky naleznete v §6..

Úložná taška je určena k upevnění pod sedadlo na dvě vodorovné trubky, na nichž spočívá sedadlo.

1. Vyklopte sedadlo **(9)**.
2. Pomocí pěti úchytů **(10)** připevněte úložnou tašku na trubky rámu.
3. Sedadlo znovu sklopte dolů.

3.1.4. Montáž/demontáž opěrky zad

Demontáž

1. Otočením přepínače **(11)** nastavte zámky na obou stranách opěrky zad do „otevřené“ polohy [A].
2. Vysuňte opěrku zad nahoru a vyjměte ji.



Montáž

1. Zkontrolujte, že se zámky na obou stranách opěrky zad nachází v „otevřené“ poloze [A].
2. Strany opěrky zad posuňte na podpěře (12) co nejvíc dolů.
3. Otočením přepínače (11) nastavte zámky na obou stranách opěrky zad do polohy „zamčeno“ [B]. Před usednutím zkontrolujte, že je opěrka zad dobře zajištěna!



3.1.5. Poloha rukojeti


⚠ POZOR

Nebezpečí pádu

- Nepřekračujte maximální rozsah vyznačený na podpěře rukojeti.

Polohu rukojetí lze plynule nastavit podle potřeb uživatele. Pro usnadnění nastavení je na podpěře rukojeti vyznačeno 5 poloh **(13)**.

1. Uvolněte páčku **(14)** pod opěrkou podpaží.
2. Posouvajte rukojeť dopředu/dozadu až do požadované polohy.
3. Utáhněte páčku.
4. Postup opakujte pro druhou rukojeť a ujistěte se, že jsou závěsy dobře zajištěny.

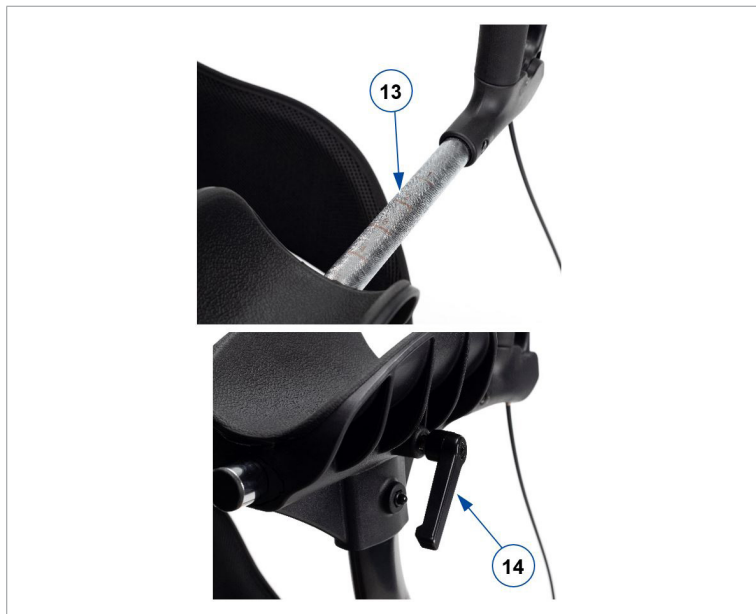

3.2. Rozložení

POZOR

Riziko poškození

- Věnujte pozornost poloze brzdových kabelů. Nevytahujte rukojeti příliš vysoko, aby nedošlo k poškození brzdového kabelu.

Rozložení chodítka se provádí v opačném pořadí, než je jeho sestavení:

1. Úložná taška: Rozdělejte úchytky **(10)** a vyjměte tašku.
2. Kabelová svorka **(8)** (2x): Opatrně vytáhněte z trubky rámu.
3. Rukojeť s pákou brzdy (2x): Stiskněte a podržte pružinové tlačítko **(5)** a vytáhněte rukojeť z rámu.
4. Přední a zadní kola (4x): Stiskněte a podržte pružinové tlačítko **(1)** a vytáhněte kolo z rámu.

3.3. Montáž držáku vycházkové hole (volitelně)

1. Nasadte miskou **(15)** na připravenou podpěru na spodním zadním rámu.
2. Vyšroubujte šroub **(16)** z horního rámu a vložte šroub, který je dodáván s držákem vycházkové hole.
3. Umístěte podložku s maticí na druhou stranu šroubu a pevně ji utáhněte.



3.4. Nastavení výšek

i Nastavení výšky chodítka podle velikosti těla:

- Nejprve nastavte výšku sedadla.
- Potom nastavte výšku obou rukojetí.

⚠ POZOR

Riziko pádu nebo překlolení

- Všechna čtyři kola vždy nastavujte na stejnou výšku.

U chodítka můžete nastavovat výšku seřízením rukojetí (6 poloh v krocích po 25 mm)

Sedadlo lze výškově nastavovat seřízením předních a zadních kol (5 poloh v krocích po 25 mm).

Při nastavování obou těchto možností:

1. Stiskněte a přidržte pružinové tlačítko.
2. Posunujte kolo nebo rukojeť nahoru/dolů v trubce rámu na požadovanou výšku, až pružinové tlačítko vyskočí z příslušného otvoru nastavení.
3. Zkontrolujte správné zajištění pružinového tlačítka.
4. Vložte hvězdicový knoflík do horního otvoru pro dodatečné zajištění rukojeti.

Zkontrolujte, že

- jsou obě rukojeti nastaveny na stejnou výšku.
- jsou na stejnou výšku nastavena všechna 4 kola.

4. Použití chodítka

4.1. Brzdový systém

POZOR

Nebezpečí pádu

- Pro zajištění bezpečnosti zkontrolujte funkci brzd. Stav brzdového systému ovlivňuje opotřebení, olej a jiné znečištění zadních kol a brzdného mechanismu.

Chodítko je vybaveno brzdami ovládanými dvěma brzdovými pákami **(15)**. Brzdové páčky lze používat ve dvou brzdných režimech: jízdní brzdy a parkovací brzdy.


POZOR

Riziko poškození

- Při použití jízdních brzd na chodítko příliš netlačte. Jinak dojde k poškození pneumatik či brzd.

Chcete-li použít jízdní brzdy, vytáhněte obě brzdové páčky **(15)** zároveň nahoru [A] mačkovým pohybem. Pro ukončení brždění uvolněte brzdové páky.

Chcete-li použít parkovací brzdy, stiskněte obě brzdové páčky **(15)** dolů do zamknuté polohy [B]. Vždy použijte obě parkovací brzdy současně. Pro ukončení režimu parkování vytáhněte obě brzdové páky zároveň nahoru.

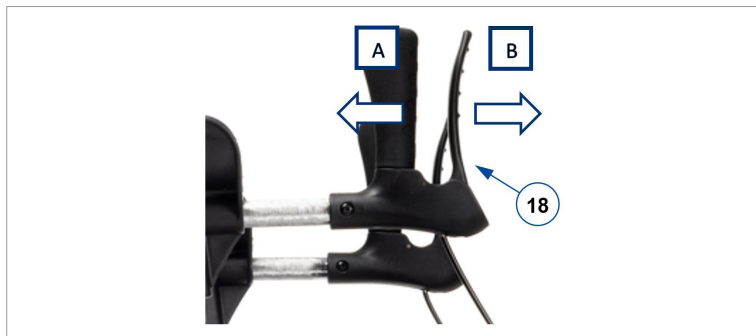

4.2. Složení a rozložení

⚠ POZOR

Nebezpečí skřípnutí

- Mějte prsty, přezky, šperky a oděvy vždy mimo skládací mechanismus.

⚠ POZOR

Nebezpečí pádu

- Zkontrolujte, zda je chodítko zcela rozevřeno a jeho rám uzamknut.



4.2.1. Rozložení chodítka

1. Stiskněte obě brzdové páčky dolů do parkovací polohy, viz §4.1..
2. Chodítko postavte na zem na všechna čtyři kola a současně držte trubky rámu.
3. Vytáhněte přední (18) a zadní (19) trubky rámu a co nejvíc zatlačte na tyče sklápěcího mechanismu (20) dolů. Dávejte pozor, aby se vám do mechanismu nezachytily prsty!
4. Sklopte sedadlo.
5. Montáž opěrky zad viz §3.1.4..

4.2.2. Složení chodítka


1. Postavte se za chodítko.
2. Stiskněte obě brzdové páčky dolů do parkovací polohy, viz §4.1..
3. Otočte sedadlo nahoru.
4. Vyprázdněte úložnou tašku.
5. Vytažením rámu sedadla (20) nahoru rám trochu zavřete.
6. Sevřením předních a zadních trubek dohromady rám zcela zavřete.
7. Demontáž opěrky zad viz §3.1.4..

4.3. Přejíždění obrubníků

POZOR

Nebezpečí pádu

- Na obrubník jezděte kolmo, oběma předními koly zároveň. Mějte chodítko těsně u těla.

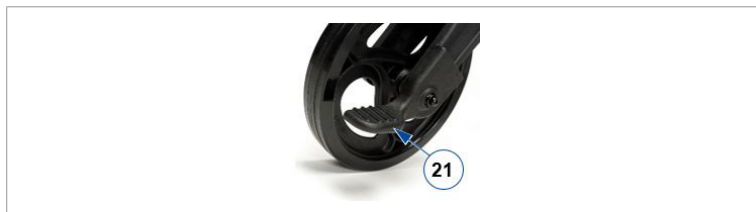

Pro snadnější zdolávání malých překážek, jako jsou obrubníky, je chodítko vybaveno naklápěcí pomůckou na dvou zadních kolech.

- Zajistěte, abyste stáli stabilně a přitom drželi obě rukojeti.
- Jednou nohou šlápněte na zvedací páku **(21)** a tím zvedněte přední kola.
- Udržujte chodítko v této poloze pomocí rukojetí a pomalu jděte dopředu, až se přední kola dostanou na obrubník.
- Nyní zvednutím rukojetí a pohybem dopředu dostaňte na obrubník i zadní kola.
- Když stojí chodítko stabilně, můžete přejít na obrubník i vy.

4.4. Posazení, zvednutí se a chození

POZOR

Nebezpečí pádu

- Před posazením ověřte, že jsou obě brzdové páčky v parkovací poloze, viz **§4.1.** Nechte brzdové páčky v této poloze, dokud nezačnete znovu chodit. Nohama pohybujte mezi zadními koly.
 - Nepohánějte chodítko vsedě.
- Stiskněte obě brzdové páčky dolů do parkovací polohy.
 - Ověřte, zda jsou opěradlo a sedadlo otočeny dolů a zajištěny na místě.
 - Zatímco se opíráte o rukojeti, otočte se a posad'te se na sedadlo.
 - Chcete-li se znovu postavit, opřete se o rukojeti a otočte se.

5. Pro použití jízdních brzd vytáhněte obě brzdové páčky nahoru.
6. Uvolněte brzdové páčky, jděte dopředu a mějte přitom chodítko těsně u těla.

5. Údržba

- i** Pravidelná péče zajistí, že bude chodítko udržováno v dokonale funkčním stavu. Návod k údržbě naleznete na webových stránkách společnosti Vermeiren: www.vermeiren.com.

5.1. Čištění

K čištění chodítka použijte měkký vlhký hadřík a vlažnou vodu s jemným mýdlem pro domácí účely. Předcházejte namočení. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

5.2. Dezinfekce

POZOR

Riziko poškození

- Dezinfekci mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Poradte se se svým prodejcem.

K čištění chodidla použijte měkký navlhčený hadřík a vlažnou vodu s jemným dezinfekčním prostředkem pro domácnost.

5.3. Kontrola / servis / opravy

Předpokládaná životnost vašeho chodítka je 5 let. Životnost chodítka je ovlivněna jeho používáním, skladováním, údržbou, servisem a čištěním.

Před opětovným použitím chodítka je třeba zkontrolovat následující body:

- Kompletnost.
- Skládací mechanismus: správná funkce.
- Šrouby a matice: pevně dotažené.

- Brzdy: správná funkčnost.
- Kola (stabilita, vedení stopy, upevňovací šrouby).
- V případě pravidelného kontaktu s drátky, vlasy či jinými nečistotami se mohou kola zablokovat. Pravidelně kontrolujte, zda se kola volně otáčejí a zda jsou v dobrém stavu.
- Rám (deformace, stabilita, připojení).
- Rukojeť (bezpečné zamknutí systému nastavení výšky, dobrá podpora rukojetí).
- Sedadlo, opěradlo a úložná taška (opotřebení či poškození).

Váše chodítko je vyrobeno z hliníkových a plastových součástí. Doporučujeme, abyste nechali výrobek zkontrolovat alespoň jednou ročně. Četnost servisu však závisí na frekvenci a intenzitě použití výrobku. Poradte se s odborným prodejcem a dohodněte vhodné servisní intervaly.

Opravy a výměny směřjí provádět pouze vyškolené osoby. Přitom je třeba používat pouze originální náhradní díly společnosti Vermeiren.

Využívejte služby nabízené vašim specializovaným prodejcem. Bude velmi rád, když vám pomůže s jakýmkoli servisem a opravami.

5.4. Znovupoužití výrobku

Před každým dalším použitím nechte chodítko dezinfikovat, zkontrolovat a opravit podle pokynů v odst. 5.2. a odst. 5.3..

5.5. Likvidace

Po skončení životnosti musí být chodítko zlikvidováno podle místní legislativy pro životní prostředí. Nejlepším způsobem likvidace je rozebrání chodítka pro usnadnění přepravy recyklovatelných součástí.

6. Technické údaje

Technické údaje uvedené níže platí pouze pro toto lůžko při standardních nastaveních a optimálních podmínkách okolí. Během používání berte tyto údaje v úvahu.

Značka	Vermeiren
Skupina produktů	Chodítko
Typ	Goliat Artro
Popis	Rozměry
Hmotnost uživatele	200 kg
Maximální váha obsahu tašky	5 kg
Celková délka	750 mm
Délka ve složeném stavu	400 mm
Celková šířka	730 mm
Šířka při složení	730 mm
Celková výška	1140 - 1310 mm
Složená výška	1080 - 1280 mm
Výška rukojetí	1140 - 1310 mm
Doporučená výška těla	1650 - 2000 mm
Vzdálenost mezi rukojeťmi	580 mm
Výška sedadla	490 - 560 mm
Šířka sedadla	470 mm
Hloubka sedadla	410 mm
Celková hmotnost - bez košíku	12,35 kg 12 kg
Průměr zadního kola	200 x 30 mm
Brzdy	Jízdní a parkovací brzdy
Šířka otáčení	1050 mm
Teplota skladování a používání	+5°C - +41°C
Vlhkost při skladování a používání	30% - 70%
Právo na technické změny vyhrazeno. Tolerované odchylky +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

**Service registration form**

This product (name):

was inspected (I), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:



VERMEIREN GROUP

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Belgium

www.vermeiren.com

Version: D, 2025-01

Basic UDI-DI: 5415174120606GoliatArtr9A

All rights reserved, including translation.

VERMEIREN
we care **for** you