

Alya

Taille compacte



Taille compacte pour le transport

L'Alya est un scooter compact et pliant. Facile à transporter, il permet à son utilisateur de l'utiliser à tout endroit et à tout moment. Avec son rayon d'action important, l'Alya sera aussi utile à l'intérieur qu'à l'extérieur.



- Colonne de direction télescopique
- Indicateur de batterie facile à lire
- Clé

Siège pliant pour un transport facile



Modèle argent avec batteries de 17,4 Ah

- Batteries lithium ION amovibles
- Support pour les pieds



Modèle rouge avec batteries de 11,6 Ah



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

Pour plus de mobilité

Caractéristiques techniques Alya


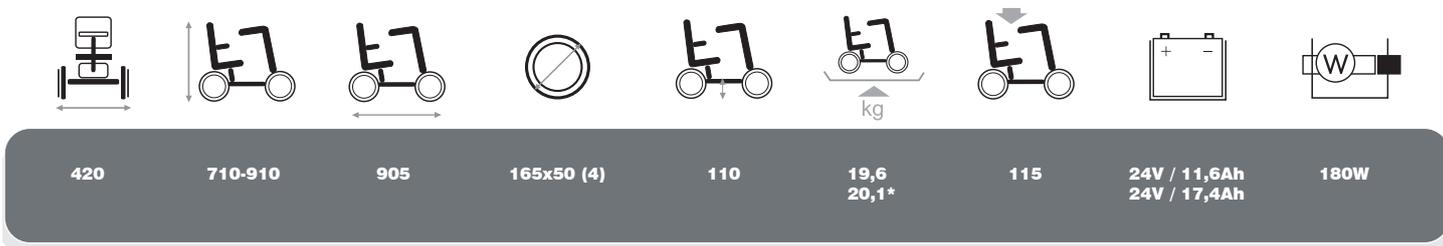


Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes. Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). * Uniquement pour le modèle gris argenté

Transport

Le scooter **Alya** est un scooter léger idéal pour **vous accompagner partout**. Sa taille compacte et son système de pliage en moins d'une minute le rendent parfaitement **transportable**. Idéal pour les courtes distances et facile à manœuvrer.

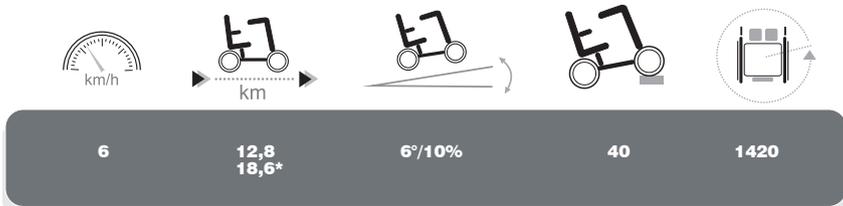

Couleurs



Entièrement pliable

Eteignez le scooter **Alya** et retirez la clé de contact. Abaissez la colonne de direction et tirez le levier jaune situé à l'arrière vers le haut. Poussez ensuite le siège vers le bas.

Relevez le support pour les pieds et repliez l'Alya sur lui-même. Tirez sur le levier jaune à la base de la colonne de direction et repliez celle-ci vers le bas. Maintenant, le scooter est prêt pour le transport

Votre garantie de qualité.

En termes de qualité, nos produits répondent aux normes les plus élevées imposées par les instituts de test reconnus dans la plupart des pays européens.

VERMEIREN France Avelin

Rue de l'Empire
59133 Phalempin

Tél.: 03 28 55 07 98

Fax: 03 20 90 28 89

info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne

Tél.: 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr



VERMEIREN
Pour plus de mobilité



Sous réserve de modifications techniques

Information pour les malvoyants est disponible sur demande. - E.R.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 05/2020