

Timix

Fauteuil roulant électrique

- Très maniable avec ses grandes roues avant
- Système de contrôle de trajectoire V-Stab inclus
 - Option lift de 300mm disponible
 - Accoudoirs réglables



VERMEIREN
we care for you

Performance et confort

Le Timix, muni de grandes roues à l'avant, permet une excellente navigation en intérieur grâce à son rayon de braquage court et de très bonnes capacités à l'extérieur avec un franchissement de 90 mm.



Caractéristiques



Palonnier articulé à l'arrière pour un franchissement en toute stabilité



Roues motrices à l'avant, idéal pour une giration facile, correcteur de trajectoire V-Stab inclus de série



Accoudoirs réglables et rabattables avec mémoire de position

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	640 - 660 mm
■ Hauteur totale	1065 mm
■ Longueur totale	1270 - 1292 - 1315 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 540 mm
■ Largeur d'assise	400 - 450 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 520 mm

■ Batteries	2x12V/80Ah/220W ou 2x12V/80Ah350W
■ Vitesse*	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action*	40 - 63 km
■ Poids	125 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	 

* Portée théorique, calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales. Les vitesses et la portée peuvent varier (environ 15 %). Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr



Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Timix** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Couleurs




32 coloris sont disponibles.

Pour plus d'informations, consultez notre gamme en ligne.



Accoudoirs réglables et rabattables avec mémoire de position

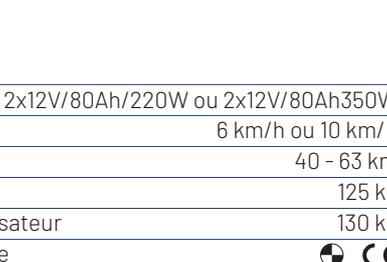

* Portée théorique, calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales. Les vitesses et la portée peuvent varier (environ 15 %). Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

VERMEIREN
we care for you