

# 708D

**LE + VERMEIREN**  
Le fauteuil le plus étroit du marché

708D

## FAUTEUIL MANUEL STANDARD & LÉGER

Le fauteuil le plus étroit du marché. Pratique et confortable, le 708D est un fauteuil idéal pour un parc de location.



Système de verrouillage des accoudoirs simple et résistant

Accoudoirs rabattables et démontables équipés de manchettes longues et confortables

Axes à démontage rapide

La roulette d'angle de palette protégée les murs et les meubles contre les chocs



**S**  
*708 Delight S*  
Version surbaissée (hauteur sol/siège 470mm). Le kit surbaissé a été spécialement conçu pour les personnes de petite taille. Idéal pour les patients hémiplegiques pour se déplacer à petits pas.



**T30**  
*Kit T30 - poussette*  
708D T30 version poussette. Fauteuil avec kit petites roues arrière 12" au lieu de 24".




**AMP**  
*Kit AMP (version amputé)*  
L'axe des roues arrière est reculé de 70 mm pour compenser la perte de poids des jambes. Ce léger déplacement du centre de gravité supprime tout risque de basculement vers l'arrière et assure une bonne stabilité.



**HEM2**  
*Double main courante*  
Version hémiplegique (réversible gauche/droite). Ce système pour hémiplegique se caractérise par un dispositif spécial de 2 mains courantes montées sur la grande roue placée du côté de la main valide.

### Large choix d'accessoires et options

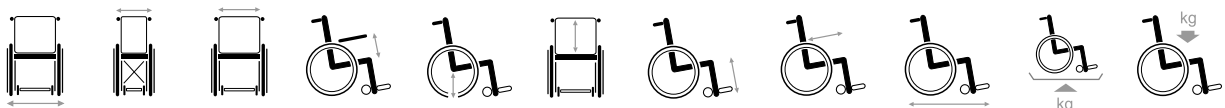

560		390								18	
590		420								18	
610	280	440	225	490	420	383-458	430	1109		19	120
630		460								19	
650		480								19	
670		500								19	

